

総合検査案内書

Rinsho miyazaki MEDICAL TESTING GUIDO



2026
(株)臨床宮崎

弊社ホームページもご覧ください

<http://rinmiya.com/>

行	項目 C D	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
数字					
1671	1 1-OHCS		16	60	生化 II
1587	1-25-(OH)2ビタミンD3		12	388	生化 I
1908	(1-3) β -Dグルカン		51	190	免疫
1449	1, 5-AG (1,5-アンヒドログルシトール)		13	80	生化 I
1239	1CTP (1型コラーゲン-C-テロペプチド)		26	腫2	腫2
2484	total PINP (1型プロコラーゲン-N-プロペプチド)		26	160	生化 II
1302	NTx(尿) (1型コラーゲン架橋N-テロペプチド)		26	153	生化 II
2484	total PINP (1型プロコラーゲン-N-プロペプチド)		26	160	生化 II
1271	2, 5-ヘキサンジオン		5	未保点	未保点
2605	25-OHVD (2 5-ヒドロキシビタミンD) ECLIA		12	117	生化 I
1187	5HIAA (5-ハイドロキシインドール酢酸) (尿)		16	95	生化 II
2597	尿中IV型コラーゲン		24		
1849	IV型コラーゲン		25	131	生化 I
1823	IV型コラーゲン7S		25	148	生化 I

A

2453	胃A B C D分類	6	未保点	未保点
1311	A B O式血液型	32	39	免疫
1177	ACTH (副腎皮質刺激ホルモン)	14	184	生化Ⅱ
1886	抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体)	36	775	免疫
1407	A D A (アデノシンデアミナーゼ)	6	32	生化Ⅰ
1448	A D A (胸水)	6	32	生化Ⅰ
1797	A F P (α-フェトプロテイン)	20	98	生化Ⅱ
1960	A F Pレクチン分画 (αFPクレチン分画)	20	185	生化Ⅱ
1249	抗サイログロブリン抗体 (TgAb/A-Tg)	15	136	生化Ⅱ
104	アルブミン (A1b)	1	11	生化Ⅰ
105	A L P (アルカリホスファターゼ)	2	11	生化Ⅰ
1651	A L Pアイソザイム/Ⅰ F	2	48	生化Ⅰ
1583	アルミニウム (Al)	4	109	生化Ⅰ
1786	抗ミトコンドリア抗体 (AMA半定量)	35	181	免疫
1339	抗ミトコンドリアM 2抗体 (AMA-M2定量)	35	189	免疫
2403	抗ミューラー管ホルモン (A M H)	17	600	生化Ⅱ
113	アミラーゼ (A M Y)	6	11	生化Ⅰ
2056	アミラーゼ (A M Y) (尿)	6	11	生化Ⅰ
1939	抗核抗体 (A N A)	33	110	免疫
2525	抗核抗体 (A N A) 半定量	33	99	免疫
101	A S T (G O T)	2	17	生化Ⅰ
103	A L T (G P T)	2	17	生化Ⅰ
2748	A P O A 2アイソフォーム	未掲載	335	生化2
1833	A P T T (活性化部分トロンボプラスチン時間)	57	29	血液
2463	抗アクアポリン 4抗体 (抗AQP-4抗体)	36	1000	免疫

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	4408	Ara h 2 (ヒナゲキ由来)	29	110	免疫
	2308	活性型レニン定量(ARC)	16	102	生化Ⅱ
	2479	抗A R S抗体	34	190	免疫
	1825	抗平滑筋抗体 (ASMA)	35	未保点	未保点
	203	ASO定量(抗ストレプトリジン-0価定量) (ASLO)	39	15	免疫
	1308	アンチトニン活性(AT活性/ATⅢ)	57	70	血液
	1562	アンチトニン抗原(AT抗原)	57	70	血液
	1194	抗TPO抗体/A-TPO(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)	15	138	生化Ⅱ
	1744	AVP (ADH/抗利尿ホルモン/アルギニン-バソプレッシン)	14	224	生化Ⅱ
	1741	A群β溶連菌迅速試験	未掲載	121	免疫

B

1370	BAP(骨型アルカリホスファターゼ)	26	161	生化Ⅱ
1817	総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 (BCAA/BTR/TYR)	10	283	生化Ⅱ
1579	BCA-225	21	158	生化Ⅱ
1438	BFP(塩基性フェトプロテイン)	20	150	生化Ⅱ
2234	B細胞表面免疫グロブリンIgG(Sm-IgG)	48	155	免疫
2235	B細胞表面免疫グロブリンIgM(Sm-IgM)	48	155	免疫
6653	B細胞表面免疫グロブリンIgA(Sm-IgA)	48	155	免疫
6655	B細胞表面免疫グロブリンIgD(Sm-IgD)	48	155	免疫
6656	B細胞表面免疫グロブリンIgκ鎖(Sm-Igκ(κ鎖))	48	155	免疫
6657	B細胞表面免疫グロブリンIgλ鎖(Sm-Igλ(λ鎖))	48	155	免疫
1771	尿中免疫電気泳動(BJ蛋白/β ₂ -ミクログロブリン蛋白)	28	201	免疫
1383	BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)	19	130	生化Ⅱ
1936	抗B ₁ 80抗体	36	270	免疫
117	尿素窒素(BUN/UN)	7	11	生化Ⅰ

C

2265	C1インアクチベータ活性(C1インヒター/C1エステラーゼインヒター)	未掲載	253	免疫
1697	C 3	27	70	免疫
1698	C 4	27	70	免疫
136	カルシウム(C a)	3	11	生化 I
2052	カルシウム(C a) (尿)	3	11	生化 I
2727	カルシウム(C a) (畜尿)	3	11	生化 I
1572	C A 1 2 5	21	136	生化 II
1589	C A 1 5－3	21	112	生化 II
1567	C A 1 9－9	20	121	生化 II
2551	C A 5 4 / 6 1	21	184	生化 II
2544	C A 6 0 2	21	190	生化 II
1292	C A 7 2－4	21	146	生化 II
9995	特異的IgE (CAPシングルアレルゲン)	29	1430	免疫
9994	特異的IgE (CAPマルチアレルゲン)	29	1430	免疫
1298	C A P－ファディアトープ	29	194	免疫

索引 (五十音順)

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	9991	CAP-小児アレルギー16	29	1430	免疫
	9989	CAP-食物アレルギー16	29	1430	免疫
		CAP-成人喘息16	29	1430	免疫
	9990	CAP-成人アトピー16	29	1430	免疫
	9993	CAP-鼻炎・喘息16	29	1430	免疫
	9988	CAP-PFAS16	29	1430	免疫
	1338	抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 (CARF 定量/Gal欠損IgG)	35	111	免疫
	1496	抗CCP抗体 (抗シトリン化ペプチド抗 体定量)	35	193	免疫
	1182	CCR (24時間) (クレアチニン・ク リアランス)	7	未保点	未保点
	9955	CCR4タンパク/FCM	45	10000	血液
	1805	CEA (癌胎児性抗原)	20	99	生化Ⅱ
	2435	抗セントロメア抗体定量 (抗CENP-B抗体 定量)	34	173	免疫
	1185	CH50 (補体価)	27	38	免疫
	131	コリンエステラーゼ (Che/Ch-E)	2	11	生化Ⅰ
	151	CK (クレアチニンキナーゼ) (CPK)	2	11	生化Ⅰ
	1761	CKアイソザイム (クレアチンキナーゼアイ ソザイム)	2	55	生化Ⅰ
	1636	CK-MB	2	90	生化Ⅰ
	135	Na・Cl (ナトリウム・クロール)	3	11	生化Ⅰ
	2057	Na・Cl (ナトリウム・クロール) (随時尿)	3	11	生化Ⅰ
	2058	Na・Cl (ナトリウム・クロール) (蓄尿)	3	11	生化Ⅰ
	1534	Cl (髄液)	62	11	生化Ⅰ
	1640	抗カルジオリピン抗体 IgG (抗CL-IgG 抗体)	36	226	免疫
	1641	抗カルジオリピン抗体 IgM (抗CL-IgM 抗体)	36	226	免疫
	1374	抗カルジオリピン-β2GP1 抗体 (抗 CL-β2GP1 複合体抗体)	36	223	免疫
		サイトメガロウイルス抗原C10, C11 (CMV 抗原C10, C11)	41	366	免疫
		サイトメガロウイルス抗原C7-HRP (CMV 抗原C7-HRP)	41	356	免疫
	1903	サイトメガロウイルス核酸検出 (CMV核 酸検出-新生児尿)	41	825	微生物
	2026	C-ペプチド (CPR)	18	105	生化Ⅱ
	1710	C-ペプチド (CPR) (尿)	18	108	生化Ⅱ
	2800	CPRインデックス (CPI/Cペプチドイン デックス)	18	未保点	未保点
	1707	クロム (Cr) (血液)	4	未保点	未保点
		クロム (Cr) (尿)	4	未保点	未保点
	143	クレアチニン (Cre/CRE)	7	11	生化Ⅰ
	2045	クレアチニン (Cre/Cre) (随時尿)	7	11	生化Ⅰ
	2046	クレアチニン (Cre/Cre) (蓄尿)	7	11	生化Ⅰ
	202	C-反応性蛋白 (CRP定量)	24	16	免疫
	1404	CSLEX (シアリルLe x 抗原)	21	160	生化Ⅱ
	1827	カルシトニン (CT)	15	127	生化Ⅱ
	1155	銅 (Cu) (血清)	4	23	生化Ⅰ
	1765	銅 (Cu) (尿)	4	23	生化Ⅰ
	9701	C. ディフィシル抗原毒素検査	41	95	免疫

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1119	C. ディフィシル毒素 (クロストリジ オデイス・ディフィシル毒素)	41	80	免疫
	9702	C. ディフィシル遺伝子検出 (CDトキシ ンB遺伝子)	41	450	微生物

D

	111	直接ビリルビン (D-Bil)	2	11	生化Ⅰ
	1539	DHEA-S (デヒドロエピアンドロステロン)	16	164	生化Ⅱ
	1394	DLST1 薬剤 (薬剤リンパ球刺激試 験)	50	345	免疫
	1680	DLST2 薬剤 (薬剤リンパ球刺激試 験)	50	425	免疫
	1681	DLST3 薬剤 (薬剤リンパ球刺激試 験)	50	515	免疫
	1818	DLST4 薬剤 (薬剤リンパ球刺激試 験)	50	515	免疫
	1573	DLST5 薬剤 (薬剤リンパ球刺激試 験)	50	515	免疫
	1701	抗DNA抗体定量	34	159	免疫
	1457	抗dsDNA-IgG抗体定量	34	163	免疫
	1590	DUPAN-2	20	115	生化Ⅱ
	1340	尿中デオキシビリジノリン (DPD)	26	191	生化Ⅱ
	1490	Dダイマー	57	127	血液

E

	1747	エストラジオール (E2)	17	167	生化Ⅱ
	2240	eGFRcreat	7	未保点	未保点
	2664	推算GFRcys	7	未保点	未保点

F

	2728	第Ⅱ因子凝固活性 (F2)	58	223	血液
	8903	第Ⅴ因子凝固活性 (F5)	58	223	血液
	2587	第Ⅶ因子凝固活性 (F7)	58	223	血液
	1565	第Ⅷ因子凝固活性 (F8)	58	223	血液
	6661	第Ⅷ因子インヒビター定量 (F8INH)	59	144	血液
	2704	第Ⅸ因子凝固活性 (F9)	58	223	血液
	6662	第Ⅸ因子インヒビター定量 (F9INH)	59	144	血液
	2729	第Ⅹ因子凝固活性 (F10)	58	223	血液
	1569	第Ⅺ凝固因子活性 (F11)	58	223	血液
	1570	第Ⅻ因子凝固活性 (F12)	59	223	血液
	2600	第ⅩⅢ因子凝固活性 (F13)	59	223	血液
	1326	遊離コレステロール (F-Cho)	8	11	生化Ⅰ
	1213	FDP (繊維素分解産物)	57	95	血液
	1214	尿中FDP	57	77	血液
	141	血清鉄 (Fe)	4	11	生化Ⅰ
	1804	フェリチン (FER)	4	102	生化Ⅰ
	1318	フィブリノゲン定量 (Fib)	57	23	血液
	2606	FIB-4 index	2	未保点	未保点
	1244	フィブリンモノマー複合体 (FM定量)	57	215	血液
	1683	卵胞刺激ホルモン (FSH)	14	105	生化Ⅱ
	1749	FT3 (遊離トリヨードサイロニン)	15	121	生化Ⅱ

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
---	------	------	-----	----------	-----------

1788 FT4 (遊離サイロキシン)

15

121

生化Ⅱ

G

1101 グリコアルブミン (GA)

13

55

生化Ⅰ

1375 抗GAD抗体

18

134

生化Ⅱ

1267 抗糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体)

36

257

免疫

1174 成長ホルモン (GH)

14

104

生化Ⅱ

150 血糖 (GLU/Glu) (血漿)

13

11

生化Ⅰ

160 血糖 (GLU/Glu) (血清)

13

11

生化Ⅰ

2664 推算GFRCys

7

未保点

未保点

H

1560 HA-IgG抗体

46

146

免疫

1819 HA-IgM抗体

46

146

免疫

1295 HANP (心房性ナトリウム利尿ペプチド)

19

221

生化Ⅱ

7205 HbA1c (NGSP)

13

49

生化Ⅰ

HBc-IgM抗体

46

146

免疫

1872 HBc抗体

46

130

免疫

2246 高感度HBc関連抗原定量 (HBVコア関連抗原: HBcrAg)

46

246

免疫

1870 HBe抗原

46

98

免疫

1871 HBe抗体

46

98

免疫

1730 HBs抗原定性

46

29

免疫

1682 HBs抗原

46

88

免疫

1731 HBs抗体定性

46

32

免疫

1687 HBs抗体

46

88

免疫

2547 HBV核酸定量 (HBV-DNA定量)

46

256

微生物

2367 HBV遺伝子型/EIA (HBVジェノタイプ判定/EIA)

46

340

免疫

2538 HBV遺伝子型PCR-Invader (HBVサブジェノタイプ判定検査)

46

未保点

未保点

9971 HBVプレコア・コアプロモーター変異株

46

450

微生物

1740 HCGヒト絨毛性ゴナドトロピン (血清)

17

134

生化Ⅱ

1325 HCGヒト絨毛性ゴナドトロピン (尿)

17

134

生化Ⅱ

1799 HCG-βサブユニット (遊離βHCG)

17

129

生化Ⅱ

1547 HCV抗体

47

102

免疫

1279 HCVコア蛋白-HS

47

102

免疫

1478 HCV核酸定量 (HCV-RNA定量)

47

412

微生物

1138 HCV群別 (グループ分類)

47

215

免疫

1831 HCV-RNAジェノタイプ

47

未保点

未保点

733 HDLコレステロール

8

17

生化Ⅰ

2542 nonHDL-C

8

未保点

未保点

2575 HE4 (ヒト精巢上体蛋白4)

21

200

生化Ⅱ

2390 血清HER2タンパク

22

360

腫2

2399 HEV IgA抗体

47

210

免疫

1305 HGF (肝細胞増殖因子)

19

227

生化Ⅱ

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
---	------	------	-----	----------	-----------

HIT抗体 (PF-4ヘパリン複合体)

33

390

免疫

2501 HIT抗体IgG (PF-4ヘパリン複合体IgG抗体)

33

376

免疫

1577 HIV抗原抗体

45

127

免疫

2714 HIV-1/2抗体確認検査

45

660

免疫

1800 HIV核酸定量

45

520

微生物

1469 HLA-A遺伝子型 (HLA-A-PCR)

32

未保点

未保点

2564 HLA-B遺伝子型 (HLA-B-PCR)

32

未保点

未保点

2768 HLA-C遺伝子型 (HLA-C-PCR)

32

未保点

未保点

1356 HLA-DRB1 遺伝子型 (PCR)

32

未保点

未保点

1358 HLA-DPB1 遺伝子型 (PCR)

32

未保点

未保点

2769 HLA-DQA1 遺伝子型 (PCR)

32

未保点

未保点

1357 HLA-DQB1 遺伝子型 (PCR)

32

未保点

未保点

2798 HOMA-IR

18

未保点

未保点

2799 HOMA-β

18

未保点

未保点

9551 HPV核酸検出 (HPV-RNA)

45

350

微生物

2206 HPV簡易ジェノタイプ判定

45

347

微生物

2363 HPV-DNA型判定 (PCR-Invader)

45

未保点

未保点

2375 HPV-DNA型判定/rrSSO

45

2000

微生物

1915 単純ヘルペス特異抗原 (HSV抗原定性)

41

180

免疫

1576 HTLV1抗体CLIA

45

159

免疫

2608 HTLV1抗体-LIA法

45

425

免疫

2690 HTLV-1核酸検出

45

450

微生物

2536 HVA (ホモバニリン酸)

16

69

生化Ⅱ

I

1472 抗IA-2抗体

18

213

生化Ⅱ

1146 間接ビリルビン (I-BIL)

2

未保点

未保点

1124 モノクローナルRF結合免疫複合体 (IC-mRF)

35

194

免疫

1623 免疫電気泳動 (IFE) M蛋白同定

28

224

免疫

1106 IgA

27

38

免疫

1109 IgE

29

100

免疫

9995 特異的IgE (CAPシングルアレルゲン)

29

1430

免疫

9994 特異的IgE (CAPマルチアレルゲン)

29

1430

免疫

1708 ソマトメジンC (IGF-1)

14

212

生化Ⅱ

1195 IgG

27

38

免疫

2676 IgG1/TIA

索引 (五十音順)

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1197	I g M	27	38	免疫
	2720	I L-6 (インターロイキン-6) (ECLIA)	51	170	免疫
	2020	インスリン (IRI)	18	100	生化Ⅱ
	2802	インスリン分泌指数 (Insulinemic Index)	18	未保点	未保点
	140	無機リン (P/IP)	3	17	生化Ⅰ

J

	2436	抗 J o-1 抗体定量	34	140	免疫
--	------	--------------	----	-----	----

K

	134	カリウム (K)	3	11	生化Ⅰ
	2049	カリウム (K) (随時尿)	3	11	生化Ⅰ
	2050	カリウム (K) (蓄尿) g/day	3	11	生化Ⅰ
	2222	カリウム (K) (蓄尿) mEq/day	3	11	生化Ⅰ
	1317	K L-6	27	108	生化Ⅰ

L

	109	L A P (ロイシニアミノペプチダーゼ)	6	11	生化Ⅰ
	2319	ループスアンチコアグulant (PL中 和) (LAC定量/RRVTループス抗凝固因 子)	35	265	免疫
	1315	ループス抗凝固因子-蛇毒 (LAC定量 /PLI (NR))	35	265	免疫
	112	L D (LDH)	2	11	生化Ⅰ
	1165	L D Hアイソザイム/ I F	2	48	生化Ⅰ
	1937	L D H (穿刺液)	62	11	生化Ⅰ
	1930	L D L コレステロール	8	18	生化Ⅰ
	2402	L D L-C (F式)	8	未保点	未保点
	2682	s d-L D L	8	未保点	未保点
	2524	L / H 比 (LDL-C/HDL-C)	8	未保点	未保点
	2455	尿中 L 型脂肪酸結合蛋白 (L-FABP)	24	210	尿便
	1684	黄体形成ホルモン (LH)	14	105	生化Ⅱ
	1813	リチウム (Li)	53	470	特薬Ⅰ
	1766	抗 L K M 1 抗体 (抗肝腎ミクロソーム-1 抗体)	35	215	免疫
	1858	L P L (リポプロテインリパーゼ)	9	219	生化Ⅰ
	2702	L R G (ロイシンリッチ α 2グリオプロ テイン)	27	268	生化Ⅰ

M

	2500	M2BPGi (Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性 体)	25	194	生化Ⅰ
	2451	M A C 抗体 (抗抗菌素抗体)	39	151	免疫
	2528	M A S T 3 6	29	1430	免疫
	2397	M D A-L D L (マロンジアルデヒド修 飾LD)	9	194	生化Ⅰ
	2554	抗 M D A 5 抗体	34	270	免疫
	1654	M g (マグネシウム)	3	11	生化Ⅰ
	2577	抗 M i-2 抗体	34	270	免疫
	1756	MMP-3 (マトリックスメタロプロティナー ゼ3)	35	116	免疫
	1854	マンガン (Mn) (血液)	4	27	生化Ⅰ
	2766	マンガン (Mn) (尿)	4	27	生化Ⅰ

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1282	MPO-ANCA (P-ANCA/抗好中球細胞質ミエロ ペルオキシダーゼ抗体)	36	250	免疫
	2481	抗 M u S K 抗体 (抗筋特異的チロシンキ ナーゼ抗体)	36	1000	免疫
	1623	免疫電気泳動 (IFE) M 蛋白同定	28	224	免疫

N

	135	N a · C l (ナトリウム・クロール)	3	11	生化Ⅰ
	2057	N a · C l (ナトリウム・クロール) (随時尿)	3	11	生化Ⅰ
	2058	N a · C l (ナトリウム・クロール) (蓄尿)	3	11	生化Ⅰ
	2772	尿中 Na/K 比	3	未保点	未保点
	1435	N C C-S T-4 3 9	20	112	生化Ⅱ
	124	遊離脂肪酸 (NEFA)	9	59	生化Ⅰ
	1157	アンモニア (NH3)	7	50	生化Ⅰ
	1795	NMP22 定量 (尿)	0	147	生化Ⅱ
	2542	n o n H D L-C	8	未保点	未保点
	1588	N S E (神経特異エノラーゼ)	20	142	生化Ⅱ
	2208	N T-P r o B N P	19	136	生化Ⅱ
	1302	N T x (尿) (I 型コラーゲン架橋 N-テロペプ チド)	26	153	生化Ⅱ
	1270	N-メチルホルムアミド	5	未保点	未保点

O

	1367	オステオカルシン (OC ; BGP)	19	153	生化Ⅱ
--	------	---------------------	----	-----	-----

P

	2484	total P1NP (I 型プロコラーゲン-N-ブ ロペプチド)	26	160	生化Ⅱ
	1801	P-III-P (プロコラーゲン-III-ペプチド)	25	136	生化Ⅰ
		抗 p 5 3 抗体	20	163	生化Ⅱ
	140	無機リン (P/IP)	3	17	生化Ⅰ
	2290	アルドステロン/レニン比 (PAC/PRA)	16	未保点	生化Ⅱ
	2291	アルドステロン/活性レニン定量 (PAC/ARC)	16	未保点	生化Ⅱ
	1470	抗血小板表面 IgG (PAIgG)	33	190	免疫
	1282	MPO-ANCA (P-ANCA/抗好中球細胞質ミエロ ペルオキシダーゼ抗体)	36	250	免疫
	1262	鉛 (Pb)	4	未保点	未保点
	2261	プロカルシトニン定量 (PCT 定量)	51	276	生化Ⅰ
	1378	P F-4 (血小板第4因子)	59	173	血液
	2474	H I T 抗体 (PF-4ヘパリン複合体)	33	390	免疫
	2501	H I T 抗体 I g G (PF-4ヘパリン複合体 IgG 抗体)	33	376	免疫
	2751	プロステートヘルスインデックス (phi)	21	281	生化Ⅱ
	1845	P I V K A II-C L I A	20	131	生化Ⅱ
	125	リン脂質 (PL)	9	15	生化Ⅰ
	1315	ループス抗凝固因子-蛇毒 (LAC 定量 /PLI (NR))	35	265	免疫
	1917	PR3-ANCA (C-ANCA) (細胞質性好中球細胞 質抗体価)	36	250	免疫
	1670	血漿レニン活性 (PRA)	16	100	生化Ⅱ
	1743	プロラクチン (PRL)	14	98	生化Ⅱ
	1373	P r o G R P (ガストリン放出ペプチド 前駆体)	20	175	生化Ⅱ

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1372	高感度PSA（前立腺特異抗原）	21	121	生化Ⅱ
	1700	PSA-ACT	21	124	生化Ⅱ
	8824	PSAレクチン結合分画比 (S2, 3PSA%)	21	248	生化Ⅱ
	1269	フリーPSA/トータルPSA比 (PSAF/T比)	21	150	生化Ⅱ
	8824	PSAレクチン結合分画比 (S2, 3PSA%)	21	248	生化Ⅱ
	1832	PT（プロトロンビン時間）	57	18	血液
	1128	PTH-INTACT（副甲状腺ホルモンINTACT）	15	161	生化Ⅱ
	2230	whole PTH（副甲状腺ホルモンwhole）	15	161	生化Ⅱ
	1614	PTHrP-Intact（PTH関連蛋白-インタクト/副甲状腺関連蛋白-インタクト）	15	185	生化Ⅱ
	1396	P型アミラーゼ定量	6	48	生化Ⅰ

Q

2366	QFTゴールドプラス（結核菌特異のインターフェロン- γ 産生能）	64	593	微生物
------	--	----	-----	-----

R

1584	レチノール結合蛋白 (RBP)	24	129	免疫
1307	網状赤血球数（レチクロ）	56	12	血液
1695	リウマチ因子 (RF) 定量	35	30	免疫
1312	Rh式血液型	32	39	免疫
1371	RLPコレステロール（レムナント様リポ蛋白コレステロール）	8	174	生化Ⅰ
2332	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	34	166	免疫
2743	抗RNP抗体/半定量	34	144	免疫
2576	ROMA（卵巣悪性腫瘍推定値）	21	未保点	未保点
1260	RPR定性	37	15	免疫
1251	RPR定量	37	34	免疫
2319	ループアンプナグアノシド（LAMP中和）（LAC定量/RRVTRループ抗凝固因子）	35	265	免疫

S

1405	血清アミロイドA蛋白 (SAA)	24	47	生化Ⅱ
1345	SCC抗原（扁平上皮癌関連抗原）	20	101	生化Ⅱ
2707	SCCA2	未掲載	300	免疫
2434	抗ScI-70抗体定量	34	157	免疫
2682	s d-LDL	8	未保点	未保点
1923	セレン (Se)（血清）	4	144	生化Ⅰ
2586	可溶性フィブリンモノマー複合体定性 (SF定性)	57	93	血液
8900	sFit-1/PIGF比	17	340	生化Ⅱ
1244	フィブリンモノマー複合体 (FM定量)	57	215	血液
1914	可溶性IL-2レセプター (sIL-2レセプター)	22	438	生化Ⅱ
6658	細胞表面マーカー-SingI-color	48	(一)	免疫
1811	SLX（シアリルLex-i抗原）	20	140	生化Ⅱ
2430	抗Sm抗体定量（抗SmDp抗体定量）	34	147	免疫
6653	B細胞表面免疫グロブリンIgA (Sm-IgA)	48	155	免疫
6655	B細胞表面免疫グロブリンIgD (Sm-IgD)	48	155	免疫
2234	B細胞表面免疫グロブリンIgG (Sm-IgG)	48	155	免疫

2235	B細胞表面免疫グロブリンIgM (Sm-IgM)	48	155	免疫
6656	B細胞表面免疫グロブリンIgK鎖 (Sm-IgK (K鎖))	48	155	免疫
6657	B細胞表面免疫グロブリンIgλ鎖 (Sm-Igλ (λ鎖))	48	155	免疫
2519	可溶性マトリリン関連ペプチド (SMRP)	22	220	生化Ⅱ
2220	SP-A（肺サーファクタント蛋白A）	27	130	生化Ⅰ
1293	SPan-1	20	144	生化Ⅱ
1902	SP-D（肺サーファクタント蛋白D）	27	136	生化Ⅰ
2432	抗SS-A/Ro抗体定量	34	161	免疫
2433	抗SS-B/La抗体定量	34	153	免疫
1118	抗ss-DNA抗体IgG定量	34	159	免疫
1355	STN（シアリルTn抗原）	21	146	生化Ⅱ
2801	SUIT	18	未保点	未保点

T

4501	TARC	29	179	免疫
1291	トロンビン・アンチトロンビン複合体 (TAT)	57	166	血液
1158	TBG（サイロキシン結合グロブリン）	15	130	生化Ⅱ
110	総ビリルビン (T-BIL)	2	11	生化Ⅰ
107	総コレステロール (TC/T-Cho)	8	17	生化Ⅰ
123	中性脂肪 (TG)	8	11	生化Ⅰ
1610	サイログロブリン (Tg)	15	128	生化Ⅱ
1249	抗サイログロブリン抗体 (TgAb/A-Tg)	15	136	生化Ⅱ
149	TIBC（総鉄結合能）	4	11	生化Ⅰ
2562	抗TIF1- γ 抗体	34	270	免疫
1916	チミジinkinナーゼ活性 (TK活性)	22	233	血液
1989	トロンボモジュリン (TM)	59	204	血液
1429	淋菌及びクラミジアトラコマチス/TMA	38	270	微生物
1493	心筋トロポニンT (TNT)	25	109	生化Ⅰ
2484	total PINP (I型プロコラーゲンN-プロペプチド)	26	160	生化Ⅱ
102	総蛋白 (TP)	1	11	生化Ⅰ
1133	トータルPAI-1 (tPA-PAI-1複合体)	58	240	血液
1253	TP抗体 (TPHA) 定性	37	32	免疫
1258	TP抗体 (TPHA) 定量	37	53	免疫
1194	抗TP0抗体/A-TP0 (抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)	15	138	生化Ⅱ
2442	TRAb定量 (第3世代)/TSHレセプター抗体	15	208	生化Ⅱ
2244	TRACP-5b (酒石酸抵抗性ホスファターゼ5b)	26	156	生化Ⅱ
トランスフェリン飽和度 (TSAT)				
1649	トランスフェリン (Tf)	24	60	免疫
1166	TSH (甲状腺刺激ホルモン)	15	98	生化Ⅱ
2437	T-SPO.T.B (結核菌特異のインターフェロン- γ 遊離試験)	64	593	微生物
2738	トリコマス・マイコプラスマ/PCR (TV・MG/PCR)	38	350	微生物

索引 (五十音順)

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	6659	細胞表面マーカーTwo-color	48	(一)	免疫
	2537	T細胞・B細胞百分率	48	193	免疫

U

2431	抗RNP抗体定量 (抗U1-RNP抗体定量)	34	144	免疫
119	尿酸(UA)	7	11	生化I
2047	尿酸(UA) (随時尿)	7	11	生化I
2048	尿酸(UA) (蓄尿)	7	11	生化I
2251	ucOC (低カルボキシル化オステオカルシン)	19	154	生化II
1742	U I B C (不飽和鉄結合能)	4	11	生化I
117	尿素窒素(BUN/UN)	7	11	生化I

V

2310	VEGF (血清)	19	460	生化I
2527	V i e w 3 9	29	1430	免疫
2535	VMA (バニルマンデル酸)	16	90	生化II
2722	フォン・ウィブラント因子活性 (VWF活性)	59	126	血液
6664	フォン・ウィブラント因子抗原量 (VWF抗原)	59	147	血液
1929	水痘帯状ヘルペス特異抗原 (VZV抗原定性)	41	227	免疫

W

2230	whole-PTH (副甲状腺ホルモンwhole)	15	161	生化II
------	---------------------------	----	-----	------

Z

1762	亜鉛(Zn) (血清)	4	132	生化I
1763	亜鉛(Zn) (尿)	4	136	生化I

ギリシャ文字

1395	$\alpha 1$ 酸性糖蛋白 ($\alpha 1$ -アシッドグリコプロテイン)	24	未保点	未保点
1645	$\alpha 1$ アンチトリプシン	24	80	血液
1884	$\alpha 1$ マイクログロブリン ($\alpha 1$ MG)	25	129	免疫
1885	$\alpha 1$ マイクログロブリン ($\alpha 1$ MG) (尿)	25	132	生化II
1657	$\alpha 2$ マイクログロブリン ($\alpha 2$ MG)	24	138	血液
1555	プラスミン・プラスミンインヒビター複合体 ($\alpha 2$ PIC)	58	150	血液
1397	アンチプラスミン活性 ($\alpha 2$ プラスミンインヒビター)	58	128	血液
1797	AFP (α -フェトプロテイン)	20	98	生化II
1960	AFPレクチン分画 (α Fクレチン分画)	20	185	生化II
1755	$\beta 2$ MG ($\beta 2$ MG) (尿)	25	98	免疫
1754	$\beta 2$ -マイクログロブリン ($\beta 2$ MG)	25	98	免疫
1908	(1-3) β -Dグルカン	51	190	免疫
1379	β -TG (β -トロンボグロブリン)	59	171	血液
121	β -リポ蛋白	9	未保点	未保点
9447	抗 $\beta 2$ グリコプロテインI抗体 IgG (抗 $\beta 2$ GP1 IgG)	36	226	免疫
9448	抗 $\beta 2$ グリコプロテインI抗体 IgM (抗 $\beta 2$ GP1-IgM抗体)	36	226	免疫
153	γ -GTP	2	11	生化I
1430	γ -Sm (γ -セミノプロテイン)	21	187	生化II

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1264	尿中 δ -アミノレブリン酸 (δ -ALA定量)	5	106	尿便

あ

2202	アカントアメーバ (アcantamoeba)	61	未保点	未保点
1762	亜鉛(Zn) (血清)	4	132	生化I
1763	亜鉛(Zn) (尿)	4	136	生化I
1848	ビタミンC (アスコルビン酸)	12	296	生化I
1554	アスペルギルス抗原E I A	51	157	免疫
2723	アスペルギルス I g G抗体	51	390	免疫
1232	アセトアミノフェン	54	180	生化I
1643	アセトン (尿)	5	未保点	未保点
2213	アディポネクチン	19	未保点	未保点
1407	ADA (アデノシンデアミナーゼ)	6	32	生化I
1448	ADA (胸水)	6	32	生化I
1331	アポリポ蛋白A I	9	31	生化I
1332	アポリポ蛋白A II	9	31	生化I
1333	アポリポ蛋白B	9	31	生化I
1334	アポリポ蛋白C II	9	31	生化I
1335	アポリポ蛋白C III	9	31	生化I
1336	アポリポ蛋白E	9	31	生化I
1901	アミオダロン	54	470	特薬I
1896	アミカシン	53	470	特薬I
1526	アミノ酸分析-総 (血漿)	10	1074	生化II
1838	アミノ酸分析-特定項目	10	1074	生化II
1817	総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 (BCAA/BTR/TYR)	10	283	生化II
113	アミラーゼ (AMY)	6	11	生化I
2056	アミラーゼ (AMY) (尿)	6	11	生化I
1663	アミラーゼアイソザイム	6	48	生化I
1396	P型アミラーゼ定量	6	48	生化I
1405	血清アミロイドA蛋白 (SAA)	24	47	生化II
105	ALP (アルカリホスファターゼ)	2	11	生化I
1651	ALPアイソザイム/IF	2	48	生化I
1744	AVP (ADH/抗利尿ホルモン/アルギニン-バソプレッシン)	14	224	生化II
1688	アルドステロン	16	122	生化II
2290	アルドステロン/レニン比 (PAC/PRA)	16	未保点	生化II
2291	アルドステロン/活性レニン定量 (PAC/ARC)	16	未保点	生化II
104	アルブミン (Aib)	1	11	生化I
1797	AFP (α -フェトプロテイン)	20	98	生化II
1767	尿アルブミン・クレアチニン補正 (随時)	1	99	尿便
2260	尿アルブミン (蓄尿)	60	99	尿便
1228	アルベカシン	53	470	特薬I
1583	アルミニウム (Al)	4	109	生化I

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1308	アンチトロンビン活性(AT活性/ATⅢ)	57	70	血液
	1562	アンチトロンビン抗原(AT抗原)	57	70	血液
	1397	アンチプラスミン活性(α2プラスミン インヒビター)	58	128	血液
	1449	1, 5-A G (1, 5-アンヒドログルシ トール)	13	80	生化Ⅰ
	1157	アンモニア(NH ₃)	7	50	生化Ⅰ

い

	2453	胃A B C D分類	6	未保点	未保点
	7204	イマチニブ	53	470	特薬Ⅰ
	2020	インスリン(IRI)	18	100	生化Ⅱ
	2733	インスリン抗体	18	107	免疫
	2720	I L-6 (インターロイキン-6) (ECLIA)	51	170	免疫
	2802	インスリン分泌指数(Insulinemic Index)	18	未保点	未保点

う

	9703	ウイルス抗体価	40	79	免疫
	9704	グロブリン別ウイルス抗体価	40	200	免疫

え

	1747	エストラジオール(E2)	17	167	生化Ⅱ
	1557	エラスターゼⅠ	6	120	生化Ⅱ
	1820	エリスロポエチン	19	209	生化Ⅱ
	2455	尿中L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)	24	210	尿便
	1438	B F P (塩基性フェトプロテイン)	20	150	生化Ⅱ
	1851	エンドトキシン定量	51	229	免疫
	1201	透析液エンドトキシン濃度	51	未保点	未保点

お

	1684	黄体形成ホルモン(LH)	14	105	生化Ⅱ
	1718	プロゲステロン(黄体ホルモン)	17	139	生化Ⅱ
	2601	オートタキシン	25	194	生化Ⅰ
	1367	オステオカルシン(OC; BGP)	19	153	生化Ⅱ
	2215	オリゴクロナルバンド	28	522	尿便

か

	1373	P r o G R P (ガストリン放出ペプチド 前駆体)	20	175	生化Ⅱ
	1833	APTT(活性化部分トロンボプラスチン時 間)	57	29	血液
	2308	活性型レニン定量(ARC)	16	102	生化Ⅱ
	1844	カテコールアミン3分画	16	161	生化Ⅱ
	2214	ガバベンチン	52	470	特薬Ⅰ
	2586	可溶性フィブリンモノマー複合体定性 (SF定性)	57	93	血液
	2519	可溶性リソリン関連ペプチド(SMRP)	22	220	生化Ⅱ
	1914	可溶性I L-2レセプター(sIL-2レセプ ター)	22	438	生化Ⅱ
	134	カリウム(K)	3	11	生化Ⅰ
	2049	カリウム(K)(随時尿)	3	11	生化Ⅰ
	2050	カリウム(K)(蓄尿) g/day	3	11	生化Ⅰ

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	2222	カリウム(K)(蓄尿) mEq/day	3	11	生化Ⅰ
	1827	カルシトニン(CT)	15	127	生化Ⅱ
	136	カルシウム(C a)	3	11	生化Ⅰ
	2052	カルシウム(C a)(尿)	3	11	生化Ⅰ
	2727	カルシウム(C a)(蓄尿)	3	11	生化Ⅰ
	1905	カルニチン	12	95	生化Ⅰ
	1874	カルバマゼピン	52	470	特薬Ⅰ
	2571	便中カルプロテクチン	27	270	尿便
	1305	H G F (肝細胞増殖因子)	19	227	生化Ⅱ
	1745	カンジダマンナン抗原	51	134	免疫
	1245	関節液一般(関節液中結晶鑑別)	62	50	尿便
	2750	細胞数(関節液)	62	未保点	未保点
	2749	細胞分類(関節液)	62	未保点	未保点
	1319	間接クームス試験	32	47	免疫
	1805	C E A (癌胎児性抗原)	20	99	生化Ⅱ
	1204	寒冷凝集反応	39	11	免疫

<

	1120	クラミジアトラコマチス抗体IgA、IgG抗 体	38	200	免疫
	2674	クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体	38	70	免疫
	2675	クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体	38	75	免疫
	1938	クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体	38	152	免疫
	1729	クラミドフィラ・シッタシ抗体(オウム 病抗体)	38	79	免疫
	1127	クラミジア・トラコマチス核酸検出 (PCR)	38	188	微生物
	1633	クリオグロブリン定性	28	42	免疫
	1101	グリコアルブミン(GA)	13	55	生化Ⅰ
	1439	クリプトコックス・ネオフォルマンス抗 原	51	166	免疫
	143	クレアチニン(Cre/CRE)	7	11	生化Ⅰ
	2045	クレアチニン(CRE/Cre)(随時尿)	7	11	生化Ⅰ
	2046	クレアチニン(CRE/Cre)(蓄尿)	7	11	生化Ⅰ
	1182	C C R (24時間)(クレアチニン・ク リアランス)	7	未保点	未保点
	151	C K (クレアチニンキナーゼ)(CPK)	2	11	生化Ⅰ
	1761	C Kアイソザイム(クレアチニンキナーゼアイソ ザイム)	2	55	生化Ⅰ
	135	N a・C l (ナトリウム・クロール)	3	11	生化Ⅰ
	2740	クロザピン	53	470	特薬Ⅰ
	1119	C.ディフィシル毒素(クロストリジ オ・ディフィシル毒素)	41	80	免疫
	1883	コロナゼバム	52	470	特薬Ⅰ
	1812	クロバザム	52	470	特薬Ⅰ
	9704	グロブリン別ウイルス抗体価	40	200	免疫
	1707	クロム(Cr)(血液)	4	未保点	未保点
	10000	クロム(Cr)(尿)	4	未保点	未保点

索引 (五十音順)

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
け					
	1306	血液像	56	15	血液
	2073	血液像（目視）	56	25	血液
	2366	QFTゴールドプラス（結核菌特異的インターフェロン- γ 産生能）	64	593	微生物
	2437	T-SPOT.TB（結核菌特異的インターフェロン- γ 遊離試験）	64	593	微生物
	1378	PF-4（血小板第4因子）	59	173	血液
	1670	血漿レニン活性（PRA）	16	100	生化Ⅱ
	1405	血清アミロイドA蛋白（SAA）	24	47	生化Ⅱ
	141	血清鉄（Fe）	4	11	生化Ⅰ
	160	血糖（GLU/Glu）（血清）	13	11	生化Ⅰ
	150	血糖（GLU/Glu）（血漿）	13	11	生化Ⅰ
	1807	ケトン体分画	13	59	生化Ⅰ
	1894	ゲンタマイシン	53	470	特薬Ⅰ
こ					
	2479	抗ARS抗体	34	190	免疫
	1936	抗BPI80抗体	36	270	免疫
	1496	抗CCP抗体（抗シトリン化ペプチド抗体定量）	35	193	免疫
	1701	抗DNA抗体定量	34	159	免疫
	1457	抗dsDNA-IgG抗体定量	34	163	免疫
	1375	抗GAD抗体	18	134	生化Ⅱ
	1472	抗IA-2抗体	18	213	生化Ⅱ
	2436	抗Jo-1抗体定量	34	140	免疫
	1766	抗LKM1抗体（抗肝腎ミクロソーム-1抗体）	35	215	免疫
	2554	抗MDA5抗体	34	270	免疫
	2577	抗Mi-2抗体	34	270	免疫
	2481	抗MUSK抗体（抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体）	36	1000	免疫
	2224	抗p53抗体	20	163	生化Ⅱ
	2332	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	34	166	免疫
	2431	抗RNP抗体定量（抗U1-RNP抗体定量）	34	144	免疫
	2743	抗RNP抗体/半定量	34	144	免疫
	2434	抗Scl-70抗体定量	34	157	免疫
	2430	抗Sm抗体定量（抗SmDp抗体定量）	34	147	免疫
	2432	抗SS-A/Ro抗体定量	34	161	免疫
	2433	抗SS-B/La抗体定量	34	153	免疫
	1118	抗ss-DNA抗体IgG定量	34	159	免疫
	2562	抗TIF1- γ 抗体	34	270	免疫
	9447	抗 β 2グリオブリンI抗体IgG（抗 β 2GP1IgG）	36	226	免疫
	9448	抗 β 2グリオブリンI抗体IgM（抗 β 2GP1-IgM抗体）	36	226	免疫
	2463	抗アクアポリン4抗体（抗AQP-4抗体）	36	1000	免疫
	1886	抗アセチルコリンレセプター抗体（抗AChR抗体）	36	775	免疫
	1240	抗胃壁細胞抗体（抗バリエタル細胞抗体）	35	未保点	未保点

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	2525	抗核抗体（ANA）半定量	33	99	免疫
	1939	抗核抗体（ANA）	33	110	免疫
	1338	抗ガラクトース欠損IgG抗体定量（CARF定量/Gal欠損IgG）	35	111	免疫
	1374	抗カルジオリピン- β 2GP1抗体（抗QL- β 2GP1複合体抗体）	36	223	免疫
	1640	抗カルジオリピン抗体IgG（抗QL-IgG抗体）	36	226	免疫
	1641	抗カルジオリピン抗体IgM（抗QL-IgM抗体）	36	226	免疫
	1766	抗LKM1抗体（抗肝腎ミクロソーム-1抗体）	35	215	免疫
	2246	高感度HBc関連抗原定量（HBVコア関連抗原：HBcrAg）	46	246	免疫
	1372	高感度PSA（前立腺特異抗原）	21	121	生化Ⅱ
	2481	抗MUSK抗体（抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体）	36	1000	免疫
	1322	抗血小板抗体	33	261	免疫
	1470	抗血小板表面IgG（PAIgG）	33	190	免疫
	2451	MAC抗体（抗抗菌抗体）	39	151	免疫
	1282	MPO-ANCA（P-ANCA/抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体）	36	250	免疫
	1166	TSH（甲状腺刺激ホルモン）	15	98	生化Ⅱ
	1384	TSAbs（甲状腺刺激抗体/TSH刺激性レセプター抗体）	15	330	免疫
	1194	抗TPO抗体/A-TPO（抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体）	15	138	生化Ⅱ
	1249	抗サイログロブリン抗体（TgAb/A-Tg）	15	136	生化Ⅱ
	2072	好酸球数	56	17	血液
	1303	鼻汁好酸球	56	15	血液
	1267	抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体）	36	257	免疫
	1496	抗CCP抗体（抗シトリン化ペプチド抗体定量）	35	193	免疫
	203	ASO定量（抗ストレプトリジン-O価定量）（ASLO）	39	15	免疫
	2435	抗セントロメア抗体定量（抗CENP-B抗体定量）	34	173	免疫
	1499	抗デスモグレ1抗体	36	300	免疫
	1507	抗デスモグレ3抗体	36	270	免疫
	1482	抗トリコスポロン・アサヒ抗体	51	847	免疫
	1240	抗胃壁細胞抗体（抗バリエタル細胞抗体）	35	未保点	未保点
	1825	抗平滑筋抗体（ASMA）	35	未保点	未保点
	1786	抗ミトコンドリア抗体（AMA半定量）	35	181	免疫
	1339	抗ミトコンドリアM2抗体（AMA-M2定量）	35	189	免疫
	2403	抗ミューラー管ホルモン（AMH）	17	600	生化Ⅱ
		AVP（ADH/抗利尿ホルモン/アルギニンバソプレッシン）	14	224	生化Ⅱ
	1370	BAP（骨型アルカリホスファターゼ）	26	161	生化Ⅱ
	1227	コハク酸シベンゾリン（シベンゾリンコハク酸塩）	54	470	特薬Ⅰ
	1239	ICTP（1型コラーゲン-C-テロペプチド）	26	腫2	腫2
	131	コリンエステラーゼ（Che/Ch-E）	2	11	生化Ⅰ
	1179	コルチゾール	16	121	生化Ⅱ
さ					
	1826	シフラ（サイトケラチン19フラグメント）	20	154	生化Ⅱ
	1806	サイトメガロウイルス抗原C10、C11（CMV抗原C10、C11）	41	366	免疫

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1991	サイトメガロウイルス抗原C7-HRP (CMV 抗原C7-HRP)	41	356	免疫
	1903	サイトメガロウイルス核酸検出 (CMV核 酸検出-新生児尿)	41	825	微生物
	1917	PR3-ANCA (C-ANCA) (細胞質性好中球細胞 質抗体価)	36	250	免疫
	6658	細胞表面マーカー-Singl-color	48	(一)	免疫
	6659	細胞表面マーカー-Two-color	48	(一)	免疫
	1158	T B G (サイロキシシン結合グロブリン)	15	130	生化Ⅱ
	1610	サイログロブリン (Tg)	15	128	生化Ⅱ
	1249	抗サイログロブリン抗体 (TgAb/A-Tg)	15	136	生化Ⅱ
	7206	サルチル酸	54	470	特薬Ⅰ

し

	1881	ジアゼパム	52	470	特薬Ⅰ
	1686	ビタミンB12 (シアノコバラミン)	12	134	生化Ⅰ
	1404	CSLEX (シアリルLe x 抗原)	21	160	生化Ⅱ
	1811	S L X (シアリルLe x-i 抗原)	20	140	生化Ⅱ
	1355	S T N (シアリルTn 抗原)	21	146	生化Ⅱ
	1504	シクロスボリン (血液)	53	470	特薬Ⅰ
	1713	ジゴキシン	54	470	特薬Ⅰ
	1488	シスタチンC	7	109	生化Ⅰ
	1887	ジソピラミド	54	470	特薬Ⅰ
	1826	シフラ (サイトケラチン19フラグメン ト)	20	154	生化Ⅱ
	1227	コハク酸シベンソリン (シベンソリンコ ハク酸塩)	54	470	特薬Ⅰ
	1563	脂肪酸4分画	9	389	生化Ⅱ
	2508	脂肪染色 (ス*タンⅢ染色)	61	20	尿便
	2244	TRACP-5b (酒石酸抵抗性ホスファターゼ5 b)	26	156	生化Ⅱ
	1295	H A N P (心房性ナトリウム利尿ペプチ ド)	19	221	生化Ⅱ
	1493	心筋トロポニンT (TNT)	25	109	生化Ⅰ
	1830	心筋トロポニンT定性	25	112	生化Ⅰ
	1296	心室筋ミオシン軽鎖1	25	184	生化Ⅰ
	9995	特異的IgE (CAPシングルアラレルゲン)	29	1430	免疫
	1588	N S E (神経特異エノラーゼ)	20	142	生化Ⅱ
	1782	浸透圧	5	15	血液
	1793	浸透圧 (尿)	5	16	尿便
	1787	浸透圧 (透析液)	5	160	尿便

す

	2664	推算G F R Cys	7	未保点	未保点
	1929	水痘帯状ヘルペス特異抗原 (VZV抗原定性)	41	227	免疫
	1531	髄液一般検査	62	62	尿便
	1533	蛋白定量 (髄液)	62	11	生化Ⅰ
	1532	糖定量 (髄液)	62	11	生化Ⅰ
	1534	C I (髄液)	62	11	生化Ⅰ
	2671	膵グルカゴン	18	150	生化Ⅱ

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1186	膵ホスホリパーゼA2	6	204	生化Ⅰ
	1265	スチレン代謝物 (マンデル酸)	5	未保点	未保点

せ

	1275	精液一般検査	61	62	尿便
	1174	成長ホルモン (GH)	14	104	生化Ⅱ
	2438	赤痢アメーバ (便)	61	45	微生物
	9996	赤血球遊離プロトポフィリン	5	未保点	未保点
	1655	セルロプラスミン	24	90	免疫
	1923	セレン (S e) (血清)	4	144	生化Ⅰ
	1751	セロトニン (血液)	16	未保点	未保点
	1213	F D P (繊維素分解産物)	57	95	血液
	1150	穿刺液一般 (胸水・腹水等)	62	未保点	未保点
	2496	細胞数 (穿刺液) (関節液等)	62	未保点	未保点
	2497	細胞分類 (穿刺液) (関節液等)	62	未保点	未保点
	1543	蛋白定量 (穿刺液)	62	11	生化Ⅰ
	1151	糖定量 (穿刺液)	62	11	生化Ⅰ
	1544	淋菌リアルタイムPCR (淋菌核酸同定)	38	198	微生物
	1937	L D H (穿刺液)	62	11	生化Ⅰ
	1372	高感度PSA (前立腺特異抗原)	21	121	生化Ⅱ

そ

	107	総コレステロール (TC/T-Cho)	8	17	生化Ⅰ
	1868	総胆汁酸	10	47	生化Ⅰ
	102	総蛋白 (TP)	1	11	生化Ⅰ
	149	T I B C (総鉄結合能)	4	11	生化Ⅰ
	1817	総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 (BCAA/BTR/TYR)	10	283	生化Ⅱ
	1891	ゾニサミド	52	470	特薬Ⅰ
	1708	ソマトメジンC (IGF-1)	14	212	生化Ⅱ

た

	2728	第Ⅱ因子凝固活性 (F2)	58	223	血液
	8903	第Ⅴ因子凝固活性 (F5)	58	223	血液
	2587	第Ⅶ因子凝固活性 (F7)	58	223	血液
	1565	第Ⅷ因子凝固活性 (F8)	58	223	血液
	6661	第Ⅷ因子インヒビター定量 (F8INH)	59	144	血液
	2704	第Ⅸ因子凝固活性 (F9)	58	223	血液
	6662	第Ⅸ因子インヒビター定量 (F9INH)	59	144	血液
	2729	第Ⅹ因子凝固活性 (F10)	58	223	血液
	1569	第Ⅺ凝固因子活性 (F11)	58	223	血液
	1570	第Ⅻ因子凝固活性 (F12)	59	223	血液
	2600	第ⅩⅢ因子凝固活性 (F13)	59	223	血液
	1243	大腸菌ペロ毒素迅速検査 (大腸菌ペロト キシン定性)	41	189	微生物
	1230	タクロリムス	53	470	特薬Ⅰ

索引 (五十音順)

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1915	単純ヘルペス特異抗原 (HSV抗原定性)	41	180	免疫
	102	総蛋白 (TP)	1	11	生化 I
	2060	蛋白定量 (TP/UTP) (蓄尿)	60	7	尿便
	2061	蛋白定量 (TP/UTP) (随時尿)	60	7	生化 I
	800	蛋白分画	1	18	生化 I

ち

	1679	ビタミンB1 (チアミン)	12	239	生化 I
	123	中性脂肪 (TG)	8	11	生化 I
	1522	虫卵塗抹	61	20	尿便
	1523	虫卵集卵	61	15	尿便
	1316	直接クームス試験	32	34	免疫
	1916	チミジンキナーゼ活性 (TK活性)	22	233	血液

つ

	1139	ツツガムカーブ I g G	40	203	免疫
	1140	ツツガムカーブ I g M	40	203	免疫
	1141	ツツガムカーブ I g G	40	203	免疫
	1142	ツツガムカーブ I g M	40	203	免疫
	1143	ツツガムギリアム I g G	40	203	免疫
	1144	ツツガムギリアム I g M	40	203	免疫

て

	2251	ucOC (低カルボキシル化オステオカルシン)	19	154	生化 II
	1955	テイコブラニン	53	470	特薬 I
	9701	C. ディフィシル抗原毒素検査	41	95	免疫
	1119	C. ディフィシル毒素 (クロストリジオ デリス・ディフィシル毒素)	41	80	免疫
	9702	C. ディフィシル遺伝子検出 (CDトキシン B遺伝子)	41	450	微生物
	1340	尿中デオキシビリジノリン (DPD)	26	191	生化 II
	1889	テオフィリン	53	470	特薬 I
	1631	テストステロン	17	119	生化 II
	1233	遊離テストステロン	17	156	生化 II
	1539	DHEA-S (デヒドロエピアンドロステロン)	16	164	生化 II
	141	血清鉄 (Fe)	4	11	生化 I

と

	1155	銅 (Cu) (血清)	4	23	生化 I
	1765	銅 (Cu) (尿)	4	23	生化 I
	2062	糖定量 (Glu) (蓄尿)	60	9	生化 I
	2063	糖定量 (Glu) (随時尿)	60	9	生化 I
	1151	糖定量 (穿刺液)	62	11	生化 I
	2672	トキソプラズマ抗体 IgG	40	93	免疫
	2673	トキソプラズマ抗体 IgM	40	95	免疫
	9995	特異的 IgE (CAPシングルアレルゲン)	29	1430	免疫
	9994	特異的 IgE (CAPマルチアレルゲン)	29	1430	免疫

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	2710	特異的 IgG 鳥	29	873	免疫
	1847	ビタミンE (トコフェロール)	12	未保点	未保点
	9874	ビタミンE分画 (トコフェロール同族体 分画)	12	未保点	未保点
	1133	トータルPAI-1 (t PA-PAI-1複合 体)	58	240	血液
	2396	トピラマート	52	470	特薬 I
	1895	トブラマイシン	53	470	特薬 I
	1586	トランスサイレチン (ブレアルブミン)	24	101	免疫
	1649	トランスフェリン (Tf)	24	60	免疫
	1775	トランスフェリン (尿) (尿中マイクロ トランスフェリン)	24	98	尿便
	2555	トランスフェリン飽和度 (T S A T)	4	未保点	未保点
	2738	トリコサ・マイコプラズマ/PCR (TV・MG/PCR)	38	350	微生物
	1852	抗トリコサ・マイコプラズマ抗体	51	847	免疫
	1582	トリプシン	7	189	生化 I
	1830	心筋トロポニンT定性	25	112	生化 I
	1291	トロンビン・アンチトロンビン複合体 (TAT)	57	166	血液
	1989	トロンボモジュリン (TM)	59	204	血液

な

	135	Na・Cl (ナトリウム・クロール)	3	11	生化 I
	2057	Na・Cl (ナトリウム・クロール) (随時尿)	3	11	生化 I
	2058	Na・Cl (ナトリウム・クロール) (蓄尿)	3	11	生化 I
	2772	尿中Na/K比	3	未保点	未保点
	1262	鉛 (Pb)	4	未保点	未保点

に

	1880	ニトラゼパム	52	470	特薬 I
	1285	乳酸	13	47	生化 I
	1767	尿アルブミン・クレアチニン補正 (随 時)	1	99	尿便
	1511	尿一般定性	60	26	尿便
	119	尿酸 (UA)	7	11	生化 I
	2582	尿酸排泄率	7	未保点	未保点
	2047	尿酸 (UA) (随時尿)	7	11	生化 I
	2048	尿酸 (UA) (蓄尿)	7	11	生化 I
	117	尿素窒素 (BUN/UN)	7	11	生化 I
	1612	尿素呼吸試験	40	70	免疫
	2598	尿蛋白/クレアチニン比	1	7+11	尿便・ 生化 I
	2597	尿中IV型コラーゲン	24	179	生化 II
	1214	尿中FDP	57	77	血液
	1340	尿中デオキシビリジノリン (DPD)	26	191	生化 II
	1775	トランスフェリン (尿) (尿中マイクロ トランスフェリン)	24	98	尿便
	1528	(尿) メタネフリン分画	16	220	生化 II
	2455	尿中L型脂肪酸結合蛋白 (L-FABP)	24	210	尿便
	2772	尿中Na/K比	3	未保点	未保点

索引 (五十音順)

行	項目CD	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1264	尿中δ-アミノレブリン酸 (δ-ALA定量)	5	106	尿便
	1771	尿中免疫電気泳動 (BJ蛋白/α ₂ -マクroglobulin蛋白)	28	201	免疫
	1513	尿沈渣	60	27	尿便

の

1383	BNP (脳性ナトリウム利尿ペプチド)	19	130	生化Ⅱ
1959	ノロウイルス抗原 (便)	40	150	免疫
2741	ノロウイルス/PCR	40	未保点	未保点

は

1187	5HIAA (5-ハイドロキシインドール酢酸) (尿)	16	95	生化Ⅱ
2220	SP-A (肺サーファクタント蛋白A)	27	130	生化Ⅰ
1902	SP-D (肺サーファクタント蛋白D)	27	136	生化Ⅰ
1744	AVP (ADH/抗利尿ホルモン/アルギニン-バソプレッシン)	14	224	生化Ⅱ
1268	馬尿酸	5	未保点	未保点
2535	VMA (バニルマンデル酸)	16	90	生化Ⅱ
1393	ハプトグロビン型判定あり	24	129	免疫
	抗胃壁細胞抗体 (抗バリエタル細胞抗体)	35	未保点	未保点
1876	バルプロ酸ナトリウム	52	470	特薬Ⅰ
1890	ハロペリドール	53	470	特薬Ⅰ
1191	バンコマイシン	53	470	特薬Ⅰ

ひ

1598	ヒアルロン酸 (血清)	13	179	生化Ⅰ
1599	ヒアルロン酸 (胸水)	13	未保点	未保点
1303	鼻汁好酸球	56	15	血液
1810	ビタミンA	12	未保点	未保点
1679	ビタミンB1 (チアミン)	12	239	生化Ⅰ
1759	ビタミンB2 (リボフラビン)-全血	12	242	生化Ⅰ
2278	ビタミンB2 (リボフラビン)-血清・血漿	12	231	生化Ⅰ
1738	ビタミンB6	12	未保点	未保点
1686	ビタミンB12 (シアノコバラミン)	12	134	生化Ⅰ
1848	ビタミンC (アスコルビン酸)	12	296	生化Ⅰ
2605	25-OHVD (25-ヒドロキシビタミンD) ECLIA	12	117	生化Ⅰ
1587	1-25-(OH)2ビタミンD3	12	388	生化Ⅰ
1847	ビタミンE (トコフェロール)	12	未保点	未保点
9874	ビタミンE分画 (トコフェロール同族体分画)	12	未保点	未保点
1740	HCGヒト絨毛性ゴナドトピン (血清)	17	134	生化Ⅱ
1325	HCGヒト絨毛性ゴナドトピン (尿)	17	134	生化Ⅱ
2575	HE4 (ヒト精巢上体蛋白4)	21	200	生化Ⅱ
4408	Arah2 (ヒト-ナツ由来)	29	110	免疫
2581	百日咳菌IgM抗体	39	80	免疫
2580	百日咳菌IgA抗体	39	80	免疫
1829	百日咳菌抗体	39	250	免疫

2550	百日咳菌核酸検出 (LAMP)	39	360	微生物
110	総ビリルビン (T-BIL)	2	11	生化Ⅰ
111	直接ビリルビン (D-Bil)	2	11	生化Ⅰ
1146	間接ビリルビン (I-BIL)	2	未保点	未保点
1175	ビルジカイニド	54	470	特薬Ⅰ
1286	ビルビン酸	13	47	生化Ⅰ
7203	ビルメール	54	470	特薬Ⅰ

ふ

1318	フィブリノゲン定量 (Fib)	57	23	血液
2586	可溶性フィブリンモノマー複合体定性 (SF定性)	57	93	血液
1244	フィブリンモノマー複合体 (FM定量)	57	215	血液
1797	AFP (α-フェトプロテイン)	20	98	生化Ⅱ
1873	フェニトイン	52	470	特薬Ⅰ
1869	フェノバルビタール	52	470	特薬Ⅰ
1804	フェリチン (FER)	4	102	生化Ⅰ
2722	フォン・ウィルブラント因子活性 (VWF活性)	59	126	血液
6664	フォン・ウィルブラント因子抗原量 (VWF抗原)	59	147	血液
1628	不規則性抗体スクリーニング	32	174	免疫
2217	不規則性抗体同定検査	32	174	免疫
1128	PTH-INTACT (副甲状腺ホルモンINTACT)	15	161	生化Ⅱ
2230	whole-PTH (副甲状腺ホルモンwhole)	15	161	生化Ⅱ
1614	PTHrP-Intact (PTH関連蛋白-インタクト/ 副甲状腺ホルモン関連蛋白-インタクト)	15	185	生化Ⅱ
1177	ACTH (副腎皮質刺激ホルモン)	14	184	生化Ⅱ
1742	UIBC (不飽和鉄結合能)	4	11	生化Ⅰ
1460	プラスミノゲン活性	58	100	血液
8901	プラスミノゲン抗原	58	100	血液
1397	アンチプラスミン活性 (α2プラスミン インヒビター)	58	128	血液
1555	プラスミン・プラスミンインヒビター複 合体 (α2PIC)	58	150	血液
1269	フリーPSA/トータルPSA比 (PSAF/T比)	21	150	生化Ⅱ
1875	プリミドン	52	470	特薬Ⅰ
1586	トランスサイレチン (プレアルブミン)	24	101	免疫
1226	フレカイニド	54	470	特薬Ⅰ
1892	プロカインアミド	54	470	特薬Ⅰ
2261	プロカルシトニン定量 (PCT定量)	51	276	生化Ⅰ
1718	プロゲステロン (黄体ホルモン)	17	139	生化Ⅱ
1801	P-III-P (プロコラーゲン-III-ペプチド)	25	136	生化Ⅰ
2484	total P1NP (I型プロコラーゲン-N-プ ロペプチド)	26	160	生化Ⅱ
2751	プロステートヘルスインデックス (phi)	21	281	生化Ⅱ
1491	プロテインC活性	59	227	血液
1918	プロテインC抗原	59	220	血液
2658	プロテインS活性	59	163	血液

索引 (五十音順)

行	項目C D	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1527	リドカイン	54	470	特薬Ⅰ
	1130	リパーゼ	6	24	生化Ⅰ
	1492	リボ蛋白 (a)	9	107	生化Ⅰ
	1660	リボ蛋白分画	9	49	生化Ⅰ
	2703	リボ蛋白分画/H P L C	9	129	生化Ⅰ
	1858	LPL (リボ蛋白リパーゼ)	9		
	1759	ビタミンB 2 (リボフラビン)-全血	12	242	生化Ⅰ
	2278	ビタミンB 2 (リボフラビン)-血清・血漿	12	231	生化Ⅰ
	2295	淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸検出	38	262	微生物
	1429	淋菌及びクラミジアトラコマチス/TMA	38	270	微生物
	1544	淋菌リアルタイムP C R (淋菌核酸同定)	38	198	微生物
	125	リン脂質 (PL)	9	15	生化Ⅰ
	6672	リンパ球幼若試験Con-A (分離培養)	50	345	免疫
	6671	リンパ球幼若試験PHA (分離培養)	50	345	免疫
	6673	リンパ球幼若試験PHA (微量全血培養)	50	345	免疫

る

2319	ループスアンチコアグラント (P L 中和) (LAC定量/RVVITループス抗凝固因子)	35	265	免疫
1315	ループス抗凝固因子-蛇毒 (LAC定量/PLI (NR))	35	265	免疫

れ

2460	レジオネラ核酸同定L A M P	51	292	微生物
1307	網状赤血球数 (レチクロ)	56	12	血液
1584	レチノール結合蛋白 (RBP)	24	129	免疫
1670	血漿レニン活性 (PRA)	16	100	生化Ⅱ
2308	活性型レニン定量 (ARC)	16	102	生化Ⅱ
2212	レプチン	19	1000	生化Ⅱ
2377	レベチラセタム	52	470	特薬Ⅰ
1371	RLPコレステロール (レムナント様リポ蛋白コレステロール)	8	174	生化Ⅰ

ろ

109	L A P (ロイシンアミノペプチダーゼ)	6	11	生化Ⅰ
2702	L R G (ロイシンリッチ α 2グリコプロテイン)	27	268	生化Ⅰ

細菌

1420	一般細菌塗抹	63	67	微生物
1421	培養同定 (口腔、気道)	63	180	微生物
1422	培養同定 (消化管)	63	200	微生物
1423	培養同定 (泌尿器生殖器)	63	190	微生物
1424	培養同定 (血液、穿刺液)	63	240	微生物
1425	培養同定 (その他)	63	180	微生物
1426	簡易培養	63	60	微生物
1428	嫌気性培養	63	137	微生物
1736	定量培養	63	未保点	微生物
1949	細菌感受性1菌種	63	185	微生物

行	項目C D	項目名称	ページ	保険 点数	判断料 区分
	1950	細菌感受性2菌種	63	240	微生物
	1951	細菌感受性3菌種以上	63	310	微生物
	1113	大腸菌血清型別	63	175	免疫
	9899	酵母様真菌薬剤感受性試験	63	150	微生物

抗酸菌

2406	結核菌L A M P (結核菌群核酸検出)	64	410	微生物
1408	結核菌PCR	64	410	微生物
1419	抗酸菌感受性検査 (4剤以上)	64	415	微生物
2255	結核菌群抗原	64	291	微生物
1400	抗酸菌同定	64	361	微生物
1468	抗酸菌塗抹 (蛍光法)	64	65+35	微生物
1203	抗酸菌培養 (MGIT法)	64	315	微生物
1465	アビウム・イントラセルラーPCR (M A C核酸検出)	64	421	微生物
2366	Q F Tゴールドプラス (結核菌特異的インターフェロン- γ 産生能)	64	593	微生物
2437	T-S P O T、T B (結核菌特異的インターフェロン- γ 遊離試験)	64	593	微生物

病理細胞診

1346	病理組織1臓器	66	860	病理学
1348	病理組織2臓器	66	1720	病理学
1350	病理組織3臓器	66	2580	病理学
6903	ブロック作成	66	未保点	未保点
6904	未染標本作成 (ホルマリン固定)	66	未保点	未保点
6905	未染標本作成 (パラフィンブロック)	66	未保点	未保点
6906	染色標本作成 (ホルマリン固定)	66	未保点	未保点
6907	染色標本作成 (パラフィンブロック)	66	未保点	未保点
6908	染色標本作成 (未染標本スライド)	66	未保点	未保点
1627	エストロゲン・レセプター (E R)	67	720	病理
1389	プロゲステロン・レセプター (P g R)	67	690	病理
2404	E R・P g R (エストロゲンレセプター/プロゲステロンレセプター)	67	900	病理
2219	胃癌H E R 2 (I H C)	67	690	病理
2548	肺癌P D-L 1 抗体 (IHC) 22C3	67	2700	病理
2405	乳癌H E R 2/n e u (IHC法)	67	690	病理
1620	細胞診婦人科材料	68	150	病理学
2466	細胞診婦人科 液状化検体	68	186	病理学
1625	細胞診その他の材料	68	190	病理学

() は
保存温度

生化学的検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
蛋白	102 3A010	総蛋白 3A0100000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ビウレット法	6.7～8.3 g/dL	生化 I 11	1～2	*1	1
	104 3A015	アルブミン (BCP改良法) 3A0150000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	BCP改良法	3.8～5.3 g/dL	生化 I 11	1～2	*1	1
	148 3A016	A/G比 3A0160000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	1.3～2.0		1～2	総蛋白(項目コード102)/アルブミン(項目コード104)同時依頼にて自動追加します	1
	1767 3A015	尿アルブミン・クレアチニン比 (随時) 3A0150000001061	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	免疫比色法・酵素法	CKD重症 分類参照	尿便 99	1～2	*2	1
	2260 3A015	尿アルブミン(蓄尿) 3A0150000004061	5 尿スピッツ	蓄尿 1(冷蔵)	免疫比色法	22.0以下 mg/day	尿便 99	1～2	蓄尿量、蓄尿時間を記入ください *2	1
	2060 1A015	蛋白定量(蓄尿) U-TP 1A0150000004271	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	ピロガールレッド法	0.02～0.12 g/day	尿便 7	1～2	蓄尿量、蓄尿時間を記入ください	1
	2598 1A015	尿蛋白/クレアチニン比 1A0150000001292	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	ピロガールレッド法・酵素法	0.15未満 g/g・cre	尿便・生化 I 7+11	1～2		1
	800 3A020	蛋白分画 3A0200000023232	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	キャピラリー電気泳動法	下記参照 %	生化 I 18	1～2	アブノーマルピークが疑われる場合はパターンも報告いたします *1	1

*¹ 蛋白分画、総蛋白及びアルブミンを併せて実施した場合は主たるもの2項目のみ算定する

*² トランスフェリン(尿)・アルブミン(尿)・IV型コラーゲン(尿)糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期または第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3か月に1回に限り算定できる。なおこれらを行った場合は、主たるもののみ算定する。

○慢性腎臓病(CKD)の重症度分類

原疾患		尿蛋白成分		A 1	A 2	A 3
糖尿病性 腎臓病	尿アルブミン定量 (mg/日)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿	
	尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)		30未満	30～299	300以上	
高血圧性腎硬化症・腎炎・多発性 嚢胞腎・移植腎・ 不明・その他	尿蛋白定量 (g/日)		正常	軽度蛋白尿	高度蛋白尿	
	尿蛋白/Cr比 (g/gCr)		0.15未満	0.15～0.49	0.50以上	
GFR区 分 (ml/ 分 /1.73 mf)	G 1	正常または高値	≧90			
	G 2	正常または軽度低下	60～89			
	G 3 a	軽度～中等度低下	45～59			
	G 3 b	中等度～高度低下	30～44			
	G 4	高度低下	15～29			
	G 5	末期腎不全 (ESKD)				

重症度は原疾患・GFR区分・蛋白尿区分に合わせたステージにより評価する。CKDの重症度は死亡、末期腎不全、心血管死亡発症のリスクを■のステージを基準に、■黄色、■オレンジ、■赤の順にステージが上昇するほどリスクは上昇する(エビデンスに基づくCKDガイドライン2023より)

蛋白分画基準値(%)

アルブミン	55.8	～	66.1
α 1 グロブリン	2.9	～	4.9
α 2 グロブリン	7.1	～	11.8
β 1 グロブリン	4.7	～	7.2
β 1 グロブリン	3.2	～	6.5
γ グロブリン	11.1	～	18.8
A/G	1.3	～	1.9

生化学的検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
生 体 色 素	110 3J010	総ビリルビン T-Bil 3J0100000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	バナジン酸化法	0.3～1.2 mg/dL	生化 I 11	1～2		1
	111 3J015	直接ビリルビン D-Bil 3J0150000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	バナジン酸化法	0.0～0.4 mg/dL	生化 I 11	1～2		1
	1146 3J025	間接ビリルビン I-Bil 3J0250000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	0.1～0.8 mg/dL		1～2	T-Bil(項目コード110)・D-Bil(項目 コード111)の同時依頼が必要です 計算法I-Bil=(D-Bil)-(T-Bil)	1
酵 素	101 3B035	AST GOT 3B0350000023278	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	JSCC標準化 対応法	10～40 IU/L/37℃	生化 I 17	1～2	溶血検体では高値になります	1
	103 3B045	ALT GPT 3B0450000023278	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	JSCC標準化 対応法	5～40 IU/L/37℃	生化 I 17	1～2		1
	2606	FIB-4Index	1・2 全血容器(茶) 血球容器(紫)	血清・血球 0.5/2.0(冷蔵)	計算法	2.67以上肝 線維化の可 能性大		1～2	AST(項目コード101)・ALT(項目 コード103)・末梢血一般(項目 コード1310)の同時依頼と、年齢 の記載が必要です	1
	112 3B050	LD LDH 3B0500000023272	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	IFCC	119～229 IU/L/37℃	生化 I 11	1～2	溶血検体では高値になります	1
	1165 3B055	LDHアイソザイム (IF) 3B0550000023232	1 全血容器(茶)	血清 0.3(室温)	電気泳動法 (アガロース 膜)	下記参照 %	生化 I 48	3～5	低温では失活 溶血検体受託不可	3
	151 3B010	CK CPK/クレアチニンキナーゼ 3B0100000023272	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	JSCC標準化 対応法	30～200 IU/L/37℃	生化 I 11	1～2		1
	1761 3B025	CKアイソザイム 3B0250000023232	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	電気泳動法	下記参照 %	生化 I 55	3～5		3
	1636 3B015	CK-MB 3B0150000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(凍結)	CLIA法	7.5以下 ng/mL	生化 I 90	3～5		3
	153 3B090	γ-GTP 3B0900000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	JSCC標準化 対応法	10～72 IU/L/37℃	生化 I 11	1～2		1
	105 3B070	ALP アルカリホスファターゼ 3B0700000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	IFCC	38～113 IU/L/37℃	生化 I 11	1～2		1
	1651 3B080	ALPアイソザイム (IF) 3B0800000023232	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	電気泳動法	下記参照 %	生化 I 48	3～5		3
	131 3B110	コリンエステラーゼ 3B1100000023272	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	エチリテリン・ PNP-G7基質 法	214～466 IU/L/37℃	生化 I 11	1～2		1

○LDHアイソザイム基準値 (%)

LD ₁	20.0	～	31.0
LD ₂	28.8	～	37.0
LD ₃	21.5	～	27.6
LD ₄	6.3	～	12.4
LD ₅	5.4	～	13.2

○CKアイソザイム基準値 (%)

BB (CK 1)	0	～	2
ALB	0	～	9
MB (CK 2)	0	～	6
MM (CK 3)	87	～	98

○ALPアイソザイム

ALP ₁	0.0	～	53
ALP ₂	36.6	～	69.2
ALP ₃	25.2	～	54.2
ALP ₄			0.0
ALP ₅	0.0	～	18.1
ALP ₆			0.0

() は
保存温度

生化学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
電 解 質 ・ 微 量 金 属	135	Na・Cl ナトリウム・クロール	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	電極法		生化 I 11	1~2		1
	3H010	Na 3H0100000023261				137~146 mEq/L				
	3H020	Cl 3H0200000023261				98~108 mEq/L				
	2057	Na・Cl(随時尿)	5 尿スπιツ	尿 1(冷蔵)	電極法		生化 I 11	1~2		1
	3H010	Na(随時尿) 3H0100000004261				80~250 mEq/L				
	3H010	Cl(随時尿) 3H0100000004261				170~250 mEq/L				
	2772	尿中Na/K比 3H0100000191902	5 尿スπιツ	尿 1(冷蔵)	計算法		未保点	1~2	Na・Cl(項目コード2057)・K(項目コード20049)(随時尿)同時依頼にて自動追加します	1
	2058	Na・Cl(蓄尿)	5 尿スπιツ	尿 1(冷蔵)	電極法		生化 I 11	1~2		1
	3H010	Na(蓄尿) 3H0100000004261				4.0~8.0 g/day				
	3H010	Cl(蓄尿) 3H0200000004261				6.0~12.0 g/day				
	134	K カリウム 3H015 3H0150000004261	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	電極法	3.6~5.0 mEq/L	生化 I 11	1~2		1
	2049	K(随時尿) カリウム 3H015 3H0150000004261	5 尿スπιツ	尿 1(冷蔵)	電極法	15~60 mEq/L	生化 I 11	1~2		1
	2050	K(蓄尿)mg/day カリウム 3H015 3H0150000004261	5 尿スπιツ	尿 1(冷蔵)	電極法	2.0~2.5 g/day	生化 I 11	1~2	mEq/day単位(項目コード2222)にて報告	1
	136	Ca カルシウム 3H030 3H0300000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	比色法(アルセナゾⅢ法)	8.5~10.2 mg/dL	生化 I 11	1~2		1
	2052	Ca(尿・クレアチニン補正) 3H030 3H0300000004271	5 尿スπιツ	尿 1(冷蔵)	比色法(アルセナゾⅢ法)	g/gCr	生化 I 11	1~2	蓄尿(項目コード2727)の場合は蓄尿量を記入ください 基準値 0.10~0.30mg/dL	1
	140	無機リン IP/P 3H040 3H0400000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	2.5~4.5 mg/dL	生化 I 17	1~2		1
	1654	Mg マグネシウム 3H025 3H0250000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	1.7~2.6 mg/dL	生化 I 11	1~2		1

生化学検査

()は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
微量 金属 関連	1155 3I025	銅(血清) Cu 3I0250000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	比色法	66～130 μg/dL	生化 I 23	2～6		3
	1765 3I025	銅(尿) Cu 3I0250000001274	5 尿スピッツ	尿 5(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	36以下 μg/L	生化 I 23	1～2		3
	1762 3I030	亜鉛(血清) Zn 3I0300000023274	1 全血容器(茶)	血清 1(冷蔵)	5-Br-PAPS 法	80～130 μg/dL	生化 I 132	1～2		1
	1763 3I030	亜鉛(尿) Zn 3I0300000001274	5 尿スピッツ	尿 0.5(冷蔵)	5-Br-PAPS 法	85～1000 μg/L		1～2		1
	1583 3K105	アルミニウム Al 3K1050000023274	48 専用容器	血清 0.5(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	10以下 μg/L		3～5		3
	1262 3K110	鉛 Pb 3K1100000019274	8 ヘパリン管(緑)	全血添加物入 0.5(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	5P参照 μg/L		4～8		3
	1854 3K125	マンガン(血液) Mn 3K1250000019274	8 ヘパリン管(緑)	全血添加物入 0.7(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	0.8～2.5 μg/dL	生化 I 27	4～17	*1	3
	2766 3K125	マンガン(尿) Mn 3K1250000019274	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	2以下 μg/dL	生化 I 27	4～17	*1	3
	1923 3I035	セレン(血清) Se 3I0350000023274	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	107～171 μg/L	生化 I 144	4～17	*2	3
	1707 3K115	クロム(血液) Cr 3K1150000019274	8 ヘパリン管(緑)	全血添加物入 0.7(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	1以下 μg/dL		4～8		3
貧 血 関 連		クロム(尿) Cr 3K1150000001274	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	原子吸光分 光光度法	2以下 μg/L		4～17		3
	141 3I010	血清鉄 Fe 3I0100000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	Nitroso- PSAP法	M:60～200 F:50～160 μg/dL	生化 I 11	1～2		1
	149 3I015	TIBC 総鉄結合能 3I0150000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	M:250～380 F:250～460 μg/dL	生化 I 11	1～2	計算式: Fe(項目コード141) + UIBC(項目コード1742)	1
	1742 3I020	UIBC 不飽和鉄結合能 3I0200000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	Nitroso- PSAP法	M:170～250 F:180～270 μg/dL	生化 I 11	1～2		1
	1804 5C095	フェリチン FER 5C0950000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ラテックス免 疫比濁法	31～325 ng/mL	生化 I 102	1～2		1
	2555	トランスフェリン飽和度 TSAT C	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	20%以上 %		1～2	計算式(Fe/TIBC)×100 (%) Fe(項目コード141)とTIBC(項目 コード149)の同時依頼が必要です	1

*1 マンガン (Mn) 1月以上 (胆汁排泄能の低下している患者については2週間以上) 高カロリー-静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回限り算定することができる。
*2 セレン 長期静脈栄養管理若しくは長期細分栄養剤を用いた経腸栄養管理を受けている患者、人工乳若しくは特殊治療用ミルクを使用している小児患者又は重症心身障害児 (者) に対して、診療及び他

() は
保存温度

生化学的検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
産業 医学 的 代 謝 物 質	1643 3K065	アセトン(尿) 3E0600000001202	5 尿 スピッツ	尿 3(凍結)	GC法	2. 3以下 mg/L		6～19	作業終了時の尿	3
	1406 3K065	メタノール 3K0650000001202	5 尿 スピッツ	尿 3(凍結)	GC法	2. 9以下 mg/L		6～19	作業終了時の尿	3
	1270 3K045	N-メチルホルムアミド (N,N-ジメチルホルムの代謝物として) 3K0450000001202	5 尿 スピッツ	尿 3(冷蔵)	GC法	下記参照		5～9	* 1	3
	1268 3K025	馬尿酸 (トルエンの代謝物として) 3K0250000001204	5 尿 スピッツ	尿 1(冷蔵)	HPLC法	下記参照		4～5	* 1	3
	1266 3K035	メチル馬尿酸 (キシレンの代謝物として) 3K0350000001204	5 尿 スピッツ	尿 1(冷蔵)	HPLC法	下記参照		4～5	* 1	3
	1265 3K040	スチレン代謝物(マンデル酸) 3K0400000001205	5 尿 スピッツ	尿 1(冷蔵)	LC-MS法	下記参照 g/L		5～8	* 1	3
	1264 3J075	δ-アミノレブリン酸(尿中) δ-ALA定量 3J0750000001204	5 尿 スピッツ	尿 1(冷蔵)	HPLC法	下記参照 mg/L	尿便 106	4～6	* 2	3
	3J055	赤血球遊離プロトポルフィリン 鉛健診項目 3J05500000019282	8 ヘパリン管(緑)	ヘパリン加 血 1.4(冷蔵(遮 光))	蛍光法	下記参照 ug/dL赤血球		4～17	遮光して提出ください 項目コード1263 プロトポルフィリン(ポルフィリン症)	3
	1271 3K050	2,5-ヘキサンジオン ノルマルヘキサンの代謝物として 3K0500000001203	5 尿 スピッツ	尿 3(冷蔵)	GC-MS法	下記参照		5～8	* 1	3
浸 透 圧	1782 3H045	浸透圧 3H04500000023902	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	氷点降下法	275～290 mOsm/kgH2O	血液 15	3～5		3
	1787 3H045	浸透圧(透析液) 3H04500000095902	5 尿 スピッツ	透析液 0.7(冷蔵)	氷点降下法	mOsm/kgH2O	尿便 160	3～5		3
	1793 3H045	浸透圧(尿) 3H0450000001902	5 尿 スピッツ	尿 1(冷蔵)	氷点降下法	50～1300 mOsm/kgH2O	尿便 16	3～5		3

* 1 連続した作業日の最初の日を除いた作業終了時に採取してください。ただし作業終了2時間前に一度排尿してください。

* 2 鉛健康診断は労働安全衛生法に基づく健康診断であり、その中で尿中δ-アミノレブリン酸定量を実施した場合は、保険算定の対象外です。

○有機溶剤健康診断 尿中の代謝物の測定が必要な有機溶剤名

項目 コード	有機溶剤の名称	検査項目	単位	分布*			
				1	2	3	3
1268	トルエン	尿中の馬尿酸	g/L	1 以下	1 超	2.5 以下	2.5 超
1266	キシレン	尿中のメチル馬尿酸	g/L	0.5 以下	0.5 超	1.5 以下	1.5 超
1265	スチレン	尿中のメチル馬尿酸	g/L	0.3 以下	0.3 超	1 以下	1 超
1271	ノルマヘキサン	尿中の2,5-ヘキサンジオン	mg/L	2 以下	2 超	5 以下	5 超
1270	N,N-ジメチルホルムアルデヒド	尿中のN-メチルホルムアミド	mg/L	10 以下	10 超	40 以下	40 超
	1,1,1-トリクロロエタン	尿中のトリクロロ酢酸	mg/L	3 以下	3 超	10 以下	10 超
		尿中の総三塩化物	mg/L	1 0 以下	1 0 超	40 以下	40 超
	トリクロロエチレン	尿中のトリクロロ酢酸	mg/L	30 以下	30 超	100 以下	100 超
		尿中の総三塩化物	mg/L	100 以下	100 超	300 以下	300 超
	テトラクロロエチレン	尿中のトリクロロ酢酸	mg/L	3 以下	3 超	10 以下	10 超
		尿中の総三塩化物	mg/L	3 以下	3 超	10 以下	10 超

* 分布1,2,3と分けている数値は、厚生労働省がこの分布の属する人数を行政的に把握するために設定したものであって、結果を判定する基準となるものではありません。したがってこの数値で診断したり判定したりはしないこととされています。

○鉛健康診断

項目 コード	検査項目	分布*			
		1	2	3	3
1262	血中鉛	20 以下	20 超	40 以下	40 超
	血中遊離プロトポルフィリン	100 以下	100 超	250 以下	250 超
1264	尿中δ-アミノレブリン酸	5 以下	5 超	10 以下	10 超

生化学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
酵素 関 連 物 質	109 3B135	LAP ロイシンアミノペプチダーゼ 3B1350000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	比色法	30～78 U/L/37℃	生化Ⅰ 11	2～3		3
	1407 3B130	ADA アデノシンデアミナーゼ 3B1300000023272	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	4.8～23.1 U/L	生化Ⅰ 32	3～5		3
	1448 3B130	ADA(胸水) 3B1300000042272	5 尿スピッツ	胸水 0.5(冷蔵)	酵素法	U/L	生化Ⅰ 32	3～5	ADA(その他)(項目コード 1344) 血清・胸水以外の材料	3
	113 3B160	アミラーゼ AMY 3B1600000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法(GAL- G5-PNP基質 法) JSCC勧告方 法	40～130 IU/L/37℃	生化Ⅰ 11	1～2		1
	2056 3B160	アミラーゼ(尿) 3B1600000001271	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	酵素法(GAL- G5-PNP基質 法) JSCC勧告方 法	700以下 IU/L/37℃	生化Ⅰ 11	1～2		1
	1663 3B165	アミラーゼアイソザイム 3B1650000023232	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	電気泳動法 (アガロース 膜)	P/S比: 0.19～ 1.79 P: 38.7～64.0 S: 36.0～84.3 %	生化Ⅰ 48	3～5		3
	1396 3B175	P型アミラーゼ定量 3B1750000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫阻害法	17～50 U/L	生化Ⅰ 48	3～5		3
	1130 3B180	リパーゼ 3B1800000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	17～57 U/L	生化Ⅰ 24	3～5		3
	1186 3B192	腓ホスホリパーゼA2 3B1920000023005	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	RIA・固相法	130～400 ng/dL	生化Ⅰ 204	3～5		3
	1557 3B195	エラスターゼ1 3B1950000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集法	300以下 ng/dL	生化Ⅱ 120	3～5	* 1	3
	1288 3B339	ペプシノーゲン1 & 2 3B3390000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集法	下記参照		1～2		1
	2453 ABCD9	胃ABCD分類 ABCD91930000000	1 全血容器(茶)	血清 1.1(冷蔵)	Hピロリ抗体: EIA法 ペプシ ノーゲン:ラ テックス凝集 法	下記参照		1～2		1

* 1 エラスターゼ1：悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる

PGⅠ値及びPGⅠ/Ⅱ比	
強陽性	30.0ng/mL 以下かつ2.0以下
陽性	70.0ng/mL 以下かつ3.0以下
弱陽性	40.0ng/mL 以下かつ2.5以下

* ペプシノーゲン検査陽性判定基準

(+)	ペプシノーゲンⅠ値が70 ng/mL 以下 かつ ペプシノーゲンⅠ/Ⅱ比が3.0以下
-----	--

除菌歴のある方には対応できません。

○ABC分類及び判定基準

ABC分類		ヘリコバクターピロリー 抗体価	
		(-)	(+)
ペプシ ノー ゲン検査	(-)	A	B
	(+)	D(C)	C

() は
保存温度

生化学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
酵素・ 蛋白・ 窒素 化合物	1582 3B185	トリプシン 3B1850000023001	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	100～550 ng/mL	生化 I 189	3～4		3
	117 3C025	尿素窒素 BUN/UN 3C0250000023272	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ウレアーゼUV 法 GLDH UV法	8～20 mg/dL	生化 I 11	1～2		1
	143 3C015	クレアチニン CRE/Cr 3C0150000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	M:0.65～1.07 F:0.46～0.79 mg/dL	生化 I 11	1～2		1
	2046 3C015	クレアチニン(蓄尿) CRE/Cr 3C0150000023271	5 尿スπιツツ	尿 0.5(冷蔵)	酵素法	0.50～1.50 g/day	生化 I 11	1～2	随時尿(項目コード2045) 測定値(mg/dL)で報告	1
	2240 8A065	eGFRcreat 8A0650000023919	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	60以上 mL/min		1～2	血清クレアチニン(項目コード143)と同 時依頼が必要です ☆年齢・性別の記入がない場合と、18歳 未満の場合は「報告不可」とさせていただきます	1
	1488 3C016	シスタチンC 3C0160000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	M:0.58～0.87 F:0.47～ 0.82 mg/L	生化 I 109	3～5	*1	3
	2664 8A066	推算GFRcys 8A0660000023919	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	mL/min		3～5	シスタチンC(項目コード1488)との同 時依頼が必要です ☆年齢・性別の記入がない場合と、18歳未満 の場合は「報告不可」とさせていただきます	3
	1182 8A025	CCR(24時間) クレアチニンクリアランス 8A0250000098271	1・5 全血容器(茶) 尿スπιツツ	血清・尿 0.5(血清) (0.5)(尿)	計算法	70～125 mL/min		1～2	蓄尿量・身長・体重を記載して ください	1
	119 3C020	尿酸 UA 3C0200000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ウリカーゼ POD法	M:3.5～7.5 F:2.5～7.0 mg/dL	生化 I 11	1～2		1
	2582	尿酸排泄率	1・5 全血容器(茶) 尿スπιツツ	血清・尿 0.5(血清) (0.5)(尿)	計算法	5.5～11.1 %		1～2	計算式 U-UA×S-CRE/S-UA×U-CRE 随時尿酸(項目コード2047)・尿クレア チニン(項目コード2045)・クレアチニン (項目コード143)の同時依頼が必要です	1
	2048 3C020	尿酸(蓄尿) UA 3C0200000023271	5 尿スπιツツ	尿 0.5(冷蔵)	ウリカーゼ POD法	0.4～1.0 g/day	生化 I 11	1～2	随時尿(項目コード2047) 測定値(mg/dL)で報告	1
	1157 3C040	アンモニア NH3 3C0400000031271	73 NH3専用	EDTA加血液 2(氷冷)	試験紙1波長 反射法	30～86 μg/dL	生化 I 50	1～2	氷冷にて提出してください	1

*1 シスタチンC: 尿素窒素またはクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に3月に1回に限り算定できる。ただし、ペントシジンを併せて実施した場合、主たるもののみ算定する。

○推算GFRcreat計算式

男性: $1.94 \times Cr^{-1.094} \times \text{年齢(歳)}^{-0.287}$ 女性: 男性 $\times 0.739$

○推算GFRcys計算式

男性: $(104 \times Cys - C^{-1.019} \times 0.996^{\text{年齢(歳)}}) - 8$ 女性: $(104 \times Cys - C^{-1.019} \times 0.996^{\text{年齢(歳)}} \times 0.929) - 8$

生化学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
脂質 関 連 物 質	123 3F015	中性脂肪 TG 3F0150000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	30～149 mg/dL	生化 I 11	1～2		1
	107 3F050	総コレステロール TC/T-Cho 3F0500000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	130～219 mg/dL	生化 I 17	1～2	*1	1
	733 3F070	HDLコレステロール HDL-c 3F0700000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	M:37～67 F:40～71 mg/dL	生化 I 17	1～2	L/H比(項目コード2524)はHDL-C(項目 コード733)・LDL-C(項目コード1930) の同時依頼が必要です *1	1
	1930 3F077	LDLコレステロール LDL-c 3F0770000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	70～139 mg/dL	生化 I 18	1～2	L/H比(項目コード2524)はHDL-C(項目 コード733)・LDL-C(項目コード1930) の同時依頼が必要です *1	1
	2402 3F077	LDL-C(F式) Fridewald式(F式) 3F0770000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	70～139 mg/dL		1～2	HDL-C(項目コード733)・T-C(項目コード 107)・TG(項目コード123)の同時依頼が必要 です 計算法: LDL-C=TC-HDL-C-TG/5	1
	1371 3F078	RLPコレステロール レムナント様リポ蛋白コレステロール 3F0780000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	酵素法	7.5以下 mg/dL	生化 I 174	3～5	3月に1回算定できる *2	3
	2682 3F088	sd-LDL small dense LDLコレステロール 3F0880000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	35.0未満 mg/dL		3～5		3
	2542 3F069	nonHDL-C 3F0690000023919	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	100～169 mg/dL		1～2	HDL-C(項目コード733)・T-C(項目 コード107)の同時依頼が必要です 計算法: nonHDL-C=TC-HDL-C	1
	1326 3F065	遊離コレステロール F-Cho 3F0650000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	25～60 mg/dL	生化 I 11	3～5		3

*1 コレステロール、LDLコレステロール、及びHDLコレステロールを併せて行った場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する
*2 糖尿病、冠動脈疾患等の動脈硬化高リスク症例においては、空腹時5.2mg/dL以上をハイリスクとする

○脂質異常症診断基準（日本動脈硬化学会（編）：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版、日本動脈硬化学会：2022）

LDLコレステロール	140mg/dL以上	高LDL血漿
	120～139mg/dL	境界域高LDL血症**
HDLコレステロール	40mg/dL未満	低HDLコレステロール血症
トリグリセライド	150mg/dL以上（空腹時採血）*	高トリグリセライド血症
	175mg/dL以上（随時採血）*	
non-HDLコレステロール	170mg/dL以上	高nonHDLコレステロール血症
	50～169mg/dL	境界域高nonHDLコレステロール血症**

* 基本的に10時間以上の断食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分摂取は可とする。
空腹時であることが確認できない場合を「随時」とする。
** スクリーニングで境界域高LDL血症、境界域高nonHDL-C血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討し
治療の必要性を考慮する。
・ LDL-Cは F r i d e w a l d 式（F式）で計算する（ただし空腹時採血の場合のみ）。または直接法で求める。
・ TGが400mg/dL以上や随時採血の場合はnonHDL-CかLDL-C直接法を使用する。
ただしスクリーニングでnonHDL-Cを用いる時は、高TG血漿を伴わない場合はLDL-Cとの差が+30mg/dLより小さく
なる可能性を念頭においてリスクを評価する。
・ TGの基準値は空腹時採血と随時採血により異なる。
・ HDL-Cは単独では薬物介入の対象とはならない。

() は
保存温度

生化学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先																				
電 解 質 ・ 微 量 金 属	121 3F130	β ーリポ蛋白 3F1300000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	M:150～600 F:130～400 mg/dL		4～5		4																				
	1492 3F156	リポ蛋白(a) 3F1560000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集比濁法	30.0以下 mg/dL	生化Ⅰ 107	3～5	3月に1回算定できる	6																				
	1660 3F135	リポ蛋白分画 3F1350000023233	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	電気泳動法 (アガロース 膜)	備考参照 %	生化Ⅰ 49	4～5	<table><tr><td></td><td colspan="2">M</td><td colspan="2">F</td></tr><tr><td>α</td><td>27</td><td>～ 51</td><td>33</td><td>～ 53</td></tr><tr><td>preβ</td><td>8</td><td>～ 24</td><td>7</td><td>～ 21</td></tr><tr><td>β</td><td>35</td><td>～ 56</td><td>34</td><td>～ 52</td></tr></table>		M		F		α	27	～ 51	33	～ 53	pre β	8	～ 24	7	～ 21	β	35	～ 56	34	～ 52	3
		M		F																										
	α	27	～ 51	33	～ 53																									
	pre β	8	～ 24	7	～ 21																									
	β	35	～ 56	34	～ 52																									
	2703 3F140	リポ蛋白分画/HPLC 3F1400000023204	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	HPLC法	10P 参照	生化Ⅰ 129	4～5		3																				
	1858 3F160	リポ蛋白リパーゼ LPL 3F1600000022023	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.5(凍結)	EIA法	164～284 ng/mL	生化Ⅰ 219	3～9		3																				
	2397 3F087	MDAーLDL マロンジアルデヒド修飾LDL 3F0870000023023	1 全血容器(茶)	血清 1(凍結)	EIA法	M:45歳未満 48～82 45歳以上 61～105 F:55歳未満 46～82 55歳以上 61～105 U/L	生化Ⅰ 194	3～15	単独検体 ＊1	3																				
	125 3F025	リン脂質 PL 3F0250000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	150～250 mg/dL	生化Ⅰ 15	3～5		4																				
	124 3F035	遊離脂肪酸 NEFA 3F0350000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.3(絶凍)	酵素法	0.10～0.81 μ Eq/L	生化Ⅰ 59	3～5		4																				
	1331 3F180	アポリポ蛋白AⅠ 3F1800000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:119～155 F:125～165 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																				
1332 3F185	アポリポ蛋白AⅡ 3F1850000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:25.9～35.7 F:24.6～33.3 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																					
1333 3F190	アポリポ蛋白B 3F1900000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:73～109 F:66～101 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																					
1334 3F195	アポリポ蛋白CⅡ 3F1950000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:1.8～4.6 F:1.5～3.8 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																					
1335 3F200	アポリポ蛋白CⅢ 3F2000000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:5.8～10.0 F:5.4～9.0 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																					
1336 3F205	アポリポ蛋白E 3F2050000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:2.7～4.3 F:2.8～4.6 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																					
1563 3F095	脂肪酸4分画 3F0950000022202	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.5(冷蔵)	GC法	10P 参照 μ g/mL	生化Ⅱ 389	4～7	空腹時に採血	3																					

* ¹マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL) 冠動脈疾患既往歴のある糖尿病患者で、冠動脈疾患発症に関する予後予測の補助の目的で測定する場合に3月に1回に限り算定できる。ただし、糖尿病患者の経皮的冠動脈形成術治療時に、治療後の再狭窄に関する予後予測の目的で測定する場合、上記と別に術前1回に限り算定できる。
診療報酬明細書の摘要欄に前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載する。

生化学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
脂質 関連 ・ 蛋白	1526 3C045	アミノ酸分析ー総(血漿) 3C0450000022204	6 EDTA2Na管	血漿 0.9(凍結)	HPLC法	11P参照	生化Ⅱ 1074	5~12		3
	1838 3C046	アミノ酸分析ー特定項目 3C0460000022204	6 EDTA2Na管	血漿 0.5(凍結)	LC-MC/MC	11P参照	生化Ⅱ 1074	4~7		3
	1817 3C047	総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比 BCAA/BTR/TYR 3C0470000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	酵素法	備考参照 μmol/L	生化Ⅱ 283	4~7	BCAA (分岐鎖アミノ酸) 379 ~ 688 チロシン 53 ~ 104 BTR (BCAA/TYR) 4.99 ~ 9.45	3
	2573 3C070	ホモシステイン 3C0700000022204	6 EDTA2Na管	血漿 0.4(冷蔵)	HPLC法	M : 6.3~18.9 F : 5.1~11.7 nmol/mL	生化Ⅱ 279	6~12		3
	1868 3F110	総胆汁酸 3F1100000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法(酵素 サイクリング法)	14.4以下 μmol/L	生化Ⅰ 47	4~7		3


○リポ蛋白分画 (HPLC法) 基準値

	分画 (単位%)	分画 (単位mg/dL)
HDL	23.6 ~ 49.8	40.6 ~ 91.4
LDL	42.2 ~ 63.8	67.8 ~ 132.6
IDL	2.2 ~ 6.1	3.8 ~ 12.5
VLDL	2.6 ~ 13.9	4.9 ~ 22.8
Other	0.8 ~ 4.4	1.5 ~ 9.1
総コレステロール		150 ~ 219

○脂肪酸4分画

DHLA	ジホモ-γ-リノレン酸	16.7 ~ 58.2
AA	アラキドン酸	112.7 ~ 237.9
EPA	エイコサペンタエン酸	9.0 ~ 128.5
DHA	ドコサヘキサエン酸	46.7 ~ 172.7
EPA/AA比	エイコサペンタエン酸/アラキドン酸	0.06 ~ 0.72

●マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL) 採血についての注意

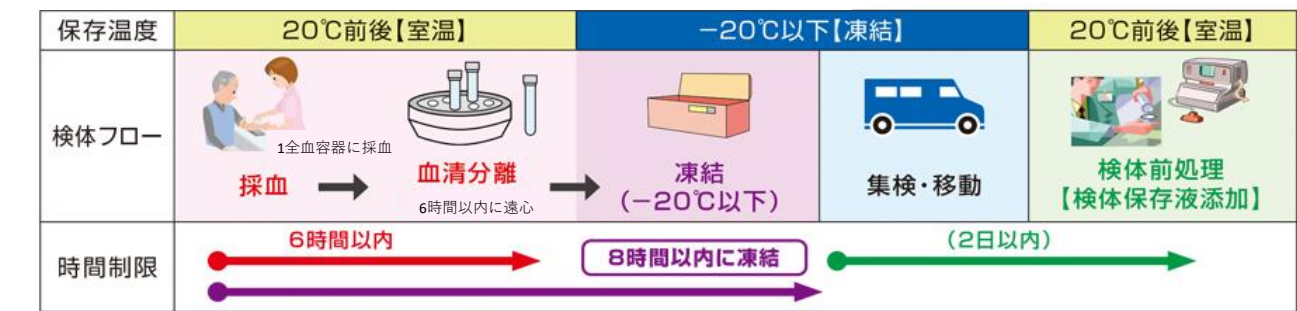

* **アポリポ蛋白** 脂質は水に溶けないため、血中では脂質粒子のまわりを蛋白質（アポ蛋白）が取り囲み、親水性が増した状態で存在している。この複合体がリポ蛋白であり、構成蛋白成分がアポリポ蛋白(アポ蛋白ともいう)である。現在、十数種類のアポ蛋白が区別されているが、臨床的には6種類のアポ蛋白が測定される。アポB/アポA-Ⅰ比は冠動脈疾患で上昇し、しかもその罹患枝が多岐にわたるほど、この比が上昇してくることが知られている。各リポ蛋白に含まれる主なアポ蛋白とその含有量、及び機能は以下の通りである。

・HDL……アポA-Ⅰ(67%)、アポA-Ⅱ(22%) ・LDL……大部分(98%)がアポB ・VLDL……アポB(37%)、アポC-Ⅱ(6.7%)、アポC-Ⅲ(40%)、アポE(13%) (カイロミクロンはすべてのアポ蛋白を含む。ただしアポEは痕跡) アポA-Ⅰ…LCATの活性化、HDL受容体との結合 アポA-Ⅱ…LCATの活性阻害、HTGLの活性阻害 アポB…LDL受容体との結合 アポC-Ⅱ…LPLの活性化 アポC-Ⅲ…LPLHTGLの活性阻害、レムナント受容体との結合を阻害 アポE…レムナント受容体、VLDLやIDLのLDL受容体との結合、VLDL受容体との結合。

* 3項目以上は94点

生化学検査

■アミノ酸分析 基準値

アミノ酸名 (英語)		アミノ酸名 (日本語)	基準値		略号	1文字略号
			血漿(単位:nmol/mL)	尿(単位: μ mol/g $\cdot$ creatinine)		
1	Taurine	タウリン	46.4~128.2	280~2000		
2	Phosphoethanolamine	ホスホエタノールアミン	TRA	7~70		
3	Aspartic acid	アスパラギン酸	TRA~7.2	TRA~12	Asp	D
4	Hydroxyproline	ヒドロキシプロリン	TRA~18.8	ND	Hyp	
5	Threonine	トレオニン	74.2~216.1	70~390	Thr	T
6	Serine	セリン	91.5~186.4	120~630	Ser	S
7	Asparagine	アスパラギン	43.8~90.6	51~300	Asn	N
8	Glutamic acid	グルタミン酸	12.2~82.7	3~29	Glu	E
9	Glutamine	グルタミン	418.0~739.8	150~810	Gln	Q
10	Sarcosine	サルコシン	TRA	ND		
11	α -Aminoadipic acid	α -アミノアジピン酸	ND	5~52		
12	Proline	プロリン	71.3~3730	ND	Pro	P
13	Glycine	グリシン	140.4~427.3	380~3600	Gly	G
14	Alanine	アラニン	258.8~615.2	89~560	Ala	A
15	Citrulline	シトルリン	17.9~48.0	2~41		
16	α -Amino-n-butyric acid	α -アミノ-n-酪酸	8.1~31.0	3~21		
17	Valine	バリン	156.2~360.4	23~66	Val	V
18	Cystine	シスチン	4.7~34.8	13~76	Cys-Cys	C-C
19	Methionine	メチオニン	15.5~38.6	11~58	Met	M
20	Cystethionine	シスタチオニン	ND	6~37		
21	Isoleucine	イソロイシン	37.0~100.4	13~46	Ile	I
22	Leucine	ロイシン	74.2~169.1	24~77	Leu	L
23	Tyrosine	チロシン	384~89.4	49~230	Tyr	Y
24	Phenylalanine	フェニルアラニン	43.5~79.8	27~96	Phe	F
25	β -Alanine	β -アラニン	TRA~11.8	2~110		
26	β -Amino-iso-butyric acid	β -アミノイソ酪酸	5.9以下	TRA~830		
27	Homocystine	ホモシスチン	ND	ND		
28	γ -Amino-n-butyric acid	γ -アミノ-n-酪酸	ND	ND		
29	Ethanolamine	エタノールアミン	TRA~10.5	190~530		
30	Hydroxylysine	ヒドロキシリジン	ND	8以下	Hyl	
31	Ornithine	オルニチン	42.6~141.2	TRA~35		
32	Tryptophan	トリプトファン	36.2~79.3	22~110	Trp	W
33	Lysine	リジン	125.7~281.9	78~800	Lys	K
34	1-Methylhistidine	1-メチルヒスチジン	9.1以下	25~2400		
35	Histidine	ヒスチジン	63.0~105.2	400~2000	His	H
36	3-Methylhistidine	3-メチルヒスチジン	TRA~8.2	110~340		
37	Anserine	アンセリン	ND	ND		
38	Carnosine	カルノシン	ND	4~74		
39	Arginine	アルギニン	31.8~149.5	8~71	Arg	R
40	Fischer's ratio	フィッシャー比	2.2~4.3	---		

(備考)ND:検出感度以下 TRA:痕跡

$$\text{フィッシャー比} = \frac{\text{分岐鎖アミノ酸(BCAA)}}{\text{芳香族アミノ酸(AAA)}} = \frac{\text{Val} + \text{Leu} + \text{Ile}}{\text{Phe} + \text{Tyr}}$$

生化学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先												
ビ タ ミ ン ・ 関 連 物 質	1810 3G015	ビタミンA 3G0150000023204	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結(遮光))	HPLC法	27.2～102.7 μg/dL		5～11		3												
	1679 3G025	ビタミンB1 チアミン 3G0250000019204	68 遮光EDTA管	EDTA加血液 1.1(凍結(遮光))	HPLC法	21.3～81.9 ng/mL	生化I 239	7～9		3												
	2278 3G030	ビタミンB2ー血清・血漿 リボフラビン 3G0300000023282	1 全血容器(茶)	血清 1.1(凍結(遮光))	蛍光法	1.7～4.6 μg/dL	生化I 231	4～8		3												
	1759 3G030	ビタミンB2ー全血 リボフラビン 3G0300000019282	68 遮光EDTA管	EDTA加血液 1.1(凍結(遮光))	蛍光法	4.1～8.8 μg/dL	生化I 242	4～8		3												
	1738 3G036	ビタミンB6 3G0360000023204	1 全血容器(茶)	血清 1(冷蔵(遮光))	HPLC法			4～8	<table><tr><td></td><td>M</td><td>F</td></tr><tr><td>ピリドキサミン (PAM)</td><td>0.6以下</td><td>0.6以下</td></tr><tr><td>ピリドキサル (PAL)</td><td>6.0 ～ 40.0</td><td>4.0 ～ 19.0</td></tr><tr><td>ピリドキシン (PIN)</td><td>3.0以下</td><td>3.0以下</td></tr></table>		M	F	ピリドキサミン (PAM)	0.6以下	0.6以下	ピリドキサル (PAL)	6.0 ～ 40.0	4.0 ～ 19.0	ピリドキシン (PIN)	3.0以下	3.0以下	3
		M	F																			
	ピリドキサミン (PAM)	0.6以下	0.6以下																			
	ピリドキサル (PAL)	6.0 ～ 40.0	4.0 ～ 19.0																			
	ピリドキシン (PIN)	3.0以下	3.0以下																			
	1686 3G040	ビタミンB12 シアノコバラミン 3G0400000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	180～914 pg/mL	生化I 134	2～4		3												
	1632 3G105	葉酸 3G1050000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	4.0以上 ng/mL	生化I 148	2～4	溶血は偽高値の影響あり	3												
	1905 3G055	カルニチン分画 3G0550000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素サイクリング法	総カルニチン： 45.0～91.0 遊離カルニチン： 36.0～74.0 アシルカルニチン： 6.0～23.0 μmol/L	生化I 95	3～4		3												
1848 3G060	ビタミンC アスコロビン酸 3G0600000023204	1 全血容器(茶)	血清 0.7(絶対凍結(遮光))	HPLC法	4.7～17.8 μg/mL	生化I 296	4～10	提出方法は下記参照	3													
1587 3G070	1-25-(OH)2ビタミンD3 1-25-(OH)2VD3 3G0700000023001	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	RIA2抗体法	20～60 pg/mL	生化I 388	4～7	* 1	3													
2605 3G065	25-ヒドロキシビタミンD/ECLIA 25-OHVD/ECLIA 3G0650000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA	判定の目安は 備考参照 ng/mL	生化I 117	3～5	* 2 <table><tr><td>ビタミンD充足状態</td><td>30.0以上</td></tr><tr><td>ビタミンD不足</td><td>20.0以上30未満</td></tr><tr><td>ビタミンD欠乏</td><td>20.0未満</td></tr></table>	ビタミンD充足状態	30.0以上	ビタミンD不足	20.0以上30未満	ビタミンD欠乏	20.0未満	3							
ビタミンD充足状態	30.0以上																					
ビタミンD不足	20.0以上30未満																					
ビタミンD欠乏	20.0未満																					
1847 3G080	ビタミンE トコフェロール 3G0800000023282	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結(遮光))	蛍光法	0.75～1.41 mg/dL		8～14		3													
3G080	ビタミンE分画 トコフェロール同族体分画 3G0800000023282	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵(遮光))	HPLC法	備考参照 μg/mL		4～19	α 4.90～13.80 β 0.06～0.28 γ 0.10～2.40 δ 0.14以下	3													

○ビタミンC 検体提出方法

遠心機がある場合：全血容器(No 1) に採血後、遠心分離を行い正確に血清0.5mLを専用容器(黄色いキャップ) に加え、混和後3000rpm5分間遠心分離し、その上清を遮光ポリスビッツ (茶色い容器) に移して凍結にてご提出ください。
遠心機がない場合：全血容器(No 1) 採取後、そのまま提出ください。



*1 1,25-ジヒドロキシビタミンD 慢性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、ビタミンD依存症 I 型若しくは低リン血症性ビタミンD抵抗性くる病の診断時又はそれらの疾患に対する活性型ビタミンD₃剤 による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。

*2 25-ヒドロキシビタミンD ア 原発性骨粗鬆症の患者に対して、骨粗鬆症の薬剤方針の選択時に1回限り算定できる。本検査を行う場合には、関連学会が定める実施方針を遵守すること。
イ ビタミンD欠乏性くる病若しくはビタミンD欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患の対する治療中の測定した場合は、診断時においては1回を限度とし、その後は3月に1回を限度と

() は
保存温度


生化学検査

項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
160 3D010	血糖(血清) GLU/Glu 3D0100000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ヘキシナー ゼUV法	70~110 mg/dL	生化 I 11	1~2		1
150 3D010	血糖(血漿) GLU/Glu 3D0100000022272	3 血漿容器(灰)	血漿 0.5(冷蔵)	電極法	70~110 mg/dL	生化 I 11	1~2		1
1857 3D046	HbA1c(NGSP) ヘモグロビンA1C 3D0460000019062	3 血漿容器(灰)	NAF加血液 0.5(冷蔵)	HPLC法	4.6~6.2 %	生化 I 49	1~2	EDTA血液検査可 *1	1
1449 3D085	1,5-AG 1,5-アンヒドログルシトール 3D0850000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	比色法	14.0以上 μg/mL	生化 I 80	3~5	*1	3
1101 3D055	グリコアルブミン GA 3D0550000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	11.6~16.4 %	生化 I 55	3~5	*1	3
1285 3E010	乳酸 3E0101000031271	10 過塩素酸管	除タンパク液 0.5(凍結)	酵素糖	4.2~17.0 mg/dL	生化 I 47	3~5	No10専用容器に血液1.0mL を入れよく混和し徐蛋白を行って ください。 遠心機の有る場合は、遠心分 離を行い上清を凍結にて提出く ださい	3
1286 3E015	ピルビン酸 3E0151000031271	10 過塩素酸管	除タンパク液 0.5(凍結)	酵素法	0.3~0.9 mg/dL	生化 I 47	3~5		3
1807 3E045	ケトン体分画 3E0450000023272	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	酵素サイクリ ング法	総ケトン体: 131以下 アセト酪酸: 55以下 3-ヒドロキシ酪酸: 85以下 μmol/L	生化 I 59	3~5	総ケトン体にアセトンは含まれ ません	3
1598 3D080	ヒアルロン酸(血清) 3D0800000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集法	50.0以下 ng/mL	生化 I 179	3~5	肝硬変の判定基準130以上 *2 50~130の場合肝臓の繊維化が疑 われます	3
1599 3D080	ヒアルロン酸(胸水) 3D0800000042062	5 尿スピッツ	胸水 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集法	μg/mL	0	3~5		3

*1 HbA1c、グリコアルブミン、1,5AGのうちいずれかを同一月中に合わせて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、
経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り算定できる

*2 ヒアルロン酸：慢性肝炎の患者に対して、慢性肝炎の経過観察及び肝生検の適応の確認を行う場合に算定できる

糖尿病診断基準

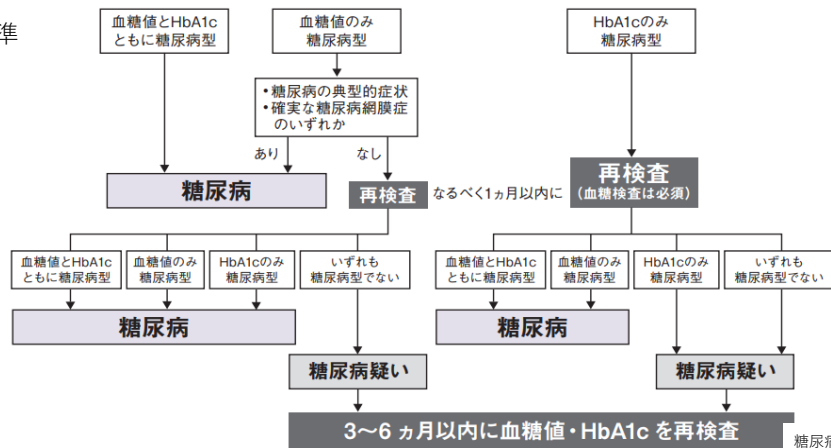

糖尿病標準診療マニュアルより

糖尿病型

- ① 早朝空腹時血糖値126mg/dL以上
- ② 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT) 2時間値200mg/dL以上
- ③ 随時血糖値200mg/dL以上
- ④ HbA1c6.5%以上

- ①②③のいずれかと④が確認されれば糖尿病型と診断
- ②③④のいずれかひとつだけを認めた場合は「糖尿病型」と診断する。別の日に再検を行い、再び「糖尿病型」が確認されれば糖尿病と診断する。ただし、HbA1cのみの反復検査で糖尿病と診断することは不可とする
- ③血糖値が「糖尿病型」(①②③のいずれか)を示し、かつ次の条件が満たされた場合は糖尿病と診断する→糖尿病の典型的症状(口渇・多飲・体重減少の存在)、確実な糖尿病網膜症の存在

内分泌学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
視床下部・下垂体関連	1174 4A010	成長ホルモン GH 4A0100000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA法	成人 M : 2.47以下 F : 0.13~9.88 ng/mL	生化Ⅱ 104	3~5		3
	1684 4A030	黄体形成ホルモン LH 4A0301000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 105	1~2		1
	1683 4A035	卵胞刺激ホルモン FSH 4A0351000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 105	1~2		1
	1743 4A020	プロラクチン PRL 4A0201000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	M : 3.6~12.8 F : 6.1~30.5 ng/mL	生化Ⅱ 98	1~2		1
	1708 4A015	ソマトメジンC IGF-1 4A0150000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA	下記参照 ng/mL	生化Ⅱ 212	3~4		3
	1744 4A070	抗利尿ホルモン AVH.ADH.アルギニン-バソプレッシン 4A07000000022001	6 EDTA2Na管	血漿 1.5(絶凍)	RIA2抗体法	水制限 : 4.0以下 自由飲水 : 2.8以下 pg/mL	生化Ⅱ 224	3~4		6
	1177 4A025	副腎皮質刺激ホルモン ACTH 4A0251000022006	6 EDTA2Na管	血漿 0.4(凍結)	ECLIA法	7.2~63.3 pg/mL	生化Ⅱ 184	3~5		6

OLH、FSH基準値

単位: mIU/mL		LH	FSH
M		0.8~5.7	2.0~8.3
F	卵胞期	1.8~10.2	3.0~14.7
	排卵期	2.2~88.3	3.2~16.6
	黄体期	1.1~14.2	1.5~8.5
	閉経後	5.7~64.3	157.8以下

男性

○ソマトメジン基準値

年齢			-2SD	~	+2SD	年齢			-2SD	~	+2SD	年齢			-2SD	~	+2SD	年齢			-2SD	~	+2SD
0	11	~	149	26	119	~	329	52	86	~	242	0	15	~	154	26	146	~	336	52	78	~	213
1	14	~	148	27	116	~	322	53	85	~	240	1	23	~	186	27	141	~	328	53	77	~	212
2	18	~	154	28	114	~	315	54	84	~	239	2	32	~	213	28	137	~	320	54	76	~	211
3	24	~	164	29	111	~	309	55	84	~	238	3	40	~	227	29	133	~	312	55	75	~	210
4	32	~	176	30	109	~	303	56	83	~	237	4	48	~	238	30	129	~	304	56	74	~	208
5	44	~	193	31	107	~	297	57	82	~	236	5	56	~	252	31	126	~	297	57	73	~	207
6	55	~	215	32	105	~	292	58	81	~	235	6	69	~	287	32	122	~	290	58	72	~	205
7	63	~	247	33	103	~	287	59	80	~	233	7	89	~	357	33	119	~	283	59	71	~	203
8	72	~	292	34	102	~	283	60	79	~	232	8	111	~	438	34	115	~	277	60	70	~	201
9	84	~	350	35	100	~	279	61	77	~	230	9	133	~	517	35	112	~	271	61	69	~	198
10	99	~	423	36	99	~	275	62	76	~	228	10	155	~	588	36	109	~	265	62	68	~	196
11	113	~	499	37	97	~	272	63	75	~	226	11	175	~	638	37	106	~	260	63	66	~	194
12	125	~	557	38	96	~	269	64	73	~	224	12	188	~	654	38	103	~	254	64	65	~	191
13	133	~	579	39	95	~	266	65	72	~	221	13	193	~	643	39	100	~	250	65	64	~	188
14	138	~	570	40	94	~	263	66	70	~	219	14	193	~	625	40	98	~	245	66	62	~	186
15	141	~	552	41	94	~	261	67	68	~	216	15	193	~	614	41	95	~	240	67	61	~	183
16	142	~	543	42	93	~	259	68	66	~	213	16	192	~	611	42	93	~	236	68	60	~	180
17	142	~	540	43	92	~	257	69	65	~	209	17	191	~	599	43	90	~	233	69	59	~	177
18	142	~	526	44	92	~	255	70	63	~	206	18	188	~	574	44	88	~	229	70	57	~	175
19	143	~	501	45	91	~	253	71	61	~	202	19	182	~	539	45	87	~	226	71	56	~	172
20	142	~	470	46	90	~	250	72	58	~	198	20	175	~	499	46	85	~	224	72	55	~	170
21	139	~	436	47	90	~	250	73	56	~	194	21	168	~	459	47	83	~	221	73	54	~	167
22	135	~	405	48	89	~	248	74	54	~	190	22	161	~	425	48	82	~	219	74	53	~	165
23	131	~	379	49	88	~	246	75	52	~	185	23	155	~	397	49	81	~	218	75	52	~	163
24	128	~	356	50	87	~	245	76	50	~	181	24	151	~	375	50	80	~	216	76	50	~	160
25	125	~	337	51	87	~	243	77	48	~	177	25	147	~	358	51	79	~	215	77	49	~	158

() は
保存温度

内分泌学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
甲状腺・ 副甲状腺 関連	1749 4B015	FT3 遊離トリヨードサイロニン 4B0150000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA	2.30~4.00 pg/mL	生化Ⅱ 121	1~2		1
	1788 4B035	FT4 遊離サイロキシン 4B0350000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA	0.90~1.70 ng/dL	生化Ⅱ 121	1~2		1
	1166 4A055	TSH 甲状腺刺激ホルモン 4A0550000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA	0.610~ 4.230 μIU/mL	生化Ⅱ 98	1~2		1
	1610 4B040	サイログロブリン Tg 4B0400000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA法	33.70以下 ng/mL	生化Ⅱ 128	1~2		1
	1249 5G290	抗サイログロブリン抗体 A-Tg.TgAb 5G2900000023007	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA	28未満 IU/mL	生化Ⅱ 136	1~2		1
	1194 5G285	抗TPO抗体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体A-TPO 5G2850000023005	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA	16未満 IU/mL	生化Ⅱ 138	1~2		1
	2442 5G310	TSHレセプター抗体 TRAb定量(第3世代) 5G3101352023053	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	ECLIA法	2.0未満 IU/L	生化Ⅱ 208	1~2	*2	1
	1384 5G300	TSAb 甲状腺刺激抗体 5G3000000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	バイオアッセイ法	110未満 %	免疫 330	4~5		3
	1158 4B045	TBG サイロキシン結合グロブリン 4B0450000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	CLEIA	14.0~31.0 μg/mL	生化Ⅱ 130	5~8	*2	3
	1128 4C025	PTH-INTACT 副甲状腺ホルモンINTACT 4C0250000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	10~65 pg/mL	生化Ⅱ 161	1~2	保険収載名「副甲状腺ホルモンPTH」	1
	2230 4C026	whole-PTH 副甲状腺ホルモンwhole 4C0260000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	14.9~56.9 pg/mL	生化Ⅱ 161	0	保険収載名「副甲状腺ホルモンPTH」	3
	1614 4C034	PTH関連蛋白-インタクト PTHrP-Intact 4C0340100022006	11 アプロチニンEDTA	血漿 0.5(凍結)	IRMA(ビーズ固相法)	1.1未満 pg/L	生化Ⅱ 185	3~5	保険収載名「副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)」 *1	3
	1827 4C035	カルシトニン CT 4C0351000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	M : 5.15以下 F : 3.91以下 pg/mL	生化Ⅱ 127	3~5		3

*1 PTH関連蛋白 高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果判定のために測定した場合に限り算定する。

*2 甲状腺刺激抗体(TSAb)と抗TSHレセプター抗体(TRAb)を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。

内分泌学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
副 腎 皮 質 関 連	1179 4D040	コルチゾール 4D0401000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	午前8～10時 4.5～21.1 μg/dL	生化Ⅱ 121	3～5	随時尿(項目コード2520)	6
	1671 4D035	11-OHCS 4D0351000023282	1 全血容器(茶)	血清 2.1(冷蔵)	蛍光法 (De Moore曰 井変法)	午前8～10時 5.0～21.4 μg/dL	生化Ⅱ 60	4～10		3
	1539 4D090	DHEA-S デヒドロエピアンドロステロン 4D0900000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(凍結)	CLEIA法	17P参照 ng/mL	生化Ⅱ 164	2～4		3
	1670 4Z010	血漿レニン活性 PRA 4Z0100000022023	6 EDTA2Na管	血漿 0.7(凍結)	EIA法	座位: 0.2～3.9 臥位: 0.2～2.3 立位: 0.2～4.1 ng/mL/hr	生化Ⅱ 100	3～5	早朝安静状態で採血 *1	6
	2308 4Z020	活性型レニン定量 ARC 4Z0200000022052	6 EDTA2Na管	血漿 0.5(凍結)	CLEIA法	2.21～39.49 pg/mL	生化Ⅱ 102	3～5	早朝15分以上臥位にて安静後採血 *1	6
	1688 4D115	アルドステロン PAC 4D1150000022052	6 EDTA2Na管	血漿 0.5(凍結)	CLEIA法	4.0～82.1 pg/mL	生化Ⅱ 122	3～5	早朝15分以上臥位にて安静後採血	6
	2290 4D120	アルドステロン/レニン比 PAC/PRA 4D1200000022919	6 EDTA2Na管	血漿 1.3(凍結)	計算法	「原発性アルドステロン症診療ガイドライン2021」 200未満(境界域: 100～200未満) かつ PAC60未満		3～5	レニン活性(項目コード1670)とアルドステロン(項目コード1688)の同時依頼が必要です	6
	2291 4D122	アルドステロン/活性レニン定量 PAC/ARC 4D1220000022919	6 EDTA2Na管	血漿 1.3(凍結)	計算法	40未満(境界域: 20～40未満) かつ PAC60未満		3～5	レニン定量(項目コード2308)とアルドステロン(1688)と同時依頼が必要です	6
	1844 E4016	カテコールアミン3分画 4E0160000022204	6 EDTA2Na管	血漿 1.1(凍結)	HPLC法	アドレナリン: 0.17以下 ノルアドレナリン: 0.15～0.57 ドーパミン: 0.03以下 ng/mL	生化Ⅱ 161	3～5	安静臥位状態で採血 尿カテコールアミン3分画(項目コード1517)	6
	2668 4F041	(血中)遊離メタネフリン分画 4E0410000122021	6 EDTA2Na管	血漿 1.5(絶凍)	ELISA	褐色細胞腫のカットオフ メタネフリン 130.0以下 ノルメタネフリン 506.0以下 ng/mL	生化Ⅱ 585	3～5	*2	4
	1528 4E041	(尿)メタネフリン分画 4E0400000004204	5 尿スビッツ	蓄尿 5(冷蔵)	LC-MS/MS法	メタネフリン0.04～0.18 ノルメタネフリン0.10～0.28 ng/mL	生化Ⅱ 220	3～5	蓄尿の場合は蓄尿量を記入ください 蓄尿方法はお問合せ下さい 随時尿(項目コード2803) *2	3
	2535 4E060	VMA(随時尿) バニルマンデル酸 4E0600000004210	5 尿スビッツ	尿 3(冷蔵)	HPLC法	蓄尿1.50～4.80mg/day 随時尿2.10～5.00mg/g・Cre ng/mL	生化Ⅱ 90	3～5	蓄尿の場合は蓄尿量を記入ください 蓄尿方法はお問合せ下さい 蓄尿(項目コード1518)	3
	2536 4E055	HVA(随時尿) ホモバニリン酸 4E0550000004210	5 尿スビッツ	尿 3(冷蔵)		蓄尿2.40～6.00mg/day 随時尿2.20～5.80mg/g・Cre ng/mL	生化Ⅱ 69	3～5	蓄尿の場合は蓄尿量を記入ください 蓄尿方法はお問合せ下さい 蓄尿(項目コード1750)	3
	1187 4E070	5HIAA(尿) 5-ハイドロキシインドール酢酸 4E0700000004204	5 尿スビッツ	蓄尿 5(冷蔵)	LC-MS/MS法	1.0～6.0 mg/day	生化Ⅱ 95	3～5	蓄尿の場合は蓄尿量を記入ください 蓄尿方法はお問合せ下さい	3
	1751 4E065	セロトニン(血液) 4E0650000019204	69 EDTA加血液	EDTA加血液 2.1(凍結)	HPLC法	81.0～262.0 ng/mL		3～5	そのまま凍結	3

*1 レニン活性とレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数を算定する

*2 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画 褐色細胞腫の鑑別診断を行った場合に1回に限り算定する。本検査を実施するに当たっては関連学会が定める指針を遵守し褐色細胞腫を疑う医学的な理由を診療録に記録すること。メタネフリン・メタネフリン・ノルメタネフリン分画、ノルメタネフリン又は遊離メタネフリン・遊離メタネフリン分画のうちいずれかを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

() は
保存温度

内分泌学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
性 腺 ・ 胎 盤 関 連	1747 4F025	エストラジオール E2 4F0250000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	下記参照 pg/mL	生化Ⅱ 167	1~2		1
	1718 4F045	プロゲステロン 黄体ホルモン 4F0450000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	下記参照 ng/mL	生化Ⅱ 139	1~2		1
	1631 4F065	テストステロン 4F0650000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	M : 142.4~ 923.1 F : 10.8~ 56.9 ng/dL	生化Ⅱ 119	3~5		3
	1233 4F070	遊離テストステロン 4F0700000023021	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	RIA-固相法	下記参照 pg/mL	生化Ⅱ 156	3~6	午前中に採血してください	3
	1740 4F080	HCG ヒト絨毛性ゴナドピン 4F0800000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 134	1~2	*1	1
	1325 4F080	尿中HCG 尿中ヒト絨毛性ゴナドピン 4F0800000001053	5 尿スπιツ	尿 2(冷蔵)	ECLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 134	3~5	*1	1
	1799 4F090	HCG-βサブユニット 遊離βHCG 4F0900000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	1.00未満 ng/mL	生化Ⅱ 129	3~5	*2	3
	2403 4F100	抗ミューラー管ホルモン AMH 4F1000000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	下記参照 ng/mL	生化Ⅱ 600	1~2	*3	1
	2806 4Z335	sFlt-1/PIGF比 4Z3350000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.9(冷蔵)	ECLIA法	下記参照	生化Ⅱ 340	3~9	*4	3

*1 HCG定性、HCG半定量又はHCGを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

*2遊離βサブユニット HCG産生腫瘍に対して測定した場合に限り算定する。

*3抗ミューラー管ホルモン 不妊症の患者に対して、卵巣の機能の評価及び治療方針の決定を目的として6月1回限り算定できる

*4sFlt-1/PIGF比 妊娠18週から36週未満の妊娠高血圧腎症が疑われる妊婦であって、以下のリスク因子を2つ以上有するもの実施した場合に、原則として一連の妊娠につき1回限り算定できる。なお、リスク因子を2つ以上有する場合は、原則として、当該点数は算定できない。(イ)収縮期血圧が130mmHg以上 (ロ)蛋白尿 (ハ)妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見 (ニ)子宮内胎児発育遅延 (ホ)子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見

エストラジオール (E2)			プロゲステロン			遊離テストステロン (参考基準値：午前中採血)			DHEA-S基準値 単位：ng/mL		
M	19.0	～ 51.0	0.6以下			年齢	男性	女性	年齢	男	女
卵胞期	19.0	～ 226.0	0.4以下			30 ～ 29	7.6 ～ 23.8	0.4 ～ 2.3	18～20	240～5370	510～3210
排卵期	49.0	～ 487.0	3.7以下			30 ～ 39	6.5 ～ 17.7	0.6 ～ 2.5	21～30	850～6900	180～3910
黄体期	78.0	～ 252.0	8.5 ～ 21.9			40 ～ 49	4.7 ～ 21.6	0.3 ～ 1.8	31～40	1060～4640	230～2660
閉経後	19.0	～ 51.0				50 ～ 59	4.6 ～ 19.6	0.8 ～ 1.7	41～50	700～4950	190～2310
妊前期	780.0	～ 16631.0	23.9 ～ 141.4			60 ～ 69	5.3 ～ 11.5		51～60	380～3130	80～1880
娠中期	1146.0	～ 36635.0	25.7 ～ 142.9			70以上	4.6 ～ 16.9		61～70	240～2440	120～1330
中後期	5452.0	～ 44915.0	51.2 ～ 325.8						71以上	50～2530	70～1770
(単位：pg/mL)											

HCG（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）（尿）				HCG（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン）（血清）			
尿	男性		3.0以下	男性		5.0以下	妊婦 （妊 娠 週 数）
	非妊婦			非妊婦			
	妊婦	6週	15000～30000	1～10	1.2～417430		
		10週	90000～120000	11～15	16996～247465		
		20週	未設定	16～22	6860～50239		
		40週	未設定	22～40	1583～65911		
sFlt-1/PIGF比 基準値							
38.00以下		1週間以内の妊婦高血圧腎症（PE）の非発症予測					
38.00越		4週間以内の妊婦高血圧腎症（PE）の発症予測					

AMH (抗ミューラー管ホルモン) 基準値

年齢	例数	中央値	基準範囲	年齢	例数	中央値	基準範囲
≤27	558	4.69	0.76 ~ 14.18	37	1154	2.27	0.24 ~ 8.50
28	387	4.27	0.84 ~ 12.44	38	1230	1.90	0.11 ~ 7.81
29	555	4.14	0.86 ~ 11.97	39	1176	1.80	0.13 ~ 7.45
30	663	4.02	0.79 ~ 12.74	40	1057	1.47	0.08 ~ 6.13
31	865	3.85	0.44 ~ 13.08	41	888	1.30	0.06 ~ 5.52
32	872	3.54	0.62 ~ 13.87	42	715	1.00	0.05 ~ 5.81
33	959	3.32	0.4 ~ 12.76	43	509	0.72	0.03 ~ 4.49
34	1064	3.14	0.38 ~ 11.16	44	309	0.66	0.03 ~ 3.98
35	1191	2.62	0.37 ~ 10.18	45	144	0.41	0.03 ~ 3.43
36	1122	2.5	0.33 ~ 9.93	46≦	127	2.36	0.02 ~ 1.67

内分泌学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
膵・ 消化器 関連	2020 4G010	インスリン IRI 4G0101000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	2.2～12.4 μ U/mL	生化Ⅱ 100	3～5	溶血検体検査不可 負荷コードは下記参照	3
	2733 5G360	インスリン抗体 5G3600000023007	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	RIA法	0.4未満 U/mL	免疫 107	3～5		3
	2030 4G020	C-ペプチド CPR 4G0201000023099	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA法	22.8～155.2 ng/mL	生化Ⅱ 105	3～5	負荷コードは下記参照 *1	3
	1710 4G020	C-ペプチド(尿) CPR 4G0200000004051	5 尿スビッツ	蓄尿 1(冷蔵)	ECLIA法	22.8～155.2 μ g/day	生化Ⅱ 108	3～5	負荷コードは下記参照 *1 蓄尿は安定化剤を入れ冷所で保存し、 蓄尿量を記入ください	3
	2798	HOMA-IR 3D900000002391901	1.3 全血(茶)血糖(灰)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	下記参照			インスリン(項目コード2021)・空腹時血糖 (項目コード2001)の同時依頼が必要です 計算式は下記参照	0
	2799	HOMA- β 3D905000002391901	1.3 全血(茶)血糖(灰)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	下記参照			インスリン(項目コード2021)・空腹時血糖 (項目コード2001)の同時依頼が必要です 計算式は下記参照	0
	2802	インスリン分泌指数 Insulinemic Index 3D915000002391901	1.3 全血(茶)血糖(灰)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	下記参照			インスリン(項目コード2021)・インスリン 負荷30分(項目コード2022)・空腹時血糖(項 目コード2001)・血糖負荷30分(項目コード 2002)の同時依頼が必要です 計算式は下記参照	0
	2800	CPRインデックス CPI,Cペプチドインデックス 3D910000002391901	1.3 全血(茶)血糖(灰)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	下記参照			血清Cペプチド(項目コード2030)・空腹時血 糖(項目コード2001)の同時依頼が必要です 計算式は下記参照	0
	2801	SUIT Secretory Units of Insulin in Transplantation 0	1.3 全血(茶)血糖(灰)	血清 0.5(冷蔵)	計算法	下記参照			血清Cペプチド(項目コード2030)・空腹時血 糖(項目コード2001)の同時依頼が必要です 計算式は下記参照	0
	2671 4G030	膵グルカゴン 4G0300000022023	11 アロチニンE D T A	血漿 0.5(凍結)	EIA法	8.8～45.2 (空腹時) pg/mL	生化Ⅱ 150	3～5	溶血は低値の影響があります *2	3
	1375 5G340	抗GAD抗体 5G3400000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	EIA法	5.0未満 U/mL	生化Ⅱ 134	3～5		3
	1472 5G342	抗IA-2抗体 5G3420000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	0.6未満 U/mL	生化Ⅱ 213	3～5	*3	3

*1 C-ペプチド 同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。

*2 抗GAD抗体 すでに糖尿病の診断が確定した患者に対して、I型糖尿病の診断に用いた場合又は自己免疫介在性脳炎・脳症の診断に用いた場合に算定できる。

*3 抗IA-2抗体 すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、抗GAD抗体の結果、陰性が確認された患者に対して、I型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。なお、算定するに当たっては、抗GAD抗体の結果、陰性が確認された年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

○負荷コード一覧 空欄のコードはお問合せ下さい

	前	30分	60分	90分	120分	150分	180分	240分
血糖	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
尿糖	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
インスリン	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
CPR	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPR(尿)	1710							

○インスリン分泌の指標となる検査

項目コード	項目	評価対象	基準値	計算式
2798	HOMA-IR	肝臓のインスリン抵抗性	2.5以上：インスリン抵抗性	空腹時インスリン×空腹時血糖÷405
2799	HOMA- β	インスリン分泌能	40%以下分泌能低下	空腹時インスリン×360÷(空腹時血糖-63)
2802	インスリン分泌指数	インスリン分泌能初期分泌能	0.4未満：インスリン初期低下目安	(インスリン負荷30分-インスリン空腹時)÷(血糖負荷30分-空腹時血糖)
受託不可	Matuda index	全身のインスリン感受性	1.6以下：インスリン抵抗性(負荷試験より計算)	1000÷ $\sqrt{(空腹時血糖値 \times 空腹時インスリン \times 負荷中の平均血糖値 \times 負荷中の平均インスリン)}$
2800	CPI(CPRインデックス)	インスリン分泌能	0.8～1.0：インスリン療法検討の境界線 0.8以下：インスリン療法を要することが多い	空腹時血清Cペプチド×100÷空腹時血糖
2801	SUIT	インスリン分泌能	20～23以下：インスリン	1500×空腹時血清Cペプチド×100÷(空腹時血糖-61.7)

() は
保存温度

内分泌学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
その他	1295 4Z270	HANP 心房性ナトリウム利尿ペプチド 4Z2700000022052	11 アプロチニン EDTA	血漿 0.5(凍結)	CLEIA法	43.0以下 pg/mL	生化Ⅱ 221	3～5	溶血検体は低値となります * 1	3
	1383 4Z271	BNP 脳性ナトリウム利尿ペプチド 4Z2710000022052	6 EDTA2Na管	血漿 0.5(凍結)	CLIA法	18.4以下 pg/mL	生化Ⅱ 130	1～2	* 1	1
	2208 4Z272	NT-ProBNP 脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント 4Z2720000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA法	125以下 pg/mL	生化Ⅱ 136	1～2	* 1	1
	1820 4Z275	エリスロポエチン 4Z2750000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLEIA法	4.2～23.7 mIU/mL	生化Ⅱ 209	3～5	* 2	3
	1367 4Z280	オステオカルシン OC;BGP 4Z2800000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	M: 8.4～33.1 F: 閉経前 7.8～ 30.8 閉経後 14.2～ 54.8 ng/mL	生化Ⅱ 153	3～5	* 3	3
	2251 4Z282	低カルボキシル化オステオカルシン ucOC 4Z2820000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	ECLIA法	4.50未満 ng/mL	生化Ⅱ 154	4～7	* 4	3
	1305 4Z315	HGF 肝細胞増殖因子 4Z3150000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	0.39以下 ng/mL	生化Ⅱ 227	3～5	* 5	3
	2212 4Z400	レプチン 4Z4000000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	M: 0.6～8.9 F: 1.9～26.6 ng/mL	生化Ⅱ 1000	3～9	* 6	3
	2213 4Z401	アディポネクチン 4Z4010000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集比濁法	4.0以上 μg/mL		3～5		3
	2310 4Z305	VEGF(血清) 4Z3050000022023	6 EDTA2Na管	血漿 0.5(絶凍)	EIA法	POEMS症候群の診 断カットオフ値 1000.0 pg/mL	生化Ⅰ 460	3～5	* 7	3

- *¹ **HANP、BNP、NT-proBNP** 心不全の診又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。脳性Na利尿ペプチド (BNP) と脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (NT-proBNP) と心房性Na利尿ペプチド (ANP) のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。脳性Na利尿ペプチド (BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (NT-proBNP) 又は心房性Na利尿ペプチド (ANP) を併せて実施した場合は、各々の検査の実施日を医療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- *² **エリスロポエチン** 以下のいずれかの目的で行った場合に算定する。
ア 赤血球増加症の鑑別診断
イ 重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータベゴルもしくはHIF-PH阻害薬投与前の透析患者における腎性貧血の診断
ウ 骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定
- *³ **オステオカルシン (OC)** 続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺 (上皮小体) 腺腫過形成手術あとの治療効果判定に際して実施した場合に限り算定できる。1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTX)、デオキシピリジノリン (尿)、酒石酸抵抗性ホスファターゼ (TRACP-5b) を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
- *⁴ **低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)** 骨粗鬆症におけるビタミンK₂剤の治療選択目的で行った場合又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
- *⁵ **肝細胞増殖因子 (HGF)** 肝炎において劇症化が疑われる場合は劇症肝炎の経過観察に用いた場合に限り算定する。
- *⁶ **レプチン** 脂肪萎縮、食欲亢進、インスリン抵抗性、糖尿病及び脂質異常症のいずれも有する患者に対して、全身性脂肪萎縮症の診断の補助を目的として、ELISA法により測定した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
本検査の実施に当たっては、関連学会が定める指針を遵守し、脂肪萎縮の発症時期及び全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由を治療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- *⁷ **血管内皮増殖因子 (VEGF)** クロウ・深瀬症候群 (POEMS症候群) の診断又は診断後の経過観察を目的として、月1回を限度として算定できる。

腫瘍マーカー

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
腫瘍マーカー	1805 5D010	CEA 癌胎児性抗原 5D0100000023007	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	5.0以下 ng/mL	生化Ⅱ 99	1~2	*1	1
	1797 5D015	AFP α-フェトプロテイン 5D0150000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	10.0以下 ng/mL	生化Ⅱ 98	1~2		1
	1845 5D520	PIVKAⅡ-CLIA 5D5200000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	40未満 mAU/mL	生化Ⅱ 131	2~4		3
	1960 5D018	AFPレクチン分画 α-フェトプロテインレクチン分画 5D0180000023024	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	LBA-EATA法	L3分画 10.0未満 総AFP量 10.0以下 ng/mL	生化Ⅱ 185	3~5		3
	1438 5D025	BFP 塩基性フェトプロテイン 5D0250000023023	35 ブレイン管	血清 0.6(冷蔵)	EIA法	75以下 ng/mL	生化Ⅱ 150	3~4	分離材入りの容器不可 溶血検体検査不可 採血後2時間以内に血清分離	3
	1567 5D130	CA19-9 5D1300000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	37.0以下 U/mL	生化Ⅱ 121	1~2		1
	1590 5D170	DUPAN-2 5D1700000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	EIA法	150以下 U/mL	生化Ⅱ 115	3~5	*1	3
	1293 5D220	SPan-1 5D2200000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	IRMA法	30以下 U/mL	生化Ⅱ 144	3~5		3
	1811 5D175	SLX シアリルLex-i抗原 5D1750000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	RIA固相法	38以下 U/mL	生化Ⅱ 140	3~5		3
	1435 5D200	NCC-ST-439 5D2000000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	EIA法	男性及び50歳以上の女性 4.5未満 女性49歳以下 7.0未満 U/mL	生化Ⅱ 112	3~5		3
	2224 5D560	抗p53抗体 5D5600000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLEIA法	1.30以下 U/mL	生化Ⅱ 163	3~5	*4	3
	1826 5D325	シフラ サイトケラチン19フラグメント 5D3250000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.8(冷蔵)	CLEIA法	3.5以下 ng/mL	生化Ⅱ 154	3~5	*2	3
	1588 5D410	NSE 神経特異エノラーゼ 5D4100000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	ECLIA法	16.3以下 ng/mL	生化Ⅱ 142	3~5	*3	3
	1373 5D550	ProGRP ガストリン放出ペプチド前駆体 5D5500000022051	6 EDTA2Na管	血漿 0.4(冷蔵)	CLEIA	81未満 pg/mL	生化Ⅱ 175	3~5		3
	1345 5D300	SCC抗原 扁平上皮癌関連抗原 5D3000000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	1.5以下 ng/mL	生化Ⅱ 101	3~5		3

*1 CEAとDUPAN-2 あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*2 シフラ 悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌に限り「悪性腫瘍特異物質治療管理料」を算定できる。

*3 ProGRPとNSE あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*4 抗P53抗体 食度癌、大腸癌又は乳がんが強く疑われる患者に対して行った場合に月1回限り算定できる。

5D3250000023053

ng/mL

() は
保存温度

腫瘍マーカー

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
腫瘍マーカー	1572 5D100	CA125 5D100000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	35.0以下 U/mL	生化Ⅱ 136	3~5	*1	3
	2575 5D110	HE4 ヒト精巢上体蛋白4 5D1100000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	閉経前女性: 70.0 以下 閉経後女性: 140.0以下 pEq/L	生化Ⅱ 200	3~5		3
	2576 5D113	ROMA 卵巣悪性腫瘍推定値 5D1130000023919	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	閉経前女性: 7.4 未満 閉経後女性: 25.3 %		3~5	CA125(項目コード1572)とHE4(項目 コード2575)の同時依頼が必要です	3
	2544 5D103	CA602 5D1030000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ELISA法	63以下 U/mL	生化Ⅱ 190	3~5	*1	4
	1292 5D150	CA72-4 5D1500000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA法	10.0以下 U/mL	生化Ⅱ 146	3~5		3
	1355 5D153	STN シアリルTn抗原 5D1530000023005	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	RIA・固相法	45以下 U/mL	生化Ⅱ 146	3~5		3
	2551 5D155	CA54/61 5D1550000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ELISA法	12以下 U/mL	生化Ⅱ 184	3~5		4
	1579 5D125	BCA-225 5D1250000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	160未満 U/mL	生化Ⅱ 158	3~5		3
	1404 5D177	CSLEX シアリルLex抗原 5D1770000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	EIA法	8.0未満 U/mL	生化Ⅱ 160	3~5	*2 *3	3
	1589 5D120	CA15-3 5D1200000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	25.0以下 U/mL	生化Ⅱ 112	3~5	*2	3
	1372 5D305	高感度PSA 前立腺特異抗原 5D3050000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	4.000以下 ng/mL	生化Ⅱ 121	1~2	23P参照	1
	1269 5D308	フリーPSA/トータルPSA比 PSAF/T比 5D3080000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	26.0%以下 前立腺癌 疑い %	生化Ⅱ 150	3~5	23P参照	3
	1700 5D306	PSA-ACT 5D3060000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	3.4以下 ng/mL	生化Ⅱ 124	3~4		3
	2805 5D304	PSAレクチン結合分画比 S2, 3PSA% 5D3040000023024	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	LBA-EATA法	38.0未満 %	生化Ⅱ 248	3~5	23P参照	3
	1430 5D310	γ-Sm γ-セミノプロテイン 5D3100000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.4(凍結)	CLEIA法	4.00以下 ng/mL	生化Ⅱ 187	3~5		3
	2751 5D309	プロステートヘルスインデックス phi 5D3090000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLEIA法	27.2未満 0	生化Ⅱ 281	3~5	23P参照	3

*1 CA125とCA602 あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*2 CA15-3とCSLEX あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*3 CSLEX 診療及び他の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。

腫瘍マーカー

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
腫瘍マーカー力	2519 5D600	可溶性メソリン関連ペプチド SMRP 5D6000000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	CLEIA法	1.5未満 nmol/L	生化Ⅱ 220	6~12	*1	3
	2390 5D590	血清HER2タンパク 5D5900000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	15.2以下 ng/mL		3~4	*2	3
	1914 5J095	可溶性IL-2レセプター sIL-2レセプター 5J0950000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	157~474 U/mL	生化Ⅱ 438	3~5	*3	3
	1916 2C105	チミジキナーゼ活性 TK活性 2C1050000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	CLIA法	7.5以下 U/L	血液 233	3~5	*4	3

*¹ 可溶性メンリン関連ペプチド 悪性中皮腫の診断の補助又は悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して治療効果の判定若しくは経過観察を目的として実施した場合に算定する。
検査を悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合は、以下のいずれかに該当する患者に対して使用した場合に限り算定する。この場合、検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(イ) 石綿曝露歴があり、胸水、腹水等の貯留が認められる患者
(ロ) 体液細胞診で悪性中皮腫が疑われる患者
(ハ) 画像診断で胸膜腫瘍、腹膜腫瘍等の漿膜腫瘍が認められる患者
悪性中皮腫の治療効果判定又は経過観察を目的とし実施する場合は、悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して、検査結果の基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する
*² HER2蛋白の保険算定 悪性腫瘍が既に確定診断され、かつHER2蛋白過剰発現が認められている患者または他の測定方法により、HER2蛋白過剰発現の有無が確認されていない再発癌患者に対して、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限りB001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。なお確定診断された患者が対象となるため、腫瘍マーカー（生化Ⅱ）の区分で算定されることはない。
*³ 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R) 非ホジキンリンパ腫、ATL又はメトレキサート使用中のリンパ増殖性疾患の診断の目的で測定した場合に算定できる。
また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。
*⁴ デオキシチミジキナーゼ 造血器腫瘍の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
■腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア 急性及び慢性肺炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合に
イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-II半定量又は定量を行った場合。（月1回限度）
ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。（診断又は治療の前後に各1回を限度とする）
エ 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合

腫瘍マーカー検査	コードNo.	食道がん	コードNo.	胃がん	コードNo.	大腸がん	コードNo.	原発性肝がん
	1345	SCC抗原	1292	CA72-4	1805	CEA	1797	AFP
	1805	CEA	1805	CEA	1567	CA19-9	1960	AFP-L3分画
	1567	CA19-9	1567	CA19-9	1292	CA72-4	1845	PIVKA-II
	2224	抗p53抗体	1572	CA125	1355	STN		
			1435	NCC-ST-439				
	コードNo.	肝臓がん	コードNo.	胆嚢胆管がん	コードNo.	肺がん	コードNo.	乳がん
	1567	CA19-9	1805	CEA		〇腺癌〇	1589	CA15-3
	1805	CEA	1567	CA19-9	1805	CEA	1805	CEA
	1293	Span-1	1293	Span-1	1811	SLX	1435	NCC-ST-439
腫瘍マーカー検査	1590	DUPAN-2	1590	DUPAN-2	1355	STN	1579	BCA225
	1557	エラスターゼ1	1435	NCC-ST-439		〇扁平上皮癌〇		
	1811	SLX			1826	シフラ		
	1435	NCC-ST-439			1345	SCC抗原		
	2748	APOA2アイソフォーム				〇小細胞癌〇		
					1373	ProGRP		
					1588	NSE		
	コードNo.	前立腺がん	コードNo.	子宮がん	コードNo.	卵巣がん	コードNo.	膀胱がん
	1372	高感度PSA		〇頸癌〇	1572	CA125		
	1269	PSA F/T比	1345	SCC抗原	2575	HE4		
腫瘍マーカー検査	2751	プロステートヘルスインデックス(Phi)	1805	CEA	2544	CA602		
					2551	CA54/61		
					1292	CA72-4		
	2805	S2,3PSA			1355	STN		
					1567	CA19-9		
					1797	AFP		
	コードNo.	悪性中皮腫	コードNo.	非ホジキンリンパ腫	コードNo.	成人T細胞性白血病	■各属別腫瘍マーカー	
	2519	可溶性メソリン関連ペプチド	1914	可溶性IL-2R (sIL-2R)	1914	可溶性IL-2R (sIL-2R)	赤字 特に有効性が高い 青字 有効性が高い 黒字 有効性が認められる	
							※上記に掲げる項目の保険算定は腫瘍マーカー包括規定が適用されます	
							腫瘍マーカー包括点数 2項目 230点 3項目 290点 4項目以上 396点	

腫瘍マーカー

- ・遊離型PSA比 (PSA F/T比)
 - ・PSAは血液中に単独 (freePSA) とタンパクと結合 (complexPSA) した2つの形で存在しており、合わせたものをPSA (totalPSA) として測定
 - ・freePSAは前立腺肥大では上昇するためF/T比は上昇、逆に前立腺癌では相対的に低下するのでF/T比が減少する
 - ・F/Tが26.0%以下の場合前立腺癌の疑い大
- ・プロステートヘルスインデックス (phi)
 - ・PSAに7つのアミノ酸が結合しているPSA前駆物質 (proPSA) を測定
 - ・proPSAは結合しているアミノ酸が段階的に活性型PSAへの変換されるが癌組織内ではPSA変換が阻害されproPSAが癌組織中に蓄積する
 - ・特にproPSAとしての最終型の [-2] proPSAが癌組織内に増加し、血液中にも増加する
 - ・[-2] proPSAを測定し次の式で計算 prostate health index $[\phi] = ([-2] \text{ proPSA/freePSA}) \times \sqrt{\text{PSA}}$
 - ・基準値27.2未満 (カットオフ値による検出感度は次ページ参照)
 - ・F/T比より効率よく前立腺癌を検出
- ・PSAレクチン結合分画比 (S2, 3PSA%)
 - ・PSAは糖タンパク質であり正常由来と癌由来では糖鎖構造が異なる
 - ・健康者や前立腺肥大症などの良性疾患ではPSAの糖鎖末端はシアル酸 α 2,6ガラクトース構造が多く、前立腺癌患者では糖鎖構造が変異し、PSAの糖鎖末端はシアル酸 α 2,3ガラクトース構造が増加する
 - ・非癌型PSA (S2, 6PSA%) と癌型PSA (S2, 3PSA%) の総和に占める癌型PSA (S2, 3PSA%) の割合を調べる
 - ・基準値38.0%未満
 - ・前立腺癌と前立腺肥大症との鑑別において有用

○算定上の注意

- ・前立腺特異抗原 (PSA)
 - ・検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回限り、3回を限度として算定できる。(2回以上の算定にあたっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記入。)
- ・遊離型PSA比 (PSA F/T比)
 - ・診療及び他の検査 (PSA等) から前立腺癌であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
- ・プロステートヘルスインデックス (phi)
 - ・ア 診療及び他の検査 (前立腺特異抗原 (PSA) 等) の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者であって、以下の (イ) ~ (ハ) のいずれかに該当する者に対して、CLEIA法により、前立腺特異抗原 (PSA)、遊離型PSA及び [-2] proPSAを測定し、プロステートヘルスインデックス (phi) を算出した場合に限り算定する。
 - ・ (イ) 前立腺特異抗原 (PSA) 値が4.0ng/mL以上かつ10.0ng/mL以下
 - ・ (ロ) 50歳以上65歳未満であって、前立腺特異抗原 (PSA) 値が3.0ng/mL以上かつ10.0ng/mL以下
 - ・ (ハ) 65歳以上70歳未満であって、前立腺特異抗原 (PSA) 値が3.0ng/mL以上かつ10.0ng/mL以下
 - ・イ アに該当する患者に対して、前立腺癌の診断の確定または転帰の決定までの間に、原則として1回を限度として算定する。ただし、前立腺針生検等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回限り、3回を限度として算定できる。
 - ・ウ 前立腺特異抗原 (PSA) を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
 - ・エ 遊離型PSA比 (PSA F/T比)、PSAレクチン結合分画比 (S2, 3PSA%) を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
 - ・オ 本検査を算定する場合は、診療報酬明細書の適応欄のその必要性を記載すること。
- ・PSAレクチン結合分画比 (S2, 3PSA%)
 - ・前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立腺特異抗原 (PSA) の結果が4.0ng/mL以上10.0ng/mL以下である者に対して、LAB法 (定量) により、本検査を測定した場合に限り算定する
 - ・前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限度として算定する。ただし、前立腺針生検等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
 - ・前立腺特異抗原 (PSA)、遊離型PSA比 (PSA F/T比) またはプロステートヘルスインデックス (phi) を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
 - ・診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原 (PSA) の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。

Phiの段階別カットオフ値による前立腺癌検出度及び特異度

カットオフ	感度	特異度	カットオフ	感度	特異度	カットオフ	感度	特異度	カットオフ	感度	特異度
24.8	95%	26.2%	36.6	70.0%	65.5%	46.9	45%	89.3%	60.5	20%	97.6%
27.2	90%	33.3%	38.8	65.0%	73.8%	48.6	40%	91.7%	69.8	15%	98.8%
29.7	85%	44.0%	40.2	60.0%	78.0%	51.9	35%	91.7%	76.5	10%	99.4%
32.1	80%	50.6%	42.4	55.5%	83.3%	55.4	30%	95.2%	98.2	5%	100.0%
35.1	75%	58.9%	44.7	50.0%	86.9%	57.5	25%	95.8%			

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
血漿 蛋白	202 5C070	CRP定量 C-反応性蛋白 5C0700000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集法	0.00～0.30 mg/dL	免疫 16	1～2	*1	1
	1405 5C080	血清アミロイドA蛋白 SAA 5C0800000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集法	3.0以下 mg/L	生化Ⅱ 47	3～5	*1	3
	1586 5C010	トランスサイレチン プレアルブミン 5C0100000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	22.0～40.0 mg/dL	免疫 101	3～5		3
	1645 5C020	α1アンチトリプシン 5C0200000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.25(冷蔵)	ネフェロメ リー法	94～150 mg/dL	血液 80	3～5		3
	1395 5C025	α1酸性糖蛋白 α1-アシッドグロブリン 5C0250000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ネフェロメ リー法	42～93 mg/dL		3～4		3
	1584 5C030	レチノール結合蛋白 RBP 5C0300000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集比濁法	M: 2.7～6.0 F: 1.9～4.6 mg/dL	免疫 129	3～4		3
	1657 5C035	α2マクログロブリン 5C0350000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ネフェロメ リー法	M: 100～200 F: 130～250 mg/dL	血液 138	3～5		3
	1393 5C041	ハプトグロビン型判定あり 5C0410000023235	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ポリアクリルアミドゲル薄層泳動法	1-1型 2-1型 2-2型 pg/mL	免疫 129	5～23		3
	1655 5C045	セルロプラスミン 5C0450000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ネフェロメ リー法	21～37 mg/dL	免疫 90	3～5		3
	1649 5C060	トランスフェリン Tf 5C0600000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	190～320 mg/dL	免疫 60	3～5		3
	1775 5C060	トランスフェリン(尿) 尿中マイクロトランスフェリン 5C0600000003062	5 尿スビッツ	尿 1(冷蔵)	ラテックス凝集法	0.9以下 mg/g・Cre	尿便 98	3～5		3
	2597 5C134	尿中Ⅳ型コラーゲン 5C1340000006023	備考参照 尿4型コラーゲン専用	早期第一尿 5(冷蔵)	EIA法	40歳以上: 4.9以下 30歳代: 4.0以下 μg/g・Cre	生化Ⅱ 179	4～9	採取量 4～6mL	3
	2455 5C100	尿中L型脂肪酸結合蛋白 L-FABP 5C1000000001023	5 尿スビッツ	尿 2(冷蔵)	ラテックス凝集法	8.4以下 μg/g・Cre	尿便 210	3～5		3

*1 血清アミロイドとCRP あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
血漿 蛋白	1884 5C015	α 1 マイクログロブリン α 1 MG 5C0150000023062	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (冷蔵)	ラテックス凝 集法	9.7～19.9 mg/L	免疫 129	3～5		3
	1885 5C015	α 1 マイクログロブリン (尿) 尿中 α 1 MG 5C0150000001062	5 尿スπιツツ	尿 1 (冷蔵)	ラテックス凝 集法	0.8～14.1 mg/L	生化Ⅱ 132	3～5		3
	1754 5C065	β 2-マイクログロブリン β 2 MG 5C0650000023062	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (冷蔵)	ラテックス凝 集法	0.9～2.0 mg/L	免疫 98	3～5		3
	1755 5C065	β 2 MG (尿) 尿中 β 2 MG 5C0650000001062	5 尿スπιツツ	尿 1 (冷蔵)	ラテックス凝 集法	289以下 μ g/L	免疫 98	3～5		3
	1493 5C093	心筋トロポニンT TNT 5C0930000023053	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (凍結)	ECLIA法	0.014以下 ng/mL	生化Ⅰ 109	3～5	急性心筋梗塞診断のカットオフ 値0.100ng/mL * 1	3
	1830 5C093	心筋トロポニンT定性 5C0930000023053	2 血球容器 (紫)	EDTA加血液 0.3 (室温)	免疫クロマトグ ラフィー法	(-)	生化Ⅰ 112	1～2	採血後室温 8 時間以内に検査	1
	1296 5C092	心室筋ミオシン軽鎖1 5C0920000023021	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (冷蔵)	EIA法	2.5以下 ng/mL	生化Ⅰ 184	3～5	* 2	4
	1860 5C090	ミオグロビン 5C0900000023051	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (冷蔵)	CLIA法	60以下 ng/mL	生化Ⅱ 131	3～5		3
	1861 5C090	ミオグロビン (尿) 5C0900000001052	25 尿中ミオグロ ビン用	尿 2 (冷蔵)	CLEIA法	2.0未満 ng/mL	生化Ⅱ 131	3～5		3
	1801 5C130	P-Ⅲ-P プロラーゲン-Ⅲ-ペプチド 5C1300000023006	1 全血容器 (茶)	血清 0.3 (冷蔵)	IRMA法 (RIA・ 固相法)	1.0以下 U/mL	生化Ⅰ 136	3～5		3
	1823 5C135	Ⅳ型コラーゲン7S 5C1350000023052	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (冷蔵)	CLEIA法	4.4以下 ng/mL	生化Ⅰ 148	3～5		3
	1849 5C134	Ⅳ型コラーゲン 5C1340000023062	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (冷蔵)	ラテックス凝 集法	140以下 ng/mL	生化Ⅰ 131	3～5		3
	2500 5C141	M2BPGi Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体 5C1410000023052	1 全血容器 (茶)	血清 0.3 (冷蔵)	CLEIA法	0.84未満 AU/mL	生化Ⅰ 194	3～5	* 3	3
	2601 5C240	オートタキシン 5C2400000023023	1 全血容器 (茶)	血清 0.5 (冷蔵)	EIA法	M: 0.388～0.912 F: 0.450～1.280 mg/L	生化Ⅰ 194	3～5	* 3	3

* 1 心筋トロポニンTと心筋トロポニンI あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

* 2 心室筋ミオシン軽鎖 同一日に2回以上行った場合は1回のみ算定する。

* 3 M2BPGi オートタキシン 慢性肝炎又は肝硬変の患者 (疑われる患者を含む) に対して、肝臓の線維化進展の診断補助を目的に実施した場合が算定する。

M2BPGi オートタキシン P-Ⅲ-P、Ⅳ型コラーゲン、Ⅳ型コラーゲン7S、ヒアルロン酸 あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
骨代謝 関連	1302 5C123	NTx(尿) 1型コラーゲン架橋N-テロペプチド 5C1230000001052	5 尿スπιツツ	尿 3(冷蔵)	CLEIA法	下記参照 nM BCE/mM・CRE	生化Ⅱ 153	3~5	早期第2尿 骨吸収マーカー *1	3
	1340 5C146	尿中デオキシピリジノリン DPD 5C1460000001023	5 尿スπιツツ	尿 3(冷蔵)	EIA法	M: 2.1~5.4 F: 2.8~7.6 nM/mM・Cre	191	3~5	早期第2尿 骨吸収マーカー *1	3
	1370 3B072	骨型アルカリホスファターゼ BAP 3B0720000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.8(冷蔵)	ホリアクリルアミド ゲル電気泳動 法	M: 3.7~20.9 F: 閉経前 2.9~ 14.5 閉経後 3.8~ 22.6 μg/L	生化Ⅱ 161	3~5	骨形成マーカー *2	3
	2484 5C120	total P1NP 1型プロコラーゲン-N-プロペプチド 5C1200000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	ECLIA法	M: (30~83歳) 18.1~74.1 F: (閉経前30~44 歳) 16.8~70.1 (閉経後45~79 歳) 26.4~98.2 ng/mL	生化Ⅱ 160	3~5	骨形成マーカー	3
	2244 3B222	TRACP-5b 酒石酸抵抗性ホスファターゼ5b 3B2220000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	EIA法	M: 170~590 F (YAM): 120~420 mIU/dL	生化Ⅱ 156	3~5	骨吸収マーカー *2	3
	1239 5C124	1CTP 1型コラーゲン-C-テロペプチド 5C1240000023001	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	RIA2抗体法	骨転移マ ーカーと して 4.5未満 ng/mL		3~5		3

*1 **NTXとDPD** 原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針も選択時に1回、その後6ヵ月以内の薬剤降下判定時に1回限り、また薬剤治療方針を変更した時は変更後6ヵ月以内に1回に限り算定できる。ただし、NTX、DPD、オステオカルシンを併せて実施した場合はいずれか1つのみ算定する

*2 **TRACP-5b** 代謝性骨疾患及び骨転移（代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る）の診断補助として実施した場合に1回、その後6ヵ月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6ヵ月以内に1回限り算定できる。NTX、オステオカルシン、DPDを併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。なお乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために検査を行い、検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、区分番号「B 001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫

骨粗鬆症の診断および治療薬剤の選択時における骨代謝マーカーの測定


尿中NTXの判定基準		単位nM BCE/mM・Cre
①副甲状腺摘出の適応		200以上
②悪性腫瘍（乳癌、肺癌、前立腺癌）の骨転移の指標		100以上
③骨吸収亢進の指標		55以上

* BCEは骨コラーゲン相当量（Bone Collagen Equivalents）の単位

尿中NTXの骨粗鬆症に関する基準値		
M	40~59歳	13.0~66.2
F	閉経前30~44歳	9.3~54.3
	閉経後45~79歳	14.3~89.0

単位nM BCE/mM・Cre

骨粗鬆症薬剤治療の指標	尿中NTX	DPD
骨折高リスクの指標	54.3越	7.6越
骨量減少高リスクの指標	35.3以上	5.9以上

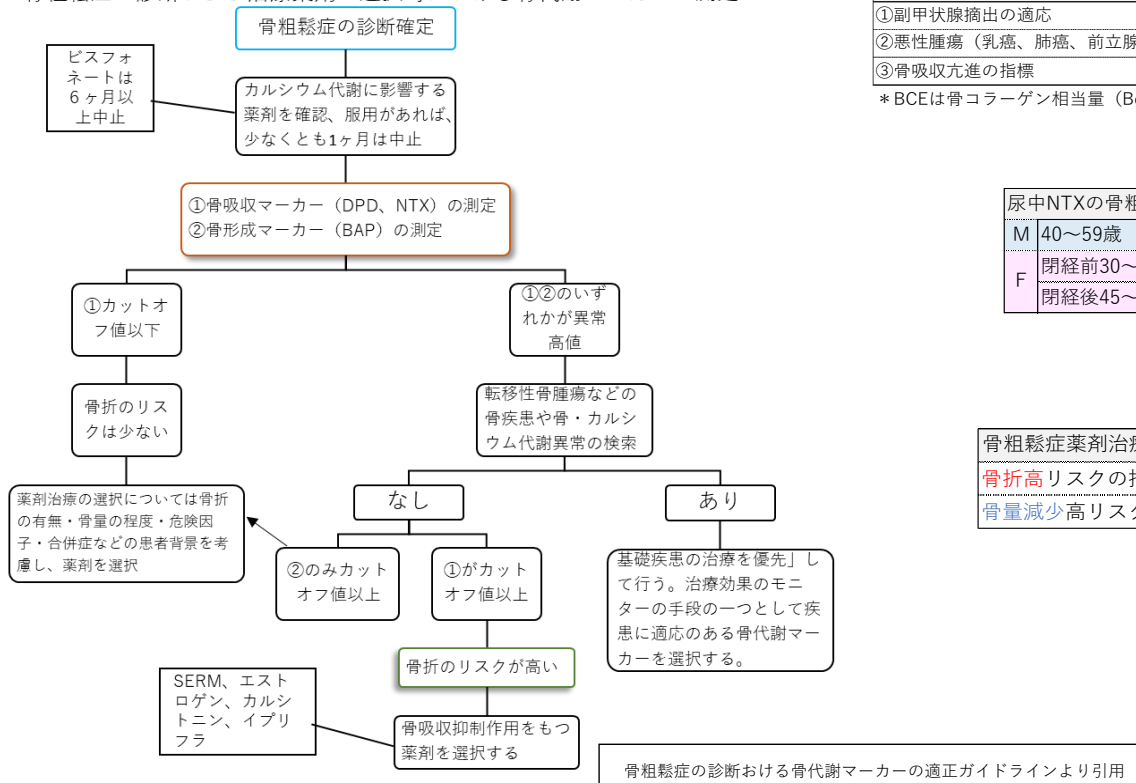

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
血漿 蛋白 ・ 免疫 グロ ブリン	1902 3F253	SP-D 肺サーファクタント蛋白D 3F2530000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	110未満 ng/mL	生化 I 136	3~5	* 1	3
	2220 3F250	SP-A 肺サーファクタント蛋白A 3F2500000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	43.8未満 ng/mL	生化 I 130	3~5	* 1	3
	1317 5C210	KL-6 5C2100000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス法	500未満 U/mL	生化 I 108	1~2	* 1	1
	2571 5C235	便中カルプロテクチン 5C2350000015023	27 糞便一般用	便 1(絶凍)	FEIA法	下記参照 mg/kg	尿便 270	3~5	* 2	3
	2702 5C245	LRG ロイシンリッチ α 2グロブリン 5C2450000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス免疫 比濁法	16.0未満 μ g/mL	生化 I 268	3~5	* 3	3
	1185 5B010	CH50 血清補体価 5B0100000023142	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	免疫溶血濁 度測定法	30~45 U/mL	免疫 38	3~5		3
	1697 5B023	C3 5B0230000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	80~140 mg/dL	免疫 70	3~5		3
	1698 5B024	C4 5B0240000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	11.0~34.0 mg/dL	免疫 70	3~5		3
	1195 5A010	IgG (免疫グロブリン) 5A0100000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	820~1740 mg/dL	免疫 38	3~5		3
	1196 5A015	IgA (免疫グロブリン) 5A0150000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	90~400 mg/dL	免疫 38	3~5		3
	1197 5A020	IgM (免疫グロブリン) 5A0200000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	31~200 mg/dL	免疫 38	3~5		3

* 1 SP-A、SP-D、KL-6 あわせて実施した場合は主たるもののみ算定心室筋ミオシン軽鎖 同一日に2回以上行った場合は1回のみ算定する。

* 2 便中カルプロテクチン

ア 慢性的な炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎やクローン病等）の診断補助を目的として、ELISA法、FEIA法イムノクロマト法又はLA法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法又はイムノクロマト法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、病態把握を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 慢性的な炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎やクローン病等）の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

* 3 LRG 潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定した場合に3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

カルプロテクチン（糞便）又は「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

○カルプロテクチン疾患別カットオフ値

炎症性腸疾患と機能性腸疾患とのカットオフ値：50.0mg/kg

潰瘍性大腸炎の内視鏡的な活動評価のカットオフ値：300.0mg/kg

クローン病の内視鏡的な活動評価のカットオフ値：80.0mg/kg

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
免疫グロブリン	1623 5A135	免疫電気泳動 免疫固定法によるM蛋白同定/IFE 5A1357002023085	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫固定電 気泳動法 (IFE法)	泳動像	免疫 224	3~5	陽性時はM蛋白型も含めて別紙に て報告します *1	3
	2510 5A141	免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比 5A1410000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	遊離L鎖κ: 3.3~19.4 遊離L鎖λ: 5.7~28.3 κ/λ比: 0.26~1.65 mg/L	免疫 388	3~5	*1	3
	1771 5A145	尿中免疫電気泳動 B-J蛋白同定 5A1450000001081	5 尿スπιツ	尿 2(冷蔵)	免疫固定電 気泳動法 (IFE法)	泳動像	免疫 201	3~5	陽性時はM蛋白型も含めて別紙に て報告します	3
	2215 5A150	オリゴクローナルバンド 等電点電気泳動法 5A1500000098236	1・5 全血容器(茶) 尿スπιツ	血清・髄液 0.5(血清) 0.5(髄液)(冷 蔵)	等電点電気 泳動法	陽性: バンド数0~1	尿便 522	3~5	血清と髄液はペアで提出くださ い 報告されるバンド数1本とは、髄液 中のみ検出されるバンドです	3
	1200 5A120	IgGインデックス 5A1200000098063	1・5 全血容器(茶) 尿スπιツ	血清・髄液 0.5(血清) 0.5(髄液)(冷 蔵)	免疫比濁法・ 比色法	インデックス 0.73以下	免疫 390	3~6	血清と髄液はペアで提出くださ い	3
	2676 5A055	IgG1/TIA IgGサブクラス 5A0550000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	351~962 mg/dL	未保点 未保点	3~5		3
	2677 5A056	IgG2/TIA IgGサブクラス 5A0560000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	239~838 mg/dL		3~5	原発性免疫不全等を疑う場合に 算定できます	3
	2678 5A057	IgG3/TIA IgGサブクラス 5A0570000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	9~140 mg/dL	未保点 未保点	3~5		3
	2292 5A058	IgG4/LA IgGサブクラス 5A0580000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集比濁法	11~121 mg/dL		3~5		3
	1633 5A160	クリオグロブリン定性 5A1600000023920	1 全血容器(茶)	血清 2(冷蔵)	寒冷沈殿法	(-)	免疫 42	4~6	採血から血清分離は37℃保温状 態で行ってください	3

*1 免疫電気泳動及びM蛋白 同一検体につき1回に限り算定する。併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
アレルギー 関連	1199 5A090	IgE 非特異的IgE 5A0900000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	170以下 IU/mL	免疫 100	3~5	年齢別参考基準値は31Pを参照く ださい	5
		特異的IgE CAPシングルアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 1種につき 0.3(冷蔵)	FEIA法	0.34以下 UA/mL	免疫 1項目110 1430まで	3~5	30P参照	5
		特異的IgE CAPマルチアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	0.34以下 UA/mL	免疫 1項目110 1430まで	3~5	31P参照	5
	4408 5A100	Ara h 2(ピーナッツ由来) ピーナッツ由来アレルゲンコンポーネント 5A1002500023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	0.34以下 UA/mL	免疫 110	3~5		5
	1298 5A100	CAP-ファディアトープ ファディアトープ 5A1002820023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-)	免疫 194	3~5		5
	2528 5A100	MAST36 5A1002807023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	MASTクラス0 1.39以下 LC(ルミカウント)	免疫 1430	3~5	31P参照	5
	2527 5A100	View39 5A1002806023023	1 全血容器(茶)	血清 0.9(冷蔵)	FEIA法	1.39以下 インデックス値	免疫 1430	3~5	31P参照	5
		鼻炎・喘息16 CAPアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 1.5(冷蔵)	FEIA法	各アレルゲ ン0.34以下 UA/mL	免疫 1430	3~5	31P参照	5
		成人喘息16 CAPアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 1.5(冷蔵)	FEIA法	各アレルゲ ン0.34以下 UA/mL	免疫 1430	3~5	31P参照	5
		小児アレルギー16 CAPアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 1.5(冷蔵)	FEIA法	各アレルゲ ン0.34以下 UA/mL	免疫 1430	3~5	31P参照	5
		成人アトピー16 CAPアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 1.5(冷蔵)	FEIA法	各アレルゲ ン0.34以下 UA/mL	免疫 1430	3~5	31P参照	5
		食物アレルギー16 CAPアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 1.5(冷蔵)	FEIA法	各アレルゲ ン0.34以下 UA/mL	免疫 1430	3~5	31P参照	5
		PFAS16 CAPアレルゲン	1 全血容器(茶)	血清 1.5(冷蔵)	FEIA法	各アレルゲ ン0.34以下 UA/mL	免疫 1430	3~5	31P参照	5
	2710 5A110	特異的IgG 鳥 5A1102331023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	FEIA法	(-) セキセイイン コ:8.00未満 ハト:24.00未満 mgA/L	免疫 873	3~5		3
	4501 5J228	TARC 5J2280000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLEIA法	下記参照 pg/mL	免疫 179	3~5		5

TARC基準値		
小児	6~12ヶ月	1367未満
	1~2歳	998未満
	2歳以上	743未満
成人		450未満

免疫学検査

■特異的IgE(CAP-アレルギー)のAllergen種類

コードNo.	略号	アレルゲン名
イネ科植物花粉		
4169	g3	かがや
4167	g1	はるがや
4172	g6	おおあわがえり
4168	g2	ぎょうぎしば
4174	g8	ながはぐさ
4182	g16	おおすずめのてっぽう
4170	g4	ひろはうしのけぐさ
4171	g5	ほそむぎ
4173	g7	あし
4175	g9	こめかくさ(属)
4176	g10	せいばんもちこし
4181	g15	小麦(属)[花粉]
4183	g17	すずめのひえ(属)
雑草花粉		
4184	w1	ぶたくさ
4189	w6	よもぎ
4203	w22	カナムグラ
4195	w12	あきのきりんそう
4191	w8	たんぽぽ(属)
4185	w22	ぶたくさもとき
4186	w3	おおぶたくさ
4188	w5	にがよもぎ
4190	w7	ふらんすぎく
4192	w9	へらおおばこ
4193	w10	しろぎ
4200	w18	ひめすいば
4202	w20	いらくさ(属)
樹木花粉		
4161	t17	すぎ
4166	t24	ヒノキ
4147	t2	はんのき(属)
4148	t3	しらかんば(属)
4151	t6	びやくしん(属)
4160	t16	まつ(属)
4146	t1	かえで(属)
4150	t5	ぶな(属)
4152	t7	ごなら(属)
4153	t8	にれ(属)
4154	t9	オリーブ
4155	t10	くるみ(属)[花粉]
4157	t12	やなぎ(属)
4163	t19	アカシア(属)
4165	t70	くわ(属)
ダニ		
4103	d1	ヤケヒョウヒダニ
4104	d2	コナヒョウヒダニ
4105	d70	アシトコナダニ
4106	d71	サヤアシニクダニ
4107	d72	ケナガコナダニ
室内塵		
4101	h1	ハウスダスト1
4102	h2	ハウスダスト2
真菌(カビ)／細菌		
4132	m5	カンジダ
4341	m227	馬拉セチア(属)
4246	f45	ビール酵母
4128	m1	ペニシリウム

コードNo.	略号	アレルゲン名
真菌(カビ)／細菌		
4129	m2	クラドスポリウム
4130	m3	アスペルギルス
	m218	Asp f 1(アスペルギルス)
4131	m4	ムコール
4133	m6	アルテルナリア
4135	m8	ヘルミントスボリウム
4145	m205	トリコフィトン[白癬菌]
4209	m80	黄色ブドウ球菌A
4282	m81	黄色ブドウ球菌B
昆虫		
4206	i8	ガ
4207	i6	ゴキブリ
4205	i7	ユスリカ(成虫)
4208	i71	ヤブカ(属)
4204	i1	ミツバチ
4210	i3	スズメバチ
4211	i4	アシナガバチ
動物上皮		
4108	e1	ネコ皮膚
4112	e5	イヌ皮膚
4123	e84	ハムスター上皮
4113	e6	モルモット上皮
4121	e82	家兎上皮
4126	e87	ラット
4127	e88	マウス
4117	e78	セキセイインコ羽毛
4116	e77	セキセイインコのふん
4124	e85	ニワトリ羽毛
4115	e70	ガチョウ羽毛
4125	e86	アヒル羽毛
4110	e3	ウマ皮膚
4111	e4	ウシ皮膚
4119	e80	ヤギ上皮
4120	e81	羊上皮
4122	e83	豚上皮
寄生虫		
4214	p4	アニサキス
4212	p1	カイチュウ
職業性		
4332	k80	ホルマリン
4281	k82	ラテックス
4409	k220	Hev b 6.02(ラテックス由来)
4273	k72	オオバコ種子
4286	k75	イソシアネートTDI
4277	k76	イソシアネートMDI
4278	k77	イソシアネートHDI
4279	k78	エチレンオキサイド
4280	k79	無水フタル酸
薬物		
4295	c73	ヒトインシュリン
4296	c74	ゼラチン
その他		
4297	o1	綿

コードNo.	略号	アレルゲン名
卵		
4215	f1	卵白
4250	f75	卵黄
4331	f233	オボムコイド[卵白由来]
牛乳		
4216	f2	ミルク
4256	f81	チーズ
4253	f78	カゼイン(牛乳由来)
4251	f76	α-ラクトアルブミン(牛乳由来)
4252	f77	β-ラクトグロブリン(牛乳由来)
4266	f82	モールドチーズ
魚／魚卵		
4272	f50	サバ
4274	f60	アジ
4290	f61	イワシ
4243	f40	まぐろ
4244	f41	さけ
4217	f3	たら
4294	f254	カレイ
4336	f349	イクラ
4337	f350	たらこ
甲殻類／軟体動物		
4233	f23	カニ
4234	f24	エビ
4255	f80	ロブスター
4288	f58	イカ
4289	f59	タコ
4333	f207	アサリ
4334	f290	カキ(貝)
4335	f338	ホタテ
4242	f37	ムラサキガイ[ムール貝]
穀類(小麦)		
4218	f4	小麦[食物]
4406	f416	ω-5グリアジン(小麦由来)
4254	f79	グルテン
穀類		
4223	f9	米
4225	f11	そば
4219	f5	ライ麦
4220	f6	大麦
4221	f7	オート麦
4222	f8	とうもろこし
4285	f55	キビ
4286	f56	アワ
4264	f90	麦芽
肉		
4236	f26	豚肉
4237	f27	牛肉
4257	f83	鶏肉
4262	f88	羊肉
豆類／ナッツ		
4228	f14	大豆
4410	f353	Gly m 4(大豆由来)
4227	f13	ピーナッツ
4408	f423	Ara h 2(ピーナッツ由来)
4311	f256	クルミ[食物]
4411	f441	Jug r 1(クルミ由来)
4407	f202	カシューナッツ
4412	f443	Ana o 3(カシューナッツ由来)
4230	f17	はしはみ[ハーゼルナッツ]

コードNo.	略号	アレルゲン名
豆類／ナッツ		
4268	f93	カカオ
4226	f12	えんどう
4229	f15	いんげん
4231	f18	ブラジルナッツ
4232	f20	アーモンド
4241	f36	ココナッツ
果物		
4249	f49	リンゴ
4267	f92	バナナ
4239	f33	オレンジ
4270	f95	モモ
4258	f84	スイウ
4339	f329	いしか
4245	f44	いちご
4261	f87	メロン
4271	f96	アボカド
4291	f209	グレープフルーツ
4265	f91	マンゴ
4269	f94	洋なし
野菜		
4338	f97	ヤマイモ
4235	f25	トマト
4238	f31	にんじん
4240	f35	じゃがいも
4292	f214	ホウレンソウ
4248	f48	たまねぎ
4247	f47	にんにく
4283	f51	タケノコ
4293	f225	カボチャ
4284	f54	サツマイモ
4259	f85	セロリ
4260	f86	パセリ
その他		
4224	f10	ごま
4263	f89	マスタード
4296	c74	ゼラチン
4246	f45	ビール酵母

アレルゲンコンポーネント		
4412	f443	Ana o 3(カシューナッツ由来)
4408	f423	Ara h 2(ピーナッツ由来)
4410	f353	Gly m 4(大豆由来)
4411	f441	Jug r 1(クルミ由来)
4251	f76	α-ラクトアルブミン(牛乳由来)
4252	f77	β-ラクトグロブリン(牛乳由来)
4406	f416	ω-5グリアジン(小麦由来)
4331	f233	オボムコイド[卵白由来]
4409	k220	Hev b 6.02(ラテックス由来)
4413	m218	Asp f 1(アスペルギルス)

■アレルギーセッー覧表

2527 VIEW39

吸入系抗原		食餌系抗原	
ヤケヒョウヒダニ	かもがや	卵白	カニ
ハウスダスト1	おおあわがえり	オボムコイド	キウイ
ネコ皮膚	ぶたくさ	ミルク	リンゴ
イヌ皮膚	よもぎ	小麦	バナナ
ゴキブリ	アルテルナリア	大豆	鶏肉
ガ	アスベルギルス	そば	牛肉
すぎ	カンジダ	ビーナッツ	豚肉
ヒノキ	マラセチア(属)	米	まぐろ
はんのき(属)	ラテックス	ごま	さけ
しらかんば(属)		エビ	サバ

●VIEW39 (判定基準)

判定	クラス	インデックス値
陰性	0	0.27未満
偽陽性	1	0.27以上 0.50未満
陽性	2	0.50以上 1.80未満
	3	1.80以上 7.05未満
	4	7.05以上 17.35未満
	5	17.35以上 29.31未満
	6	29.31以上

CAPアレルギー 16種セット

鼻炎・喘息16	成人喘息16	小児アレルギー16	成人アトピー16	食物アレルギー16	PFAS16	食餌系	吸入系
ハウスダスト1	ヤケヒョウヒダニ	ヤケヒョウヒダニ	ヤケヒョウヒダニ	卵白	はんのき	ハウスダスト2	ハウスダスト2
ヤケヒョウヒダニ	すぎ	すぎ	すぎ	オボムコイド	しらかんば	コナヒョウヒダニ	コナヒョウヒダニ
すぎ	かもがや	ネコ皮膚	ネコ皮膚	ミルク	すぎ	すぎ	卵白
ヒノキ	ぶたくさ	イヌ皮膚	イヌ皮膚	小麦	ヒノキ	ネコ皮膚	大豆
はんのき	よもぎ	ゴキブリ	カンジダ	大豆	かもがや	卵白	ぶたくさ
かもがや	アスベルギルス	卵白	マラセチア(属)	そば	ぶたくさ	ミルク	よもぎ
ぶたくさ	アルテルナリア	オボムコイド	黄色ブドウ球菌B	ビーナッツ	よもぎ	チーズ	おおあわがえり
よもぎ	カンジダ	ミルク	ガ	イクラ	リンゴ	牛肉	はるがや
ネコ皮膚	クラドスポリウム	小麦	小麦	まぐろ	モモ	鶏肉	すぎ
イヌ皮膚	ベニシリウム	大豆	大豆	エビ	Gly m 4(大豆由来)	エビ	ベニシリウム
カンジダ	ムコール	そば	そば	カニ	トマト	カニ	クラドスポリウム
アスベルギルス	トリコフィトン	ビーナッツ	ビーナッツ	キウイ	メロン	まぐろ	カンジダ
アルテルナリア	ネコ皮膚	イクラ	エビ	バナナ	スイカ	さけ	アルテルナリア
ガ	イヌ皮膚	まぐろ	カニ	リンゴ	キウイ	小麦	アスベルギルス
ユスリカ	ゴキブリ	エビ	イワシ	クルミ	セロリ	米	ネコ皮膚
ゴキブリ	ガ	カニ	サバ	ごま	にんじん	大豆	イヌ皮膚

CAPスクリーニングセット

通年	通年性
ヤケヒョウヒダニ	ヤケヒョウヒダニ
すぎ	ハウスダスト1
イネ科※	すぎ
雑草※	かもがや
カビ※	ぶたくさ
動物上皮※	よもぎ
食物※	はんのき
穀物※	しらかんば
	カンジダ
	アルテルナリア

※はCAPマルチアレルゲン

CAPマルチアレルゲン※混合アレルゲンを用いた検査のため、アレルゲン毎の判定結果は出ない

4300 イネ科	4301 雑草	4302 食物	4303 穀物	4299 動物上皮	4298 カビ
はるがや	ぶたくさ	卵白	小麦	ネコ皮膚	ベニシリウム
ぎょうぎしば	よもぎ	ミルク	とうもろこし	イヌ皮膚	クラドスポリウム
かもがや	ふらんすぎく	小麦	ごま	モルモット上皮	アスベルギルス
おおあわがえり	たんぽぽ(属)	ビーナッツ	そば	ラット	カンジダ
あし	あきのきりんそう	大豆	米	マウス	アルテルナリア
					ヘルミントスポリウム

アトピー鑑別試験 (ファディアートープ)

ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮膚、イヌ皮膚、ぎょうぎしば、かもがや、ぶたくさ、よもぎ、しらかんば(属)、すぎ、カンジダ、アルテルナリア

●特異的IgE CAPマルチアレルゲン (判定基準)

●特異的IgE CAPシングルアレルゲン (判定基準)

判定	クラス	UA/mL
陰性	0	0.34以下
偽陽性	1	0.35～0.69
陽性	2	0.70～3.49
	3	3.50～17.49
	4	17.50～49.99
	5	50.00～99.99
	6	100以上

●特異的IgE Ara h 2 (判定基準)

判定	UA/mL
(-)	0.34以下
(±)	0.35～3.99
(+)	4.00以上

●非特異的IgE 年齢別参考基準値

(単位: IU/mL)

年齢(歳)	平均値±1SD
1未満	1.36～19.32
1～3	5.24～29.99
4～6	5.19～111.94
7～9	13.12～141.91
10～12	11.09～171.79
13～18	24.72～126.77
19以上	27.54～138.34

2528 MAST36

イネ科植物花粉	オオアワガエリ、カモガヤ
雑草花粉	ブタクサ混合物1、ヨモギ
樹木花粉	スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ
室内塵、ダニ	コナヒョウヒダニ、ハウスダスト1
真菌類(カビ)	カンジダ、アルテルナリア、アスベルギルス
動物上皮	ネコ皮膚、イヌ皮膚
食餌系	小麦、大豆、米、マグロ、サケ、エビ、カニ、ミルク、牛肉、豚肉、鶏肉、卵白、オボムコイド、ソバ、ビーナッツ、ゴマ、キウイ、バナナ、モモ、トマト
その他	ラテックス

●MAST36 (判断基準)

付録10-1 汚染度判定基準表		
クラス	LC (ミルカウント)	判定
0	0～1.39	陽性
1	1.40～2.77	偽陽性
2	2.78～13.4	陽性
3	13.5～58.0	
4	58.1～119	
5	120～159	
6	160以上	

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
血液型 関連	1311 5H010	ABO式血液型 5H0100000019101	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	赤血球凝集法	A. B. O. AB 型	免疫 39	1~2		1
	1312 5H020	Rh式血液型 5H0200000019101	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	赤血球凝集法	(-)/(+)	免疫 39	1~2		1
	1628 5H180	不規則性抗体スクリーニング 5H1800000098101	56 EDTA 2 N a管	EDTA加血液 5(冷蔵)	クームス法 酵素法	(-)	免疫 174	1~2	* 1	1
	2217 5H180	不規則性抗体同定検査 5H1800000098101	1・6 全血容器(茶) EDTA加血液	0.5(血清) 5(EDTA加血液) (冷蔵)	カラム凝集法 クームス法 酵素法		免疫 174	3~5	* 1	3
	1316 5H121	直接クームス試験 5H1210000018101	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(室温)	試験管法	(-)	免疫 34	1~2		1
	1319 5H122	間接クームス試験 5H1220000018101	35 ブレイン管	EDTA加血液 5(冷蔵)	カラム凝集法	(-)	免疫 47	3~5	単独検体	3
	1469	HLA-A 遺伝子型 HLA-A-PCR 5K1160000019899	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	2564	HLA-B 遺伝子型 HLA-B PCR 5K1170000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 3(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	2768	HLA-C 遺伝子型 HLA-C-PCR 5K1180000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 3(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	1356	HLA-DRB1 遺伝子型 HLA-DRB1 PCR 5K1200000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	1358	HLA-DPB1 遺伝子型 HLA-DPB1 PCR 5K1210000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	2769	HLA-DQA1 遺伝子型 HLA-DQA1-PCR 5K1290000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 3(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	1357	HLA-DQB1 遺伝子型 HLA-DQB1 PCR 5K1300000019899	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3



*1 **不規則抗体** 輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、胸部手術、心・脈管手術、腹部手術又は子宮全摘術、子宮悪性腫瘍手術、子宮あ悪性腫瘍手術、子宮付属器悪性腫瘍手術（両側）、帝王切開術又は異所性妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。手術に際して輸血が行われた場合は、本検査実施料又はK920輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴がある患者又は妊娠歴のある患者のいずれかに該当するかを記載する。
輸血に伴って行った患者の不規則抗体検査の費用 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず 1月につき所定点数に197点を加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては1週間に1回限り、所定点数に197点加算する。

*2 **HLA DNAタイピングについて** 日本組織適合性学会ホームページにて最新情報をご確認ください。 <https://jshi.smoosy.atlas.jp/ja>

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
血液型 関連	1322 5G520	抗血小板抗体 5G5200000023103	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	混合受身凝 集法	(-)	免疫 261	4~7		3
	1470 5G525	血小板表面IgG PAIgG 5G5250000019021	23 血小板表面 I g G 用	ACD加血液 8.5(室温)	EIA法	27.6未満 ng/10 ⁷ PLT	免疫 190	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *1 容器NO23専用容器	3
	2474 5G530	HIT抗体 PF-4ヘパリン複合体 5G5300000022117	4 凝固容器(黒)	血漿 0.5(凍結)	ラテックス凝 集法	1.0未満 U/mL	免疫 390	4~7	単独検体 *2	3
	2501 5G530	HIT抗体IgG PF-4ヘパリン複合体IgG抗体 5G5300000022051	4 凝固容器(黒)	血漿 0.5(凍結)	CLIA法	1.00未満 U/mL	免疫 376	4~7	単独検体 *2	3
抗核 抗体	2525 5G010	抗核抗体(ANA)半定量 蛍光抗体法 5G0100000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	蛍光抗体法	40倍未満	免疫 99	3~5		6
	1939 5G010	抗核抗体(ANA) 5G0100000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	Ratio 1.00 以下	免疫 110	3~5		3

*1 PA-IgG 特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過観察の目的で行った場合に算定する。

*2 HIT抗体・HIT抗体 IgG ヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行った場合に算定する。一連の検査で同時に実施した場合は主たるもののみ算定する。

抗核抗体 染色型と自己抗体および関連疾患 (赤字は受託可能)

染色型	推定される抗体	関連疾患
Homogeneous型 (均質型)	抗DNA抗体	全身性エリテマトーデス
	抗ヒストン抗体	全身性エリテマトーデス 薬剤誘発性ループス
	抗DNP抗体	全身性エリテマトーデス 関節リウマチ、強皮症
Peripheral型 (辺縁型)	抗DNA抗体	全身性エリテマトーデス
Speckled (斑紋型)	抗RNP抗体	混合性結合組織病、強皮症 全身性エリテマトーデス
	抗Sm抗体	全身性エリテマトーデス
	抗SS-A抗体	シェーグレン症候群
	抗SS-B抗体	
	抗Scl-70抗体	強皮症
Nucleolar型 (核小体型)	抗U3RNP抗体	強皮症
	抗7-2RNP抗体	
	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	筋炎・強皮症重複症候群
	抗PM-scl抗体	
Centromere型 (散在斑紋型)	抗セントロメア抗体	CREST症候群
Granular型	抗Sp100抗体	原発性胆汁性胆管炎
	抗Sp140抗体	
	抗PML抗体	
	抗SUMO抗体	
	抗p80coilin抗体	
抗核膜型	抗ミラン抗体	自己免疫性肝炎
	抗gp210抗体	原発性胆汁性胆管炎
	抗p62抗体	慢性疲労症候群
PCNA型・PCNA様型	抗PCNA抗体	全身性エリテマトーデス
	抗Na抗体	

細胞質型 (赤字は受託可能)

推定される抗体	関連疾患
抗Jo-抗体	皮膚筋炎、多発性筋炎
抗ミトコンドリア抗体	自己免疫性肝炎 原発性胆汁性胆管炎
抗SRP抗体	多発性筋炎
抗アクチン抗体	自己免疫性肝炎
抗リボソーム抗体	全身性エリテマトーデス
抗ゴルジ抗体	関節リウマチ
	シェーグレン症候群
	全身性エリテマトーデス
抗紡錘体抗体	シェーグレン症候群 全身性エリテマトーデス
抗NuMA-1抗体	
抗NuMA-2抗体	
抗中心抗体	レイノー症候群
	強皮症

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
自己抗体	1701 5G020	抗DNA抗体定量 5G0200000023002	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	RIA法	6以下 IU/mL	免疫 159	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	1457 5G036	抗dsDNA—IgG抗体定量 5G0360000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 10.0未満 (±) 10.0以上、 15.0以下 (+) 15.0を超える U/mL	免疫 163	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	1118 5G026	抗ss—DNA抗体IgG定量 5G0260000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 159	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	2430 5G065	抗Sm抗体定量 抗SmDp抗体定量 5G0650000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 147	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	2743 5G066	抗RNP抗体/半定量 5G0660000023092	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	オクタロニー法	陰性 倍	免疫 144	3~5	主な対象疾患：SLE、混合性結合 組織病	4
	2431 5G066	抗RNP抗体定量 抗U1—RNP抗体定量 5G0660000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 3.5未満 (±) 3.5以上、 5.0以下 (+) 5.0を超える U/mL	免疫 144	3~5	主な対象疾患：SLE、混合性結合 組織病	3
	2432 5G076	抗SS—A/Ro抗体定量 5G0760000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 161	3~5	主な対象疾患：SLE、シェーグレン 症候群	3
	2433 5G077	抗SS—B/La抗体定量 5G0770000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 153	3~5	主な対象疾患：SLE、シェーグレン 症候群	3
	2434 5G085	抗Scl—70抗体定量 5G0850000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 157	3~5	主な対象疾患：強皮症	3
	2435 5G090	抗セントロメア抗体定量 抗CENP—B抗体定量 5G0900000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 173	3~5	主な対象疾患：強皮症、原発性胆汁 性肝硬変 * 1	3
	2436 5G120	抗Jo—1抗体定量 5G1200000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 140	3~4	主な対象疾患：多発性筋炎/皮膚筋 炎 * 2	3
	2479 5G121	抗ARS抗体 5G1210000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 25.0未 満 (+) 25.0以 上 インデックス値	免疫 190	3~5	主な対象疾患：多発性筋炎/皮膚筋 炎 検出対象：抗Jo-1抗体、抗PL-7抗 体、抗PL-12抗体、抗EJ抗体、抗KS抗 体 * 2	3
	2554 5G122	抗MDA5抗体 5G1220000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 32未満 (+) 32以上 インデックス値	免疫 275	3~6	主な対象疾患：皮膚筋炎 * 3	3
	2577 5G123	抗Mi-2抗体 5G1230000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA方	(-) 53未満 (+) 53以上 インデックス値	免疫 270	3~7	主な対象疾患：皮膚筋炎 * 3	3
	2562 5G124	抗TIF1— γ 抗体 5G1240000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 32未満 (+) 32以上 インデックス値	免疫 270	3~8	主な対象疾患：皮膚筋炎 * 3	3
	2332 5G087	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 5G0870000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 28.0未満 (±) 28.0以上、 50.0未満 (+) 50.0以上 インデックス値	免疫 166	3~8	主な対象疾患：強皮症 * 4	3

* 1 抗セントロメア抗体 原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合に限り算定できる。

* 2 抗ARS抗体、抗Jo-1抗体 併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。

* 3 抗MDA5抗体、抗Mi-2抗体、抗TIF1— γ 抗体 厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ELISA法により測定した場合に算定できる。

* 4 抗RNAポリメラーゼⅢ びまん性強皮症の確定診断を目的として行った場合に1回を限定として算定できる。また、腎グリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
リウマチ関連	1695 5G160	リウマチ因子定量 RF定量 5G1600000023117	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	ラテックス免疫比濁法	15未満 IU/mL	免疫 30	1~2	*1 *2	1
	1506 5G161	IgG型リウマチ因子 5G1610000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	ELISA法	2.0未満 インデックス値	免疫 198	3~5	*2 *3	3
	1496 5G167	抗CCP抗体 抗シトリン化ペプチド抗体定量 5G1670000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	EIA法	4.5未満 U/mL	免疫 193	1~2	*3	1
	1338 5G166	抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 CARF定量・Gal欠損IgG抗体定量 5G1660000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	ECLIA法	6.0未満 AU/mL	免疫 111	3~5	*1 *2 *3	3
	1756 3B503	MMP-3 マトリックスメタロプロティナーゼ-3 3B5030000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ラテックス凝集比濁法	M:36.9~121.0 F:17.3~59.7 ng/mL	免疫 116	1~2	*2 *3	1
	1124 5G635	モノクローナルRF結合免疫複合体 IC-mRF 5G6350000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	4.1以下 μg/mL	免疫 194	3~9	*2 *3	3
自己抗体	1786 5G175	抗ミトコンドリア抗体 AMA半定量 5G1750000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	20未満 倍	免疫 181	3~5	対象疾患：原発性胆汁性肝硬変	3
	1339 5G176	抗ミトコンドリアM2抗体 AMA-M2定量 5G1760000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	7.0未満 Index	免疫 189	3~4	対象疾患：原発性胆汁性肝硬変	3
	1766 5G555	抗LKM1抗体 抗肝腎ミクロソーム-1抗体 5G5550000019023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	17未満(-) Index	免疫 215	3~6	対象疾患：自己免疫性肝炎 判定基準 (一) 17.0未満 (±) 17.0以上~50.0未満 (+) 50.0以上	3
	1825 5G180	抗平滑筋抗体 ASMA 5G1800000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	20未満 倍		3~6	対象疾患：自己免疫性肝炎	3
	1240 5G185	抗胃壁細胞抗体 抗パリエタル細胞抗体 5G1850000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満 倍		3~6	対象疾患：萎縮性胃炎、悪性貧血	3
	2319 5G502	ループスアンチコアグラント (PL中和) LAC定量/RRVVTループス抗凝固因子 5G5020000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 1(凍結)	リン脂質中和法	1.16以下 (NRNormalized Ratio)	免疫 265	3~6	*4	6
	1315 5G501	ループスアンチコアグラント (蛇毒試験) LAC定量/PLI(NR)ループス抗凝固因子 5G5010000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.5(凍結)	希釈ラッセル蛇毒試験紙法	1.2以下 (NRNormalized Ratio)	免疫 265	3~6	*4	3

*1 (RF) 定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*2 (RF) 定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、1640 MMP-3、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子 3項目以上併せて実施した場合は主たるものを2つに限り算定する。

*3 抗CCP抗体 イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、結果が陰性の場合は3月に1回限り算定できる。なお、2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ロ) イ) とは別に関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者一人につき原則として1回限り算定する。ただし、当該検査陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ再度治療薬を選択する必要がある場合においては、3月に1回限り算定できる。なお、2回以上算定するに当たっては、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

抗CCP抗体、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、MMP-3、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子 2項目以上併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定できる。

*4 ループスアンチコアグラント蛇毒法、PL中和法 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として実施した場合に限り算定する。

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
自己抗体	1640 5G508	抗カルジオリピン抗体IgG 抗CL-IgG抗体 5G5080000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	12.3以下 U/mL	免疫 226	3~6	対象疾患：抗リン脂質抗体症候群 *1	3
	1641 5G510	抗カルジオリピン抗体IgM 抗CL-IgM抗体 5G5100000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	20.8以下 U/mL	免疫 226	3~6	対象疾患：抗リン脂質抗体症候群 *1	3
	5G519	抗β2グリコプロテインI抗体IgG 抗β2GP1IgG・抗β2GPI-IgG抗体 5G5190000022051	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLEIA法	20.0以下 U/mL	免疫 226	3~6	対象疾患：抗リン脂質抗体症候群 *1	3
	5G519	抗β2グリコプロテインI抗体IgM 抗β2GPI-IgM抗体 5G5190000022051	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLEIA法	20.0以下 U/mL	免疫 226	3~6	対象疾患：抗リン脂質抗体症候群 *1	3
	1374 5G504	抗カルジオリピンβ2GP1複合体抗体 抗CL-β2GPI複合体抗体 5G5040000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	EIA法	3.5未満 U/mL	免疫 223	3~6	対象疾患：SLE、関節リウマチ、抗リン脂質抗体症候群 *1	3
	1267 5G420	抗糸球体基底膜抗体 抗GBM抗体 5G4200000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-)7.0未満 (±)7.0以上~ 10.0以下 (+)10.0を超える U/mL	免疫 257	3~6	対象疾患：グッドパスチャー症候群、急速進行性腎炎 *2	3
	1917 5G551	PR3-ANCA(C-ANCA) 細胞質性好中球細胞質抗体価 (C-ANCA) 5G5510000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-)2.0未満 (±)2.0以上~3.0 以下 (+)3.0を超える IU/mL	免疫 250	3~6	対象疾患：多発血管炎性肉芽腫(ウェグナー肉芽腫症)	3
	1282 5G552	MPO-ANCA 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体 (P-ANCA) 5G5520000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-)0.35未満 (±)3.5以上~ 5.0以下 (+)5.0を超える IU/mL	免疫 250	3~6	対象疾患：半月体形成腎炎、巣状壊死性腎炎 *3	3
	1499 5G396	抗デスマグレ1抗体 5G3960000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLEIA法	20.0未満 U/mL	免疫 300	3~6	対象疾患：尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡 *4 *5 診断基準は次ページ参照	3
	1507 5G397	抗デスマグレ3抗体 5G3970000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLEIA法	20.0未満 U/mL	免疫 270	3~6	対象疾患：尋常性天疱瘡 *4 *6 診断基準は次ページ参照	3
	1936 5G398	抗BP180抗体 抗BP180NC16a抗体 5G3980000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLEIA法	9.0未満 U/mL	免疫 270	3~6	対象疾患：(水疱性)類天疱瘡 *4 *7	3
	1886 5G385	抗アセチルコリンレセプター抗体 抗AChR抗体 5G3850000023001	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	RIA・2抗体	0.3以下 nmol/L	免疫 775	4~7	対象疾患：重症筋無力症 *8 *9	3
	2481 5G386	抗MuSK抗体 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 5G3860000023007	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	RIA法	0.02未満 nmol/L	免疫 1000	4~7	対象疾患：重症筋無力症 *9	3
	2463 5G821	抗アクアポリン4抗体 抗AQP-4抗体 5G8210000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷凍)	EIA法	3.0未満 U/mL	免疫 1000	3~7	対象疾患：視神経脊髄炎 *10	3

*1 抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗β2グリコプロテインI IgG抗体、抗β2グリコプロテインI IgM抗体 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、ELISA法を用いて測定を行った場合に、各項目について一連の治療につき2回に限り算定する。なお、抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗β2グリコプロテインI IgG抗体、抗β2グリコプロテインI IgM抗体のいずれかと抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI 複合体抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。なお、抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗β2グリコプロテインI IgG抗体及び抗β2グリコプロテインI IgM抗体の4項目を併せて実施した場合は、主たるもの3つに限り算定する。

*2 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) 抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。

*3 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA) 急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。

*4 間接蛍光抗体法(IFA)による、抗デスマグレイン1抗体・抗デスマグレイン3抗体・抗BP180-NC16a抗体同時測定と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

*5 抗デスマグレイン1抗体 天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は「天疱瘡診断基準」(厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班)より天疱瘡が強く疑われる患者とする。落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と抗デスマグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

*6 抗デスマグレイン3抗体 天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は「天疱瘡診断基準」(厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班)により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と抗デスマグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

*7 BP180-NC16a抗体は、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。

*8 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

*9 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察を目的として測定した場合に算定できる。本検査と抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。


*10 抗アクアポリン4抗体 視神経脊髄炎の診断(治療効果判定を除く)を目的として測定した場合に算定できる。なお、検査の結果が陰性の場合に、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して再度実施した場合も算定できる。ただし、この場合、前回の検査実施日、再度検査する医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
梅毒検査	1260 5E074	RPR定性 5E0741351023117	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	ラテックス比濁法	(-)	免疫 15	1~2		1
	1251 5E074	RPR定量 5E0741352023117	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	ラテックス比濁法	1.0未満 R.U.	免疫 34	1~2		1
	1253 5E075	TP抗体定性 5E0751352023210	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLIA法	(-)	免疫 32	1~2		1
	1258 5E075	TP抗体定量 5E0751352023210	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLIA法	1.0未満 C.O.I	免疫 53	1~2		1

梅毒感染の経過

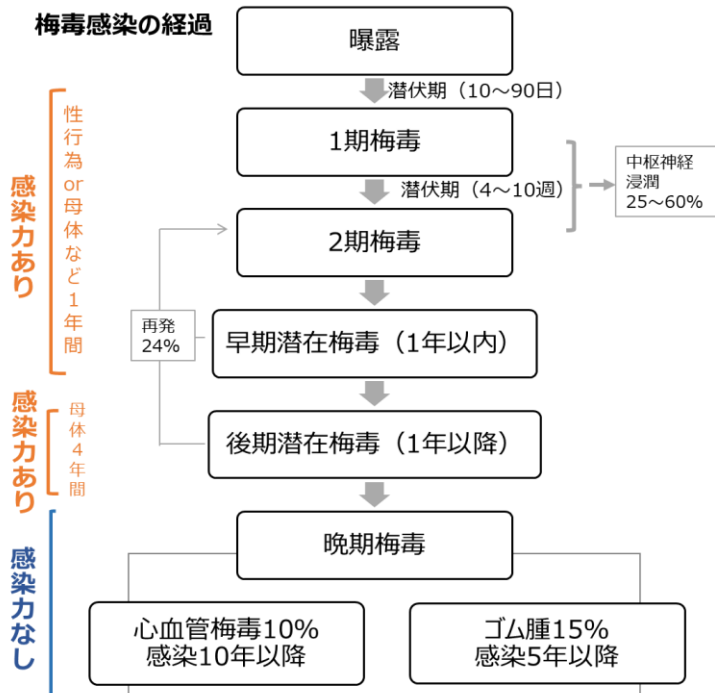

梅毒検査結果とその解釈

RPR	TP抗体	解釈
(-)	(-)	梅毒未罹患 感染直後の潜伏期間
(-)	(+)	梅毒治癒後 後期潜在梅毒 プロゾーン現象 1期梅毒の初期
(-)	(+)	生物学的偽陽性 (BFP)
(+)	(+)	梅毒 (治療・未治療)
(+)	(-)	生物学的偽陽性 (BFP) 梅毒初期

生物学的偽陽性 (BFP)
STS検査 (RPR) は組織中に存在する脂質抗原使用しているため梅毒に感染していなくても (+) となることがある (妊娠、抗リン脂質抗体症候群、感染性心内膜炎、伝染性単核症、麻疹、高齢者など)
力価が低値であることが多い
TP抗体でも認めることもある

抗デスモグレイン1抗体・抗デスモグレイン3抗体診断基準

血清学的診断	抗デスモグレイン1抗体	抗デスモグレイン3抗体
尋常性天疱瘡 (粘膜優位型)	-	+
尋常性天疱瘡 (粘膜皮膚型)	+	+
落葉状天疱瘡	-	-

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
STD・クラミド・フィラ感染症	2295 6B615	淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸検出 6B6150000001886	34 CT・淋菌 r t PCR	尿他 (冷蔵)	リアルタイム PCR法	クラミジアトラ コマチス： (-) 淋菌：(-)	微生物 262	4～6	材料：尿・うがい4.5～6.3mL ぬぐい（泌尿器、子宮頸部分泌液） ＊1	6
	1429 6B615	淋菌及びクラミジアトラコマチス/TMA 5E0210000099862	下記参照 CT・淋菌 T MA	尿他 (冷蔵)	TMA-HPA法	クラミジアトラ コマチス： (-) 淋菌：(-)	微生物 270	4～6	材料：尿・うがい4.5～6.3mL ぬぐい（泌尿器、子宮頸部分泌液） ＊1	4
	1127 6B615	クラミジア・トラコマチス核酸検出 5E0210000099862	34 CT・淋菌 r t PCR	尿他 (冷蔵)	リアルタイム PCR法	クラミジアトラ コマチス： (-)	微生物 188	4～6	材料：尿・うがい4.5～6.3mL ぬぐい（泌尿器、子宮頸部分泌液） ＊2	6
	1544 6B610	淋菌核酸同定-PCR 淋菌リアルタイムPCR(TaqManPCR) 6B6100000099862	34 CT・淋菌 r t PCR	尿他 (冷蔵)	リアルタイムPCR 法	(-)	微生物 198	4～6	材料：尿・うがい4.5～6.3mL ぬぐい（泌尿器、子宮頸部分泌液） ＊3	6
	2738 6B643	膣トリコモナス・マイコプラズマ・ジェニタリウム/PCR TV・MG/PCR 6B6430000058862	34 CT・淋菌 r t PCR	尿他 (室温)	リアルタイム PCR法	膣トリコモナス陰 性 マイコプラズマ・ ジェニタリウム陰 性	微生物 350	4～6	材料：尿・うがい4.5～6.3mL ぬぐい（泌尿器、子宮頸部分泌液） ＊4	6
	1120 5E020	クラミジアトラコマチス抗体IgA、 IgG抗体 5E0200000023023	1 全血容器（茶）	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	0.90未満 (-) 陰 インデックス値	免疫 200	4～6	＊5	3
	2674 5E031	クラミドフィラ・ニューモニエ IgG抗体 5E0310000023023	1 全血容器（茶）	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	30未満 (-) EIU値	免疫 70	4～6	＊6	3
	2675 5E032	クラミドフィラ・ニューモニエ IgA抗体 5E0320000023023	1 全血容器（茶）	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	8未満 (-) EIU値	免疫 75	4～6	＊6	3
	1938 5E033	クラミドフィラ・ニューモニエ IgM抗体 5E0330000023023	1 全血容器（茶）	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	0.5未満 (-) S/C0	免疫 152	4～6	＊6	3
	1729 5E026	クラミドフィラ・シッタシ抗体 オウム病抗体 5E0260000023141	1 全血容器（茶）	血清 0.3(冷蔵)	CF法	4未満 倍	免疫 79	4～6		3

＊¹ **淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出** クラミジア・トラコマチス感染症又は淋菌感染症が疑われる患者又は両方の菌の重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法の選択のために実施した場合及びクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者の治療効果判定に実施した場合に算定できる。
ただし淋菌抗原定性、クラミジア・トラコマチス抗原定性、細菌培養同定検査（淋菌及びクラミジア感染を疑って実施するもの）、淋菌核酸検出又はクラミジア・トラコマチス核酸検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。本検査は泌尿器、生殖器、咽頭からの検体によるものである。

＊² **クラミジア・トラコマチス核酸検出** 泌尿器、生殖器、咽頭からの検体によるものである。クラミジア・トラコマチス抗原定性を併用した場合は主たるもののみ算定する。

＊³ **淋菌核酸検出** 泌尿器、生殖器、咽頭からの検体によるものである。淋菌抗原定性、又は細菌培養同定検査（淋菌感染を疑って実施するもの）を併せて実施した場合は主なるもののみ算定する。

＊⁴ **膣トリコモナス核酸及びマイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出** 膣トリコモナス感染症を疑う患者であって、鏡検が陰性又は実施できないもの又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して治療法選択のために実施した場合及び膣トリコモナス感染症又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して治療効果判定のために実施した場合に算定する。

＊⁵ **グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体** クラミジア・トラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患（骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等）の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。なお、IgG抗体価、IgA抗体価又はIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

＊⁶ **クラミドフィラ・ニューモニエ-IgM抗体** クラミドフィラ・ニューモニエ-IgM抗体をIgG抗体又はIgA抗体と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

＊⁷ **オウム病クラミジア** 血清中ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）79点（判断料 免疫学的検査）同一検体について8項目を限度として算定する。
又、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみを算定する。



() は
保存温度

免疫学検査

項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
203 5E035	ASO定量(ASLO) 抗streptolysin-O価定量 5E0350000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集比濁法	240以下 IU/mL	免疫 15	3~4		3
2581 5E102	百日咳菌IgM抗体 5E1020000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	(-) 8.5未満 (±) 8.5~11.5 (+) 11.5を超える NTU	免疫 80	3~6		3
2580 5E101	百日咳菌IgA抗体 5E1010000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	(-) 8.5未満 (±) 8.5~11.5 (+) 11.5を超える NTU	免疫 80	3~6		3
1829 5E054	百日咳菌抗体 5E0540000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	PT-IgG抗体:10未 満 FHA-IgG抗体:10未 満 EU/mL	免疫 250	3~6		3
2550 6B636	百日咳菌核酸検出 LAMP 6B6360000063883	75 百日咳菌(L AMP法)	その他材料 (冷蔵)	LAMP法	(-)	微生物 360	3~6		8
2374 6B616	マイコプラズマ核酸検出 LAMP 6B6161351064883	53 マイコ(LA MP法)	その他材料 0.2(冷蔵)	LAMP法	(-)	免疫 291	4~7	*1	8
1656 5E106	マイコプラズマPA 5E1060000023117	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	PA法	40未満 倍	免疫 32	3~5		3
1781 5E106	マイコプラズマCF 5E1060000023141	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CF法	4未満 倍	免疫 32	3~5		3
1204 5E105	寒冷凝集反応 5E1050000023102	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	赤血球凝集 法	32以下 倍	免疫 11	2~3		1
2451 5E069	MAC抗体 抗抗酸菌抗体 5E0690000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	ELISA法	(-) 0.70 未満 U/mL	免疫 151	4~6		3

*1 百日咳核酸検出 関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床判断例の定義をご満たす患者に対して、LAMP法により測定した場合に算定できる。

○百日咳菌の検査と特徴

分類	項目コード	検査名	保険 点数	感度	特異 度	備考
菌培養法	細菌	百日咳菌の分離	180	×	○	事後診断(培養7日)
遺伝子検査	2550	百日咳LAMP法	360	○	○	早期診断の有用
血清診断法	1829	百日咳菌抗体 (PT-IgG)	257	○	△	ワクチンの接種の影響を受ける
	2580	百日咳菌IgA抗体	80	×	○	感度25-44%
	2581	百日咳菌IgM抗体	80	×	○	感度29-56%

容器NO75
百日咳
LAMP法



容器NO53
マイコプ
ラズマ
LAMP法



* 血清診断法百日咳菌の届け出基準

百日咳菌抗体 (PT-IgG)	①単血清: 100EU/mL以上 ②ペア血清: ア) 10未満→10≤EU/mL イ) 10~<100EU/mL→2倍以上
百日咳菌IgA抗体	11.5NTU以上(両方もしくは片方陽性の場合)
百日咳菌IgM抗体	

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
ツツガムシ	1143 5E128	ツツガ虫－ギリアムIgG 5E1280000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1144 5E129	ツツガ虫－ギリアムIgM 5E1290000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1139 5E122	ツツガ虫－カープIgG 5E1220000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1140 5E123	ツツガ虫－カープIgM 5E1230000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1141 5E125	ツツガ虫－カトーIgG 5E1250000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1142 5E126	ツツガ虫－カトーIgM 5E1260000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
H・ピロリ菌	1591 5E064	ヘリコバクターピロリ抗体 5E0640000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	(-) 10.0 未満 U/mL	免疫 80	1～2	使用試薬：デンカ	1
	1480 5E068	便中ヘリコバクターピロリ抗原 5E0680000015023	47 便中ピロリ専用容器	便 (冷蔵)	EIA法	(-)	免疫 138	3～5		3
	1612 6Z100	尿素呼気試験 6Z1000000098203	31 呼気採取バック	専用容器 (室温)	IR法	2.5‰未満 ‰	免疫 70	1～2		1
トキソプラズマ	2672 5E156	トキソプラズマ抗体IgG 5E1560000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	(-) 1.6未満 (±) 1.6～3.0 未満 (+) 3.0以上 IU/mL	免疫 93	3～4		3
	2673 5E157	トキソプラズマ抗体IgM 5E1570000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	(-) 0.50未満 (±) 0.50～0.60 未満 (+) 0.60以上	免疫 95	3～4		3
ウイルス抗体		ウイルス抗体価					免疫 79	3～4	項目・コード・検体種別：42～44P参照	3
		グロブリン別ウイルス抗体価					免疫 200	3～4	項目・コード・検体種別：42～44P参照	3
ノロウイルス	1959 5F630	ノロウイルス抗原(便) 5F6301410015023	27 糞便一般用	便 拇指頭大(冷蔵)	イムノクロマト 法		免疫 150	1～2	*2	1
	2741 5F630	ノロウイルス/PCR 5F6301450015875	27 糞便一般用	便 小指頭大(冷蔵)	リアルタイム RT-PCR	(-)		1～2		1

*1 ツツガムシ抗体定量 各株(菌株)ごとに算定する

*2 ノロウイルス抗原 次の患者について、ノロウイルス感染症が疑われる場合に算定する。3歳未満、65歳以上、悪性腫瘍の診断が確定している、臓器移植後、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
毒素 検査	2756	C.ディフィシル抗原毒素検査 5E110 5E1100000015190	27 糞便一般用 拭指頭大(冷蔵)	便 拭指頭大(冷蔵)	イムノクロマト	(-)	免疫 95	3~6	CD抗原およびCDトキシンの検出	3
	6B642	C.ディフィシル遺伝子検出 CDトキシンの遺伝子 6B6420000015862	27 糞便一般用 拭指頭大(冷蔵)	便 拭指頭大(冷蔵)	リアルタイム PCR法	(-)	微生物 450	3~6	ToxinB遺伝子、BinaryToxin遺伝子、 変異型toxC遺伝子、027型株判定 * 1	3
	1243	大腸菌ペロ毒素迅速検査 大腸菌ペロトキシン定性 5E115 5E1150000015023	55 細菌検査用 拭指頭大(冷蔵)	便 拭指頭大(冷蔵)	EIA法	(-)	微生物 189	3~6	* 2	8
ウィ ル ス 抗 原	1915	単純ヘルペス特異抗原 HSV抗原定性 5F190 5F1901420094161	50 VZV・HSV採取 スライド(凍結)	塗抹標本 スライド(凍結)	蛍光抗体法	HSV-1抗原 (-) HSV-2抗原 (-)	免疫 180	3~7	* 3	3
	1929	水痘帯状ヘルペス特異抗原 VZV抗原定性 5F193 5F1931410094161	50 VZV・HSV採取 スライド(凍結)	塗抹標本 スライド(凍結)	蛍光抗体法	(-)	免疫 227	3~7		3
	1806	サイトメガロウイルス抗原C10,C11 CMV抗原C10,C11 5F194 5F1941420019171	6 EDTA2Na管	全血添加物入 3(冷蔵)	間接酵素抗 体法	判定 (-)	免疫 366	4~9	受託は月～金午前中のみ 休前日受付不可 * 4	3
	1991	サイトメガロウイルス抗原C7-HRP CMV抗原C7-HRP 5F194 5F1941420019171	6 EDTA2Na管	全血添加物入 3(冷蔵)	直接酵素抗 体法	判定 (-)	免疫 356	4~9	受託は月～金午前中のみ 休前日受付不可 * 4	3
	1903	サイトメガロウイルス核酸検出 新生児尿 5F194 5F194144009862	16 遺伝子検査	その他の材料 0.2(凍結)	リアルタイム (PCR)	(-)	微生物 825	4~10	* 5	3

* 1 **大腸菌ペロトキシン定性** 細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。大腸菌ペロトキシン定性のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、細菌培養同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

* 2 **クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンの遺伝子検出**

ア. クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンの遺伝子検出は、以下の (イ) ~ (ハ) をいずれも満たす入院患者に対して実施した場合に限り算定する。

(イ) クロストリジオイデス・ディフィシル(CD)感染症を疑う場合であって、クロストリジオイデス・ディフィシル(CD)抗原定性において、CD抗原陽性かつCDトキシンの陰性であること。

(ロ) 2歳以上でBristol Stool Scale 5 以上の下痢症状があること。


(ハ) 24時間以内に3回以上、又は平常時より多い便回数があること。

イ. 本検査は、関連学会の定める指針に沿って実施した場合に限り算定できる。なお、下痢症状並びに本検査を行う前のCD抗原及びCDトキシンの検査結果について診療録に記載すること。

* 3 **単純ヘルペスウイルス抗原定性** ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。

* 4 **サイトメガロウイルスpp65抗原定性** 臓器移植後、若しくは造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った場合のみ算定できる。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

* 5 **サイトメガロウイルス核酸検出(尿)** 先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として、尿を検体として等温核酸増幅法により測定した場合に、1回に限り算定できる。先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として当該検査と「D012」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)又はグロブリンクラス別ウイルス抗体価(サイトメガロウイルス)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

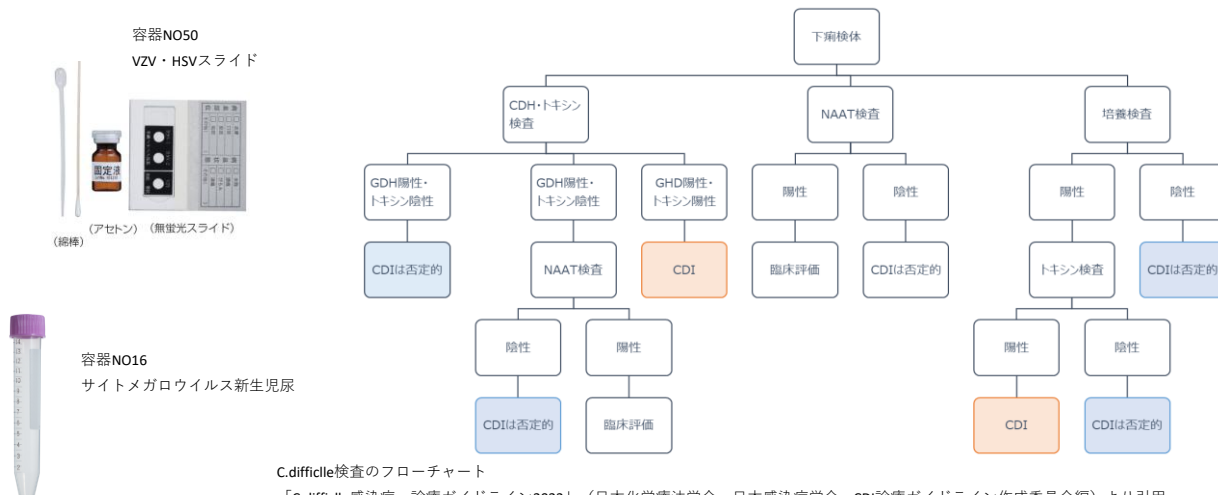

C.difficile検査のフローチャート

「C.difficile感染症 診療ガイドライン2022」(日本化学療法学会・日本感染症学会・CDI診療ガイドライン作成委員会編)より引用

■ウイルス検査一覧表(必要量の記載がある項目は検査可)

検査項目		EIA 項目コード	必要量 (mL)	CF 項目コード	必要量 (mL)	HI 項目コード	必要量 (mL)	NT 項目コード	必要量 (mL)	FA 項目コード	必要量 (mL)
アデノ	血清 髄液			1912	0.3 0.5						
アデノ1型	血清 髄液							2282	0.2 0.5		
アデノ2型	血清 髄液							1953	0.2 0.5		
アデノ3型	血清 髄液							2283	0.2 0.5		
アデノ4型	血清 髄液							2284	0.2 0.5		
アデノ5型	血清 髄液								0.2 0.5		
アデノ6型	血清 髄液								0.2 0.5		
アデノ7型	血清 髄液							1954	0.2 0.5		
アデノ11型	血清 髄液								0.2 0.5		
アデノ19型	血清 髄液								0.2 0.5		
インフルエンザA	血清 髄液			1661	0.3 0.5	2356	0.2 0.4				
インフルエンザB	血清 髄液			1662	0.3 0.5	2357	0.2 0.4				
パラインフルエンザ1型	血清 髄液					2327	0.2 0.4				
パラインフルエンザ2型	血清 髄液					2328	0.2 0.4				
パラインフルエンザ3型	血清 髄液					1921	0.2 0.4				
パラインフルエンザ4型	血清 髄液					2329	0.2 0.4				
RS	血清 髄液			1721	0.3 0.5			1693	0.2 0.5		
ムンプス	血清 髄液			1668	0.3 0.5	1822	0.2 0.4	2227	0.2 0.5		
ムンプスIgG	血清 髄液	1537	0.4 0.7								
ムンプスIgM	血清 髄液	1538	0.4 0.7								
麻疹	血清 髄液							1458	0.2 0.2		
麻疹IgG	血清 髄液	1535	0.4 0.7						0.2 0.2		
麻疹IgM	血清 髄液	1536	0.4 0.7								
風疹	血清 髄液					1178	0.2 0.4				
風疹IgG	血清 髄液	1354	0.4 0.7						0.2 0.2		
風疹IgM	血清 髄液	1172	0.4 0.7								
単純ヘルペス(HSV)	血清 髄液			1666 2238	0.3 0.5						
単純ヘルペス1型	血清 髄液							1796	0.3 0.3		
単純ヘルペス2型	血清 髄液							1808	0.3 0.3		
単純ヘルペスIgG	血清 髄液	1451	0.4 0.7								
単純ヘルペスIgM	血清 髄液	1735	0.4 0.7								

■の血清の実施料は79点判免疫

■の血清(単純ヘルペスIgGは髄液も算定可)の実施料は206点判免疫

■ ウイルス検査一覧表(必要量の記載がある項目は検査可)

検査項目			EIA	必要量	CF	必要量	HI	必要量	NT	必要量	FA	必要量
			項目コード	(mL)	項目コード	(mL)	項目コード	(mL)	項目コード	(mL)	項目コード	(mL)
水痘帯状ヘルペス		血清 髄液			1676 2339	0.3 0.5						
水痘帯状ヘルペスIgG		血清 髄液	1433 2517	0.4 0.7								
水痘帯状ヘルペスIgM		血清 髄液	1706 2518	0.4 0.7								
サイトメガロ		血清 髄液			1667 2378	0.3 0.5						
サイトメガロIgG		血清 髄液	2613	0.5 0.5								
サイトメガロIgM		血清 髄液	2614	0.5 0.5								
日本脳炎		血清 髄液			1665	0.3 0.5	1772	0.2 0.4				
エコー1型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー3型		血清 髄液						0.3 0.4	1920	0.2 0.2		
エコー4型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー5型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー6型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー7型		血清 髄液						0.3 0.4	1461	0.2 0.2		
エコー9型		血清 髄液							2320	0.2 0.2		
エコー11型		血清 髄液						0.3 0.4	1462	0.2 0.2		
エコー12型		血清 髄液				1463		0.3 0.4		0.2 0.2		
エコー13型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー14型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー16型		血清 髄液							2321	0.2 0.2		
エコー17型		血清 髄液							2322	0.2 0.2		
エコー18型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー19型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー21型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー22型(ヒトパレコ1型)		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー24型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー25型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー27型		血清 髄液								0.2 0.2		
エコー30型		血清 髄液								0.2 0.2		

■ の血清の実施料は79点判免疫

■ の血清(単純ヘルペスIgGは髄液も算定可)の実施料は206点判免疫

■ウイルス検査一覧表(必要量の記載がある項目は検査可)

検査項目		EIA 項目コード	必要量 (mL)	CF 項目コード	必要量 (mL)	HI 項目コード	必要量 (mL)	NT 項目コード	必要量 (mL)	FA 項目コード	必要量 (mL)
エンテロ70型	血清 髄液							1351	0.2 0.2		
エンテロ71型	血清 髄液							1352	0.2 0.2		
コクサッキーA 2型	血清 髄液							1041	0.2 0.2		
コクサッキーA 3型	血清 髄液							1042	0.2 0.2		
コクサッキーA 4型	血清 髄液							1043	0.2 0.2		
コクサッキーA 5型	血清 髄液							1044	0.2 0.2		
コクサッキーA 7型	血清 髄液							1046	0.2 0.2		
コクサッキーA 9型	血清 髄液			1040	0.3 0.5			1047	0.2 0.2		
コクサッキーA 10型	血清 髄液							1048	0.2 0.2		
コクサッキーA 16型	血清 髄液							1049	0.2 0.2		
コクサッキーB 1型	血清 髄液			1601		0.3 0.5		1981	0.2 0.2		
コクサッキーB 2型	血清 髄液			1602		0.3 0.5		1982	0.2 0.2		
コクサッキーB 3型	血清 髄液			1603		0.3 0.5		1938	0.2 0.2		
コクサッキーB 4型	血清 髄液			1604		0.3 0.5		1984	0.2 0.2		
コクサッキーB 5型	血清 髄液			1605		0.3 0.5		1985	0.2 0.2		
コクサッキーB 6型	血清 髄液			1606		0.3 0.5		1986	0.2 0.2		
EB抗VCA IgG	血清 髄液									1441	0.2 0.4
EB抗VCA IgM	血清 髄液									1443	0.2 0.4
EB抗VCA IgA	血清 髄液									1442	0.2 0.4
EB抗EA IgG	血清 髄液		0.5							1444	0.2 0.4
EB抗EA IgM	血清 髄液									1446	0.2 0.4
EB抗EA IgA	血清 髄液									1445	0.2 0.4
EB抗EBNA	血清 髄液									1447	0.2 0.4
EB抗EBNA-IgG	血清 髄液	2666	0.5								
パルボウイルスIgG	血清 髄液	1935	0.4								
パルボウイルスIgM	血清 髄液	1856	0.4								

■の血清の実施料は79点判免疫

■の血清(単純ヘルペスIgGは髄液も算定可)の実施料は206点判免疫

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
H P V	2206 5F101	HPV簡易ジェノタイプ判定 5F1011405085862	51 細胞診婦人 科・HPV	擦過物 擦過物(室温)	リアルタイムPCR	検出せず	微生物 347	3~4	同一検体で婦人科液状化検体細胞診との依頼 可 6種の遺伝子型(16.18.31.45.5152型)の型別 判定と3種の遺伝子グループ(33/58型.35/39/68 型.56/59/66型)の検出の有無	8
	2363 5F100	HPV—DNA型判定 PCR-Invader 5F1001405085951	51 細胞診婦人 科・HPV	擦過物 擦過物(室温)	PCR-Invader 法	検出せず		4~10	容器 NO51 	3
	2375 5F101	HPV—DNA型判定 rSSO 5F1001405085898	51 細胞診婦人 科・HPV	擦過物 擦過物(室温)	PCR-rSSO法	検出せず	微生物 2000	4~8		3
レ ト ロ ウ イ ル ス 関 連	1576 5F450	HTLV1抗体CLIA 5F4501491023052	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA	(-)	免疫 159	1~2	髄液でも検査可能	1
	2608 5F460	HTLV1抗体 LIA法 5F4601430023833	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	LIA法	(-)	免疫 425	3~4	髄液でも検査可能 *1	3
	2690 5F455	HTLV-1核酸検出 5F4551440019862	13 EDTA2K	全血添加物入 6(冷蔵)	リアルタイムPCR	(-)	微生物 450	3~4	*2	3
	1577 5F560	HIV抗原抗体 5F5601550023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	陰性	免疫 127	1~2	*3 *4	1
	2714 5F550	HIV-1/2抗体確認検査 5F5501430023190	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	イムノクwest 法	(-)	免疫 660	4~9	*5	4
	1800 5F500	HIV核酸定量 5F5001453022875	備考参照 HIV-RT-PCR用	血漿 2(冷蔵)	リアルタイム- PCR	検出せず コト-/mL	微生物 520	4~9	結果の詳細は47P参照 *6 	3
	5D596	CCR4タンパク/FCM 5D5960000019662	12 ヘパリン加血液	血液 4(室温)	フローサイトメ トリー法	陰性	血液 10000	3~5	受託は月~金午前中のみ *7 	3

- *1 **HTLV-1抗体** (ウエスタンブロット法及びラインブロット法) **HTLV-1抗体**定性、半定量又は**HTLV-1抗体**によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット法またはラインブロット法により行った場合に算定する。
- *2 **HTLV-1核酸検出** HTLV-1抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)によって判定保留となった妊婦、移植者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る)又は臓器等提供者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る)を対象として測定した場合にのみ算定する。本検査を実施した場合は、HTLV-1抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の判定保留を確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- *3 **HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量** 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できないため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53年から昭和63年の間に入院し、かつ、次の該当するものに対して本検査を実施した場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定できる。ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定しない。
ア 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた者 イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者 ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐血があった者 エ 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑われる場合でHIV感染症を疑う場合は、本検査を算定できる。
- *4 自己血輸血を除く「K920」輸血料を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に本検査の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。(他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であっても同様に算定できる。)なお、この場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。
- *5 **HIV-1特異抗体及びHIV-2特異抗体(イムノクロマト法)** スクリーニング検査としてのHIV-1,2抗体定性若しくは同半定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、HIV-1,2抗体定量、**HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量**が陽性の場合の確定診断用検査。なお、本検査を実施した場合、HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)及びHIV-2抗体(ウエスタンブロット法)は、別に算定できない。
- *6 **HIV-1核酸定量** HIV感染者の経過観察に用いた場合又はHIV-1,2抗体定性、半定量、又は**HIV-1,2抗原・抗体同時測定、定量**又はHIV-1,2抗体定量が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。本検査とHIV-1抗体(ウエスタンブロット法)を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。
- *7 **CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)** 「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「5」CCR4タンパクを同一の目的で行った場合は原則としていずれか一方のみ算定する。ただし医学的な必要性がある場合は、併せて算定できる。なお、この場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を明記すること。



免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
肝 炎 ウ イ ル ス	1819 5F350	HA-IgM抗体 5F3501432023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	(-) 0.80未満 S/CO	免疫 146	3~4	*1	3
	1560 5F350	HA-IgG抗体 5F3501431023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	(-) 1.00未満 S/CO	免疫 146	3~4	*1	3
	1730 5F016	HBs抗原定性 5F0161410023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	(-)	免疫 29	1~2		1
	1682 5F016	HBs抗原 5F0161410023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	(-) 0.05未満 IU/mL	免疫 88	3~4	*2	1
	1731 5F016	HBs抗体定性 5F0161430023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	(-)	免疫 32	1~2		1
	1687 5F016	HBs抗体 5F0161430023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	(-) 10.0未満 mIU/mL	免疫 88	1~2	*2	1
	1870 5F019	HBe抗原 5F0191410023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	(-) 1.00未満 S/CO	免疫 98	3~4		3
	1871 5F019	HBe抗体 5F0191430023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	(-) 阻害率 50.0%未満	免疫 98	1~2		3
	1689 5F018	HBc-IgM抗体 5F0181432023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	(-) 1.00未満 S/CO	免疫 146	3~4	*3	3
	1872 5F018	HBc抗体 5F0181430023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	(-) 1.00未満 S/CO	免疫 130	3~4	使用試薬「HBcアボット」 *2 *3	3
	2246 5F020	高感度HBc関連抗原定量 HBVコア関連抗原:HBcrAg 5F0200000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	2.9以下 LogU/mL	免疫 246	4~10	*4	3
	2547 5F015	HBV核酸定量 HBV-RNA定量 5F0151441023862	18 ウイルス r t PCR法	血清 2.1(冷蔵 (開封厳禁))	リアルタイムP CR法	検出せず	微生物 256	3~4	47P参照 単独検体 *5	6
	2367 5F015	HBV遺伝子型/EIA HBVジェノタイプ判定/EIA 5F0151405023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	EIA	A. B. C. D また は検出され ず	免疫 340	4~6	*6	3
	2538 5F015	HBV遺伝子型PCR-Invader HBVサブジェノタイプ判定検査 5F0151405023951	36 遺伝子検査	血清 0.5(凍結 (開封厳禁))	PCR-invader 法	備考参照	未保点	4~7	報告形式: Aa.Ae.Ba.Bj.C.D.E.F.G.または 「検出されず」混合型は別紙報告	3
	5F037	HBVプレコア・コアプロモーター変 異株 5F0371440023851	36 遺伝子検査	血清 0.5(凍結)	プレコア:PCR- ELMA法 コアプロモ- ーター:PCR- SPA法		微生物 450	4~10	47P参照 *7	3

*1 HA抗体(HA-IgG抗体)とHA-IgM抗体 同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。*2 HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体半定量・定量 免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、当該治療開始前に各検査を同時に測定した場合は、患者1人につきそれぞれ1回に限り算定できる。*3 HBc抗体半定量・定量とHBc-IgM抗体 同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
*4 HBVコア関連抗原(HBcrAg) HBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、D023微生物核酸同定・定量検査のHBV核酸定量を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。*5 HBV核酸定量 B型肝炎ウイルス既感染者であって、免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている悪性リンパ腫等の患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し実施した場合は、当該治療中及び治療終了後1年以内に限り、月1回を限度として算定できる。*6 HBVジェノタイプ判定 B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。*7 HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出B型急性肝炎患者に対しては、劇型肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。B型慢性肝炎患者に対しては経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が 疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は「区分D013」の肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査（ただし抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査は除く）は算定できない。

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
肝 炎 ウ イ ル ス	1547 5F360	HCV抗体 (第Ⅲ世代) 5F3601519023062	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	(-) 1.0未満 S/CO	免疫 102	1~2		1
	1279 5F360	HCVコア蛋白-HS 5F3601500023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	3.0未満 fmol/L	免疫 102	3~4		3
	1478 5F360	HCV核酸定量 HCV-RNA定量 5F3601453023875	18 ウイルス r t P C R 法	血清 2.1(冷蔵 (開封厳禁))	リアルタイムP CR法	検出せず Log IU/mL	微生物 412	3~4	単独検体 * 1	6
	1831 5F360	HCV核酸定量 RNAジェノタイプ 5F3601405023875	36 ウイルス r t P C R 法	血清 0.5(凍結 (開封厳禁))	リアルタイムRT- PCR法	備考参照	未保点	3~6	報告形式: 1A,1B,2A,2B,3Aまたは検 出せず	3
	1138 5F360	HCV群別 グループ分類 5F3601406023023	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLEIA法	下記参照	免疫 215	3~6	* 2	3
	2399 5F370	HEV-IgA抗体 5F3701433023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	EIA法	(-)	免疫 210	4~10		3

* 1 HCV核酸定量 急性C型肝炎の診断、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合のみ算定できる。

* 2 HCV血清群別判定 C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

HBV核酸定量の結果表示

増幅反応シグナルを検出しなかった場合	検出せず
1.0L IU/mL (定量下限値) 未満で、増幅反応シグナルを検出した場合	<1.0+
測定範囲内で結果を得た場合	1.0~9.0
9.1L IU/mL (定量上限値) を超えた場合	9.1以上

HCV核酸定量の結果表示

増幅反応シグナルを検出しなかった場合	検出せず
1.2L IU/mL (定量下限値) 未満で、増幅反応シグナルを検出した場合	<1.2+
測定範囲内で結果を得た場合	1.2~8.0
8.1L IU/mL (定量上限値) を超えた場合	8.1以上

HCV群別 (判定基準)


一方のグループの抗体が陽性で、他方のグループが陰性の場合	GROUP 1 又は GROUP 2
どちらのグループも陽性で抗体価が他方のグループの抗体価の2倍以上を示した場合、高い抗体価のグループを報告します	
どちらのグループも陽性で抗体価の比較が2倍以上とならない場合で、どちらのグループか判定できない場合	判定保留
どちらのグループの抗体も陰性の場合	判定不能 (不検出)

C型肝炎ウイルスの型 (サブタイプ)

セロタイプ	ジェノタイプ	日本人の場合
1グループ	1A	—
	1B	70~80%
2グループ	2A	10~20%
	2B	10%以下
該当なし	3A	—
	3B	—

日本人に多くインターフェロンが効きにくい

HBVプレコア、コアプロモーター変異解析

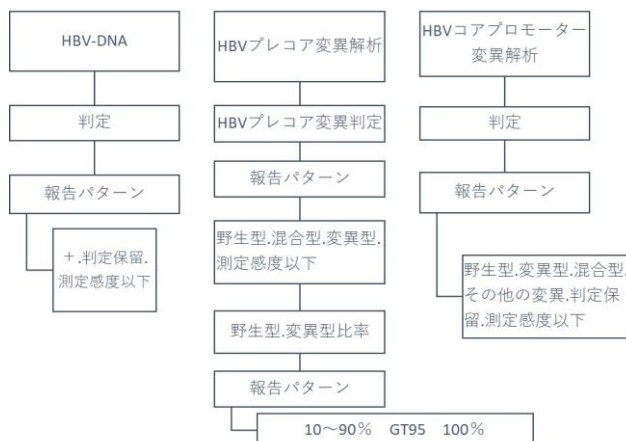

HIV-1核酸定量の結果表示

増幅反応シグナルを検出しなかった場合	検出せず
20コピー/mL (定量下限値) 未満で、増幅シグナルを検出した場合	<20+
測定範囲内で結果を得た場合	20~10 ⁷
10 ⁷ コピー/mL (定量上限値) を超えた場合	10 ⁷ 以上

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
細胞表面マーカー	2537 5I020	T細胞・B細胞百分率 5I0200000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	T細胞 (CD3) 54.3~81.9 B細胞 (CD19) 2.9~20.1 %	免疫 193	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	2234 5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgG 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	0.0~3.8 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgA 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	0.0~4.5 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
	2235 5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgM 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	3.5~17.5 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgD 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	2.1~14.4 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-Igκ(κ鎖) 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	2.9~15.9 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-Igλ(λ鎖) 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	3.1~12.6 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
		Singl-color解析による 細胞表面マーカー検査	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ 参照	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3
		Two-color解析による 細胞表面マーカー検査	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ 参照	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3

*1 T細胞サブセット検査(185点/免疫学的検査) 免疫不全の診断目的に行う検査であり一連として算定する。
造血器腫瘍細胞抗原検査(1940点/血液学的検査)
ア. モノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。
イ. 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。
ウ. 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査に当たって用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数を算定する。



●Single-color解析による細胞表面マーカー検査

	コードNO	検査項目	基準値 (%)
抗 T 細胞系マーカー	1618	CD1a	3.0 以下
	1362	CD2	70.0 ~ 90.7
	1301	CD3	54.3 ~ 81.9
	1171	CD4	24.3 ~ 49.7
	1363	CD5	55.5 ~ 80.2
	1622	CD7	73.3 ~ 89.6
	1170	CD8	18.4 ~ 49.0
		TCRaβ	47.3 ~ 78.3
抗 B 細胞系マーカー		TCRγδ	0.0 ~ 14.3
	1365	CD19	2.9 ~ 20.1
	1366	CD20	1.7 ~ 23.7
	2077	CD21	3.8 ~ 16.6
		CD22	6.0 ~ 18.4
		CD23	0.9 ~ 13.7
抗 骨髄球系マーカー	2233	CD24	3.8 ~ 18.9
		CD13	3.0 以下
		CD14	3.0 以下
		CD15	3.0 以下
系 NK 細胞マーカー	1368	CD33	3.0 以下
	2286	CD16	6.4 ~ 35.2
	2234	CD56	9.1 ~ 37.1
抗 赤血球系マーカー	2287	CD57	2.0 ~ 40.1
		CD235a (glycophorinA)	3.0 以下
抗 血小板・巨核球系マーカー		CD36	
		CD41	3.0 以下
		CD42a	3.0 以下
	1970	CD42 b	3.0 以下
		CD61	
接着分子マーカー		CD11a	88.1 ~ 100.0
		CD11 b	5.9 ~ 31.7
		CD11 c	4.8 ~ 32.7
		CD18	90.0 以上
		CD44	90.0 以上
		CD54	0.0 ~ 16.6
		CD58	
その他	1364	CD10	3.0 以下
	1685	CD25	6.7 ~ 33.3
		CD26	33.2 ~ 69.3
		CD28	39.6 ~ 74.5
		CD29	
		CD30	3.0 以下
		CD34	3.0 以下
		CD38	22.0 ~ 68.7
		CD45	99.4 ~ 100.0
		CD45RA	
		CD45RC	
		CD69	
		CD71	0.0 ~ 14.5
		CD103	
		CD117	1.0 以下
		CD122	4.2 ~ 25.2
		FMC7	
		HLA-DR	15.3 ~ 40.2
		HLA-DQ	4.7 ~ 23.5
	1278	CD4/CD8比*	0.4 ~ 1.9

*CD4とCD8を同時依頼の場合はCD4/CD8比を併せて報告

●Two-color解析による細胞表面マーカー検査

コードNO	検査項目	特性・測定
	CD3 * HLA-DR	T・B細胞、活性化T細胞など同時測定
	CD4 * HLA-DR	活性化しているインデューサー/ヘルパーT細胞の分別
	CD8 * HLA-DR	活性化しているサブセット細胞/障害性T細胞の分別
	CD20 * CD3	T細胞、B細胞の分別
	CD4 * CD8	ヘルパーT細胞/サブセット細胞の分別
	CD4 * CD45RA	サブセットインデューサーT細胞の分別
	CD4 * CD29	ヘルパーインデューサーT細胞の分別
1530	CD4 * CD25	IL-2R陽性細胞の解析
	CD3 * CD25	IL-2R陽性細胞の解析
	CD8 * CD25	IL-2R陽性細胞の解析
	CD57 * CD8	NK細胞サブセット
	CD57 * CD16	NK細胞サブセット
	CD3 * CD56	NK細胞サブセット
	CD16 * CD56	NK細胞サブセット

○HLA型一覧（血清対応タイピング）

A	B	B	DR
A 1	B 7	B 51	DR 1
A 2	B 8	B 52	DR 2
A 3	B 12	B 53	DR 3
A 9	B 13	B 54	DR 4
A 10	B 14	B 55	DR 5
A 11	B 15	B 56	DR 6
A 23	B 16	B 57	DR 7
A 24	B 18	B 58	DR 8
A 25	B 21	B 59	DR 9
A 26	B 22	B 60	DR 10
A 28	B 27	B 61	DR 11
A 29	B 35	B 62	DR 12
A 30	B 37	B 63	DR 13
A 31	B 38	B 64	DR 14
A 32	B 39	B 65	DR 15
A 33	B 40	B 67	DR 16
A 34	B 41	B 70	DR 17
A 36	B 42	B 71	DR 18
A 43	B 44	B 72	
A 66	B 45	B 73	
A 68	B 46	B 75	
A 69	B 47	B 76	
A 74	B 48	B 77	
A 80	B 49	B 78	
	B 50	B 81	

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
リンパ球幼若化・その他	5I010	リンパ球幼若試験(分離培養) PHA 5I0100000019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 5(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I 147.5 ~1251.3	免疫 345	7~9	月~金・採血日午前中に提出 * 1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(分離培養) Con-A 5I0100000019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 5(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I 38.1 ~385.5	免疫 345	7~9	月~金・採血日午前中に提出 * 1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(微量全血培養) PHA 5I0100000019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 1(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I 38.6~ 898.5	免疫 345	8~10	月~金・採血日午前中に提出 * 1	3
	1394 5I014	DLST1薬剤 薬剤リンパ球刺激試験 5I0141301019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 10(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I. +≥1.8 ±1.6~1.7	免疫 345	8~10	月~金・採血日午前中に提出 * 1 * 2	3
	1680 5I014	DLST2薬剤 薬剤リンパ球刺激試験 5I0141301019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 15(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I. +≥1.8 ±1.6~1.7	免疫 425	8~10	月~金・採血日午前中に提出 * 1 * 2	3
	1681 5I014	DLST3薬剤 薬剤リンパ球刺激試験 5I0141301019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 20(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I. +≥1.8 ±1.6~1.7	免疫 515	8~10	月~金・採血日午前中に提出 * 1 * 2	3
	1818 5I014	DLST4薬剤 薬剤リンパ球刺激試験 5I0141301019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 25(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I. +≥1.8 ±1.6~1.7	免疫 515	8~10	月~金・採血日午前中に提出 * 1 * 2	3
	1573 5I014	DLST5薬剤 薬剤リンパ球刺激試験 5I0141301019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 30(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S.I. +≥1.8 ±1.6~1.7	免疫 515	8~10	月~金・採血日午前中に提出 * 1 * 2	3

(注) 1 白血球数およびリンパ球数が少ない(白血球数×リンパ球[%] : 1,000/μL以下)患者様につきましては、規定量以上の採血が必要となる場合がございます。なお、詳しくは弊社までお問い合わせください。

- 2 開封厳禁
検体採取後の開栓、もしくは開栓からの血液注入は、雑菌混入が結果に影響を及ぼす可能性があるため、雑菌混入の有無についてコメント付報告とさせていただきます。
- 3 DLST・リンパ球幼若化検査は10件以上の同時依頼の場合、ご連絡をお願いします。

◆薬剤リンパ球刺激試験について

- 1 麻薬類等の法律的に規制された薬剤は受託できませんので予めご了承ください。
- 2 皮内反応用のテストアンプルは実施できません。又、水溶性でない薬剤は本検査に適用していません。
- 3 薬剤は1回投与量をご記入のうえ、最小単位の添付をお願いします。
最小単位：錠剤・カプセル(1錠・1カプセル)、バイアル・アンプル(原液で0.5mL程度)
- 4 詳細報告書も用意しておりますのでお問い合わせください

- * 1 リンパ球刺激試験(LST) リンパ球刺激試験(LST)は、Con-A、PHAまたは薬疹の被疑医薬品によるものである。
- * 2 薬剤リンパ球刺激試験の保険算定 薬疹の原因と疑われる薬剤について検査した場合にリンパ球刺激試験1~3薬剤までの所定点数を算定できる。



容器N012
ヘパリン

●リンパ球幼若化検査に用いられるマイトジェンについて

マイトジェン	刺激特異性
PHA (phytohemagglutinin)	T細胞
Con-A (concanavalinA)	T細胞、未熟胸腺細胞
マイトジェン：細胞分裂の開始を誘導する物質	

●リンパ球幼若化DLST
SI. (Stimulation Index)

=
$$\frac{\text{マイトジェン添加細胞cpm}}{\text{マイトジェン無添加細胞cpm}} \times \frac{\text{薬剤添加cpm}}{\text{薬剤無添加cpm}}$$

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先						
細菌・真菌感染症	1851 5E048	エンドキシン定量 5E0480000019297	20 エンドキシン・血液	全血添加物入 2(冷蔵)	比濁時間分 析法	1.0以下 pg/mL	免疫 229	4～6	* 1	3						
	1201 5E048	透析液エンドキシン濃度 透析液 5E0480000095297	24 エンドトキシ ン・透析	透析液 4(冷蔵)	発色合成基 質による比色 法	EU/L		4～6		3						
	2720 5J130	インターロイキン-6 IL-6 (ECLIA) 5J1300000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	7.0以下 pg/mL	免疫 170	3～4	重症度の判定の参考カットオフ値 100pg/m L * 2	3						
	1908 5E151	(1－3) β－Dグルカン 5E1510000022271	20 エンドトキシ ン・血液	全血添加物入 2(冷蔵)	発色合成基 質による比色 法	20.0以下 pg/mL	免疫 190	3～4	* 3	3						
	1439 5E140	クリプトコックス・ネオフォル マンス抗原 5E1400000023117	1 全血容器(茶)	血清 0.8(冷蔵)	ラテックス凝 集法	(－)	免疫 166	4～6	髄液検体検査可能 * 3 * 4	3						
	1745 5E142	カンジダマンナン抗原 5E1420000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	0.05未満 U/mL	免疫 134	3～4	* 5	3						
	1554 5E148	アスペルギルス抗原 5E1480000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	EIA法	(－) 0.5未満 カットオフイン デックス	免疫 157	3～5	* 3 * 6 <table><tr><td>カットオフインデックス</td><td>判定</td></tr><tr><td>0.5未満</td><td>(－)</td></tr><tr><td>0.5以上</td><td>(＋)</td></tr></table>	カットオフインデックス	判定	0.5未満	(－)	0.5以上	(＋)	3
	カットオフインデックス	判定														
	0.5未満	(－)														
	0.5以上	(＋)														
	2723 5E146	アスペルギルスIgG抗体 5E1460000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	EIA	5.0未満 Aa/mL		6～8		3						
	1482 5E154	抗トリコスポロン・アサヒ抗体 5E2220000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	EIA法	陰性 0.15未満 CAI	免疫 847	4～7	CAI : Corrected Absprbance Index : 補正吸光度 * 7	3						
2261 5C215	プロカルシトニン定量 PCT定量 5C2150000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.4(凍結)	ECLIA法	0.05以下 ng/mL	生化 I 276	3～4	* 1	3							
2460 5B611	レジオネラ核酸検出 LAMP法 5B6110000061883	 細菌検査用	喀痰 適量(冷蔵)	LAMP法	陰性 (－)	微生物 292	3～8		8							

- *1 プロカルシトニン(PCT)定量 敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。ただし、エンドキシン検査又はプレセピン定量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- *2 インターロイキン-6(IL-6) 全身性炎症反応症候群の患者(疑われる患者を含む。)の重症度判定の補助を目的として測定した場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。
なお、本検査を実施した年月日を診療報酬明細書に記載すること。また、医学的な必要性から一連の治療につき3回以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- *3 (1→3)-β-D-グルカン 深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。カンジダ抗原定性、半定量又は定量、D-アラビノール、アスペルギルス抗原、クリプトコックス抗原定性又は半定量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- *4 クリプトコックス抗原の保険算定 当社のクリプトコックス抗原の保険点数表示につきましては、希釈倍率による報告を主とすることから、半定量の点数と解釈いたします。
- *5 カンジダ抗原(定性) カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
- *6 アスペルギルス抗原 侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場合のみ算定できる。
- *7 抗トリコスポロン・アサヒ抗体 夏型過敏性肺炎の鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」により、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。

● (1→3)-β-Dグルカン測定結果の判定法

カットオフ値	20.0以下 単位 (pg/mL)
20を超える	深在性真菌感染症の治療法の選択対象
10~20	経過観察期間
10以下	健常人の値



容器NO20
エンドキシン定
量、(1-3)-
β-D-グルカン専



容器NO24
エンドキシン透
析専用容器

薬物検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
抗 て ん か ん 剤	1873 3L185	フェニトイン 3L1850000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	10～20 μg/mL	特薬1 470	1～2	ジフェニルヒダントイン,ヒダントール,アレ ビアチン	1
	1869 3L175	フェノバルビタール 3L1750000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	10～30 μg/mL	特薬1 470	1～2	フェノバル、ルミナール	1
	1875 3L190	プリミドン 3L1900000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	5～12 μg/mL	特薬1 470	4～7	マイソリン、プリムロン	6
	1874 3L115	カルバマゼピン 3L1150000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	6～12 μg/mL	特薬1 470	1～2	デグレトール、テレスミン、レキシシ	1
	1876 3L195	バルプロ酸ナトリウム 3L1950000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	50～100 μg/mL	特薬1 470	1～2	デパケン、パレリン、エピレナート、ハイセ レニン	1
	1883 3L125	クロナゼパム 3L1250000023210	35 ブレイン管	血清 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	20～70 ng/mL	特薬1 470	4～7	ランドセン、リボトリール	6
	1880 3L165	ニトラゼパム 3L1650000023210	35 ブレイン管	血清 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	20～100 ng/mL	特薬1 470	4～7	ベンザリン、ネルボン、ネルロレン、ヒル スカミン	6
	1881 3L130	ジアゼパム 3L1300000023204	35 ブレイン管	血清 0.6(凍結)	LC-MS/MS 法	有効治療濃度200 ～500 中毒域 1000以 上 ng/mL	特薬1 470	4～7	セルシン、ホリゾン、ジアバックス、セレナ ミン、ダイアップ	6
	1891 3L210	ゾニサミド 3L2100000023204	35 ブレイン管	血清 0.2(冷蔵)	HPLC法	10～30 μg/mL	特薬1 470	4～7	エクセبران	6
	2214 3L215	ガバペンチン 3L2150000022204	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	μg/mL	特薬1 470	4～7	ガバペン	3
	1812 3L145	クロバザム 3L1450000023204	35 ブレイン管	血清 0.6(凍結)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 10.0～70.0 ng/mL	特薬1 470	4～7	マイスタン	6
	2377 3L230	レベチラセタム 3L2300000022210	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ 12.0～46.00 μg/mL	特薬1 470	4～7	イーケブラ	3
	2358 3L220	ラモトリギン 3L2200000022210	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ 2.50～15.00 μg/mL	特薬1 470	4～7	ラミクタール ヘパリン血・ETDA加血漿検査可	6
	2396 3L225	トピラマート 3L2250000022210	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ 5.00～20.00 μg/mL	特薬1 470	4～7	トピナ	3
	2596 3L245	ペランパネル 3L2450000022210	6 EDTA2Na管	血漿 0.3(凍結)	LC/MS/MS 法	ng/mL	特薬1 470	4～7	フィコンバ 血清検査可	6
	2592 3L248	ラコサミド 3L2480000022210	6 EDTA2 Na管	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	μg/mL	特薬1 470	4～7	ビムハット	6

() は
保存温度

薬物検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
精神 神経 用 剤	1813 3L320	リチウム Li 3L3200000023274	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	原子吸光法	トラフ値 0.3~1.2 mEq/L	特薬1 470	4~7	リーマス、炭酸リチウム	6
	1890 3L300	ハロペリドール 3L3000000023064	35 ブレイン管	血清 0.2(冷蔵)	EIA(CEDIA)	3~17 ng/mL	特薬1 470	4~7	セレネース、ハロペリドール、ハロマンズ	6
	1973 3L302	プロムペリドール 3L3020000023064	35 ブレイン管	血清 0.2(冷蔵)	EIA(CEDIA)	15以下 ng/mL	特薬1 470	4~7	プロムペリドール	6
	2740 3L304	クロザピン 3L3040000023210	35 ブレイン管	血清 0.3(冷蔵)	LC-MS/MS	ng/mL	特薬1 470	5~11	クロザリル クロザピンおよび活性代謝産物であるデスメチルクロ ザピンの各定量値を報告します	6
抗 生 物 質・ 抗 真 菌 薬	1896 3M601	アミカシン 3M6010000023062	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	KIMS	治療有効濃度 ピーク時 50.0~60.0 トラフ値 4.0未満 μg/mL	特薬1 470	4~7	アミカシン 有効治療濃度はグラム陰性菌感染症に対 する標準治療	6
	1895 3M602	トブラマイシン 3M6020000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	HEIA法	治療有効濃度 ピーク時 15.0~20.0 トラフ値 1.0未満 μg/mL	特薬1 470	4~7	トブラシン、トービイ 有効治療濃度はグラム陰性菌感染症に対 する標準治療	6
	1894 3M606	ゲンタマイシン 3M6060000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	EMIT法	治療有効濃度 ピーク時 15.0~20.0 トラフ値 1.0未満 μg/mL	特薬1 470	4~7	ゲンタシン、ゲンタマイシン 有効治療濃度はグラム陰性菌感染症に対 する標準治療	6
	1191 3M530	バンコマイシン 3M5300000023041	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	治療有効濃度 トラフ値 10.0~15.0 μg/mL	特薬1 470	4~7	バンコマイシン	3
	1228 3M613	アルベカシン 3M6130000023041	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	治療有効濃度 ピーク値 15.0~20.0 トラフ値 1.0~2.0 μg/mL	特薬1 470	4~7	ハベカシン、アルベカシン	3
	1955 3M532	テイコプラニン 3M5320000023041	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	15.0~30.0 μg/mL	特薬1 470	4~7	タゴシット、ティコプラニン	6
	2232 3M698	ポリコナゾール 3M6980000022210	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.2(冷蔵)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ値 1.00~2.00以上 μg/mL	特薬1 470	4~7	フィフェンド、ポリコナゾール	4
免 疫 抑 制 剤	1504 3M805	シクロスポリン(血液) 3M8050000019001	69 EDTA加血液	EDTA加血液 0.5(凍結)	CLIA法	ng/mL	特薬1 470	4~7	サンディミュン、ネオラル	3
	1230 3M810	タクロリムス 3M8100000019021	69 EDTA加血液	EDTA加血液 1(冷蔵)	ECLIA法	5~20 ng/mL	特薬1 470	4~7	プログラフ、グラセプター 容器No69 シクロスポリン、タクロリムス	6
腫 瘍 用 薬	1486 3M725	メトレキサート 3M7250000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	中毒域(大量投与 時) 24時間後10.00以上 48時間後1.00以上 72時間後0.10以上 μmol/L	特薬1 470	4~7		6
	3M075	イマチニブ 3M7500000022210	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	LC-MS/MS 法	ng/mL	特薬1 470	8~22	グリバック、イマチニブ	3
	1889 3M070	テオフィリン 3M0700000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	10~20 μg/mL	特薬1 470	4~7	ネオフィリン、デオドル、アミノフィリン	6

薬物検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
解熱鎮痛剤	1836 3M205	サリチル酸 3M2050000023041	35 ブレイン管	血清 0.4(冷蔵)	酵素法	抗リウマチ薬として150～300 (トラフ) μg/mL	特薬1 470	3～5	アスピリン	6
	1232 3L005	アセトアミノフェン 3L0050000023041	35 ブレイン管	血清 0.4(冷蔵)	EIA法	中毒域 4時間 200.1以上 8時間 100.1以上 12時間 50.1以上 μg/mL	生化Ⅰ 180	4～7	カロナール、パラセタモール、 ピレチノール * 1	4
不整脈・ジキタリス製剤	1901 3L800	アミオダロン 3L8000000022204	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.5(冷蔵)	LC-MS/MS 法	投与直前 (トラフ) ng/mL	特薬1 470	4～7	アンカロン	6
	1225 3L897	プロパフェノン 3L8970000023204	8 ヘパリン管 (緑)	血清 0.5(冷蔵)	LC-MS/MS 法	50～1500 (トラフ) ng/mL	特薬1 470	4～7	プロノン	6
	1500 3L880	メキシレチン 3L8800000023210	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 0.50～2.00 μg/mL	特薬1 470	4～7	メキシチール	6
	1226 3L905	フレカイニド 3L9050000023204	35 ブレイン管	血清 0.3(凍結)	LC-MS/M S法	治療有効濃度 200.0～ 1000.0 ng/mL	特薬1 470	4～7	タンボコール	6
	1227 3L898	コハク酸シベンゾリン シベンゾリンコハク酸塩 3L8980000022204	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 1.1(凍結)	HPLC法	70～250 (トラフ) ng/mL	特薬1 470	4～7	シベノール	6
	3L899	ピルメール 3L8990000022210	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.2(凍結)	LC-MS/MS 法	最小有効血漿中 濃度0.40と推定 μg/mL	特薬1 470	4～7		3
	2556 3L802	ベプリジル 3L8020000022210	35 ブレイン管	血清 0.3(冷蔵)	LC-MS/MS 法	250.0～ 800.0 ng/mL	特薬1 470	4～7	ベプリコール	6
	1713 3L765	ジゴキシン 3L7650000023041	35 ブレイン管	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	0.8～2.0 ng/mL	特薬1 470	1～2	ジゴシン	1
	1892 3L890	プロカインアミド 3L8900000023041	35 ブレイン管	血清 0.4(冷蔵)	HEIA法	4～8 (トラフ) μg/mL	特薬1 470	4～7	アミサリン	6
	1887 3L865	ジソピラミド 3L8650000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	2～5 μg/mL	特薬1 470	4～7	リスモダン	6
	1527 3L875	リドカイン 3L8750000023024	35 ブレイン管	血清 0.3(冷蔵)	EMIT法	1.5～5.0 μg/mL	特薬1 470	4～7	静注用キシロカイン	3
	1175 3L896	ピルジカイニド 3L8960000022204	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	0.2～0.9 μg/mL	特薬1 470	4～7	サンリズム	6

* 1 アセトアミノフェン 同一の患者につき、1月以内に2回以上行った場合は、第1回目の測定を行ったときに1回に限り算定する。

薬物検査

対象薬剤	入院外来	所定点数	初月加算	4か月目以降	対象疾病
①ジギタリス製剤 ジギタリス製剤の急速飽和	入外 入外	470 740	280 —	235 —	心疾患患者 重症うっ血性心不全
②テオフィリン製剤	入外	470	280	235	気管支喘息、喘息性（様）気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫、未熟児無呼吸発作
③不整脈用剤 プロカインアミド、N－アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アブリンジン、リドカイン、ビルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ビルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩	入外	470	280	235	不整脈の患者
④ハロペリドール製剤、プロムペリドール製剤	入外	470	280	235	統合失調症患者
⑤リチウム製剤	入外	470	280	235	躁うつ病患者
⑥バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	入外	470	280	470	躁うつ病、躁病
⑦抗てんかん剤 てんかん重積状態の患者に対して抗てんかん剤の注射などを行った場合	入外 入外	470 740	280 —	470 —	てんかん患者 全身性けいれん発作重積状態
⑧バルプロ酸ナトリウム	入外	470	280	235	片頭痛
⑨サリチル酸系製剤（アスピリン他）	入外	470	280	235	若年性関節リウマチ、リウマチ熱、関節リウマチ
⑩メトトレキサート	入外	470	280	235	悪性腫瘍の患者
⑪エベロリムス（抗悪性腫瘍剤）	入外	470	280	235	結節性硬化症の患者
⑫イマチニブ	入外	470	280	235	当該薬剤の適応疾患（慢性骨髄性白血病など）
⑬シクロスポリン	入外	470	280	470	1.ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの 2.その他の非感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。） 3.再生不良性貧血、赤芽球病、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者に限る） 4.ネフローゼ症候群、川崎病の急性期
⑭タクロリムス水和物	入外	470	280	470	全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎（多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。）の患者
⑮免疫抑制剤 シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス、ミコフェノール酸モフェチル	入外	470	臓器移植後 3月まで2740	470	臓器移植後の免疫抑制
⑯アミノ配糖体抗生物質 ゲンタマイシン アミカシン トブラマイシン アルベカシン グリコペプチド系抗生物質 テイコブラニン	入	470	280	235	表記の薬剤を数日間投与している入院中の患者（外来は不可）
グリコペプチド系抗生物質 バンコマイシン	入	470	530	235	表記の薬剤を数日間投与している入院中の患者（外来は不可）
⑰トリアゾール系抗真菌剤（ポリコナゾール）	入	470	280	235	重症又は難治性真菌感染症（外来は不可）又は造血幹細胞移植（深在性真菌症の予防を目的）
⑱シロリムス製剤	入外	470	280	235	リンパ脈管筋腫症の患者
⑲スニチニブ	入外	470	280	235	腎細胞癌の患者
⑳治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）	入外	470	280	235	統合失調症患者

血液学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
血液一般・血液形態	1310 2A000	末梢血液一般 CBC 2A0000000019000	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)			血液 21			1
	2A010	白血球数 WBC 2A0100000019301			フローサイトメ トリー法	M:3900～ 9800 F:3500～ 9100 /μL				
	2A020	赤血球数 RBC 2A0200000019301			シースフロー 電気抵抗検 出法	M:410～530 F:380～480 ×104/μL				
	2A030	ヘモグロビン Hb 2A0300000019301			SLS-Hb	M:13.5～ 17.6 F:11.3～ 15.2 g/dL				
	2A040	ヘマトクリット Ht 2A0400000019301			シースフロー 電気抵抗検 出法	M:36～48 F:34～43 %				
	2A050	血小板数 PLT 2A0500000019301			シースフロー 電気抵抗検 出法	13.0～37.0 ×104/μL				
	2A060	MCV 平均赤血球容積 2A0600000019301			計算法	83～96 fL				
	2A070	MCH 平均赤血球ヘモグロビン量 2A0700000019301			計算法	27～32 pg				
	2A080	MCHC 平均赤血球ヘモグロビン濃度 2A0800000019301			計算法	32～36 %				
	1307 2A110	網状赤血球数 RET/レチクロ 2A1100000019631	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	フローサイトメ トリー法	M:2～27 F:2～26 ‰	血液 12	1～2		1
	2072 2A090	好酸球数 Eo 2A0900000019301	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	フローサイトメ トリー法	300以下 /μL	血液 17	1～2		1
	1303 2A300	鼻汁好酸球 2A3000000063603	42 スライド	塗抹標本 2(冷蔵)	鏡顕法	(-)	血液 15	1～2		1
	1306 2A160	血液像 DIFF 2A1600000019604	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	フローサイトメ トリー法	下記参照 %	血液 15	1～2		1
	2073 2A160	血液像(目視) 2A1600000019604	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	ギムザ染色	下記参照 %	血液 25	1～2		1

●白血球像基準値 単位%

血液像 1306	目視像 2073	名称		基準値
7320		Neut	好中球*	40～70
7307	7321	Stab	桿状核好中球	2～10
7308	7322	Seg	分葉核好中球	40～65
7311	7325	Lympho	リンパ球	25～50
7310	7324	Mono	単球	3～11
7309	7323	Eosino	好酸球	0～5
7312	7326	Baso	好塩基球	0～1

* 好中球 (機械) = 桿状 + 分葉 (目視)

血液学検査

() は保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
凝固・線溶検査	1832 2B030	PT プロトロンビン時間 2B0300000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(冷蔵)	光散乱測定 方式	PT時間: 10~13 (秒) 活性値: 70以上 (%) INR: 0.9~1.1	血液 18	1~2		1
	1833 2B020	APTT 活性化部分トロンボプラスチン時間 2B0200000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(冷蔵)	光散乱測定 方式	26~40 秒	血液 29	1~2		1
	1318 2B100	フィブリノゲン定量 Fib 2B1000000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(冷蔵)	光散乱測定 方式	200~400 mg/dL	血液 23	1~2		1
	1490 2B140	Dダイマー DD 2B1400000022062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス免 疫比濁法	1.0以下 μg/mL	血液 127	1~2		1
	1213 2B120	FDP定量 フィブリンフィブリゲン分解産物/纖維素分解産物 2B1200000023062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(冷蔵)	ラテックス凝 集法	5未満 μg/mL	血液 95	1~2		1
	1214 2B120	尿中FDP 2B1200000001062	9 尿FDP専用	尿 1(冷蔵)	ラテックス凝 集法	0.1未満 μg/mL	血液 77	3~4		3
	2586 2B110	可溶性フィブリンモノマー複合 体定性 SF定性 2B1100000022062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス凝 集法	7.0未満 (一) mg/dL	血液 93	3~5		3
	1244 2B110	フィブリンモノマー複合体 FM定量 2B1100000022023	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス凝 集法	6.1以下 μg/mL	血液 215	3~5	*1 *2	3
	1308 2B200	アンチトロンビン活性 AT活性/AT 2B2000000022315	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	合成基質法	80~130 %	血液 70	3~5		3
	1562 2B200	アンチトロンビン抗原 AT抗原 2B2000000022062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス凝 集法	23.6~33.5 mg/dL	血液 70	3~5		3
	1291 2B210	トロンビン・アンチトロンビン複合体 TAT 2B2100000022052	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	ラテックス凝 集比濁法	4.0未満 ng/mL	血液 166	3~5	*1	3

*1 フィブリンモノマー複合体、トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、プロトロンビンフラグメントF1+2 3項目のうちいずれか複数を同時に測定した場合は主たるもののみ算定する。

*2 フィブリンモノマー複合体 DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。

注意) 明らかに溶血している検体もしくは規定量どおりに採血できていない検体は凝固検査には不適のため「検査不能」、「参考値」となります。



容器NO9
尿中FDP容器

血液学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
凝固・線溶検査	1460 2B260	プラスミノゲン活性 2B2600000022315	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	合成基質法	80～130 %	血液 100	3～6		3
	2B260	プラスミノゲン抗原 2B2600000022315	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス凝集法	9.1～14.5 mg/dL	血液 100	3～6		3
	1397 2B270	アンチプラスミン活性 α2プラスミンインヒビター 2B2700000022315	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	合成基質法	80～130 %	血液 128	3～5		3
	1555 2B280	プラスミン・プラスミンインヒビター複合体 α2PIC 2B2800000022062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス凝集法	0.8以下 μg/mL	血液 150	3～6		3
	1133 2B340	トータルPAI-1 tPA-PAI-1複合体 2B3400000022062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス凝集法	50以下 ng/mL	血液 240	3～6		3
	2728 2B350	第Ⅱ因子凝固活性 F2 2B3500000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠乏血漿による補正法	66.0～118.0 %	血液 223	3～6		3
	2B370	第Ⅴ因子凝固活性 F5 2B3700000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠乏血漿による補正法	73.0～122.0 %	血液 223	3～6		3
	2587 2B380	第Ⅶ因子凝固活性 F7 2B3800000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠乏血漿による補正法	54.0～162.0 %	血液 223	3～6		3
	1565 2B390	第Ⅷ因子凝固活性 F8 2B3900000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠乏血漿による補正法	78.0～165.0 %	血液 223	3～6		3
	2704 2B400	第Ⅸ因子凝固活性 F9 2B4000000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠乏血漿による補正法	67.0～152.0 %	血液 223	3～6		3
	2729 2B410	第Ⅹ因子凝固活性 F10 2B4100000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠乏血漿による補正法	58.0～200.0 %	血液 223	3～6		3
	1569 2B420	第ⅩⅠ凝固因子活性 F11 2B4200000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠乏血漿による補正法	75～145 %	血液 223	3～6		3

() は
保存温度

血液学検査

項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
1570 2B430	第Ⅻ因子凝固活性 F12 2B4300000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ヒト欠血漿 による補正法	36.0～152.0 %	血液 223	3～5		3
2600 2B440	第ⅩⅢ因子凝固活性 F13 2B4400000022315	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	合成基質法	70～140 %	血液 223	3～5		3
2767 2B460	第Ⅷ因子インヒビター定量 F8INH 2B4600000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	Bethesda法	1.0以下 BU/mL	血液 144	3～5		3
2B470	第Ⅸ因子インヒビター定量 F9INH 2B4700000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	Bethesda法	1.0以下 BU/mL	血液 144	3～5		3
1491 2B700	プロテインC活性 2B7000000022315	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	合成基質法	70～140 %	血液 227	3～5		3
1918 2B700	プロテインC抗原 2B7000000022062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	ラテックス凝 集法	70～150 %	血液 220	3～5		3
2658 2B710	プロテインS活性 2B7100000022311	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	PT凝固時間法	63.5～149.0 %	血液 163	3～5		3
1497 2B710	プロテインS抗原 遊離型抗原量 2B7100000022021	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	ラテックス凝 集法	60.0～150.0 %	血液 152	3～5		3
2722 2B480	フォン・ウィルブランド因子活性 VWF活性 2B4800000022316	4 凝固容器(黒)	血漿 0.3(凍結)	固定血小板 凝集法	50～150 %	血液 126	0		3
2B450	フォン・ウィルブランド因子抗 原量 VWF抗原 2B4500000022062	4 凝固容器(黒)	血漿 0.4(凍結)	ラテックス凝 集法	0型：42.0～140.8 A・B・AB型：66.1 ～176.3 %	血液 147	3～5		3
1989 2B730	トロンボモジュリン TM 2B7300000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.6(凍結)	CLEIA法	12.1～24.9 U/mL	血液 204	3～5	血漿検査可 基準値：8.7～22.7 *1	3
1379 2B600	β-TG β-トロンボグロブリン 2B6000000022023	45 PF4・β-T G専用	血漿 0.6(凍結)	EIA法	50以下 ng/mL	血液 171	3～5		3
1378 2B620	PF-4 血小板第4因子 2B6200000022023	45 PF4・β-T G専用	血漿 0.6(凍結)	EIA法	20以下 ng/mL	血液 173	3～5		3

*1 トロンボモジュリン 膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。



容器NO45
β-TG、PF-4専
用容器

一般検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
尿 一 般 検 査	1511 1A990	尿一般定性 1A9900000001901	5 尿スピッツ	尿 5(冷蔵)	試験紙法		尿便 26	1～2	* 1	1
	1A010	蛋白定性 1A0100000001911				(-)				
	1A020	糖定性 1A0200000001911				(-)				
	1A040	ウロビリノーゲン 1A0400000001911				セイジョウ				
	1A055	ビリルビン 1A0550000001911				(-)				
	1A035	pH 1A0350000001911				4.8～7.5				
	1A100	潜血反応 1A1000000001911				(-)				
	1A030	比重 1A0300000001903				1.005～ 1.030				
尿 検 査	1513 1A105	尿沈渣 1A1050000001920	5 尿スピッツ	尿 10(冷蔵)	フローサイトメ トリー法又は 鏡検法		尿便 27	1～2	* 2	1
	2060 1A015	蛋白定量(蓄尿) U-TP 1A0150000004271	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	ピロガールレッ ド法	0.02～0.12 g/day	尿便 7	1～2	蓄尿量、蓄尿時間を記入くださ い	1
	2061 1A015	蛋白定量(随時尿) U-TP 1A0150000004271	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	ピロガールレッ ド法	30以下 mg/dL	生化 I 7	1～2		1
	2062 1A025	糖定量(蓄尿) U-Glu 1A0250000004262	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	ヘキシキナー ゼUV法	0.13～0.50 g/day	生化 I 9	1～2	蓄尿量、蓄尿時間を記載くださ い	1
	2063 1A025	糖定量(随時尿) U-Glu 1A0250000004262	5 尿スピッツ	尿 1(冷蔵)	ヘキシキナー ゼUV法	2～20 mg/dL	生化 I 9	1～2		1

* 1 尿中一般物質定性半定量検査 院内で検査を行った場合のみ算定できる。ただし、尿中一般物質定性半定量検査は判断料は算定できない。

* 2 尿沈渣(鏡検法)、(フローサイトメトリー法) 当該保険医療機関内(院内)で検査を行った場合に算定できる。「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を同時に実施した場合は、主たる点数のみ算定する。「尿中一般物質定性半定量検査」が「尿中特殊物質定性定量検査」において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定する。

※尿沈渣(鏡検法) 尿路系疾患が強く疑われる患者について、保険医療機関(診療所)が衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が速やかに当該保険医療機関(診療所)に報告された場合は算定できる。

※細菌顕微鏡検査と尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、細菌顕微鏡検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

尿検体の種類について		
種類	内容	適した用途
早朝第一尿	就寝前に排尿し、朝起きがけ一に採尿した尿。尿は酸性に傾き、濃縮され、成分の安定性が高い。	尿一般・尿沈渣・小児から思春期の子供(起立性蛋白の除外)の検査。
早朝第二尿	朝起きがけに排尿し、次に膀胱内に貯留した尿。	早朝空腹時の血糖を反映。骨粗鬆症検査(日内変動をさけるため一定の条件での採尿が可能)
随時尿	任意の時間に採取した尿。尿は希釈傾向にあり、陰性を呈しやすい。	スクリーニング検査
24時間尿	朝起きがけの排出尿は捨て、その後同時刻まで排出した尿をすべて集めたもの	腎機能の評価。1日の摂取食塩量の把握や摂取蛋白質量の推定。

() は
保存温度

一般検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
一般検査・その他	1522 1B010	虫卵塗抹 1B0100000015701	27 糞便一般用	便 (冷蔵)	塗抹法	(-)	尿便 20	3~5		3
	1523 1B015	虫卵集卵 1B0150000015701	27 糞便一般用	便 (冷蔵)	集卵法	(-)	尿便 15	3~5		3
	1309 1B040	便ヘモグロビン1日法 1B0401302015062	28 便中ヘモグロビン	便	ラテックス凝集法	(-)	尿便 37	1~2		1
	1360 1B040	便ヘモグロビン2日法 1B0401301015062	28 便中ヘモグロビン	便	ラテックス凝集法	(-)	尿便 74	1~2		1
	2508 1B075	脂肪染色(スダンⅢ染色) 1B0750000015467	27 糞便一般用	便 拇指頭大(冷蔵(凍結不可))	スダンⅢ染色鏡検	(-)	尿便 20	3~5		3
	2438 1B080	赤痢アメーバ(便) 1B0800000015723	27 糞便一般用	便 拇指頭大(室温)	鏡頭法(集シスト法)	(-)	45	3~5		3
	2202	アカントアメーバ アカンソアメーバ	52 アカントアメーバ専用	(室温)	培養			8~15	下記参照	3
精液検査	1275 1Z992	精液一般検査 1Z9920000920000	 5 尿スピッツ	精液 1(冷蔵)			尿便 62	1~2	「WHO」ラボマニュアルに準ずる	1
	1Z615	精子濃度 1Z6160000060310				15以上 ×10 ⁶ /mL				
	1Z625	運動率 1Z6250000060320				40以上 %				
	1Z620	正常形態率 1Z6190000060920				4以上 %				



容器No.52
アカントアメーバ専用容器

アカントアメーバ（検体必要量：検査材料）

- 潰瘍部の側縁部角膜実質組織及び目の洗浄液
- コンタクトレンズケース内保存液

両方を測定いたします。

●アカントアメーバ（備考） アメーバは水中・土壌中などの環境に常在するので、検体採取時はこれらを混入しないよう、クリーンな室内で採取してください。必ずアカントアメーバ採取セットを用い、輸送袋に入れご提出ください。

●便ヘモグロビン検体の安定性

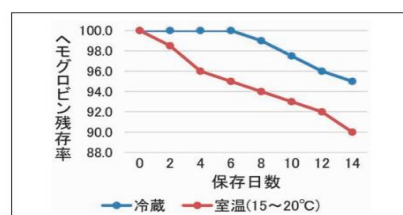


図4 専用容器採取時のヘモグロビンの安定性
リーフレット「Hb 安定性データ」(栄研化学株式会社)より

専用容器に採取後、室温で3日
以内、冷蔵保存で1週間以内に
提出ください

一般検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
穿 刺 液 検 査	1150	穿刺液一般 胸水・腹水 等 1Z0000000040920	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 1(冷蔵)			* 1	1~2	比重・リバルタ反応・細胞数・ 細胞分類を含みます	1
	2496	細胞数(穿刺液) 関節液 等 1Z030	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 3(冷蔵)	計算盤法		* 2	1~2		1
	2497	細胞分類(穿刺液) 関節液 等 1Z030	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 8(冷蔵)	計算盤法		* 2	1~2	組織球・リンパ球・好中球・好 酸球・好塩基球等を分類します	1
	1245	関節液一般検査 関節液中結晶鑑別 1Z505	5 尿スピッツ	関節液 3(冷蔵)	偏光顕微鏡 による鏡検法		尿便 50	3~5	尿酸Na結晶、ピロリン酸Caを報 告します	3
	1543	蛋白定量(穿刺液) 1Z010	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 0.5(冷蔵)	ピロガールレッ ド法		生化 I 11	1~2		1
	1151	糖定量(穿刺液) 1Z015	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 0.5(冷蔵)	ヘキシナーゼUV法		生化 I 11	1~2		1
	1937	LDH(穿刺液) 3B055	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 0.5(冷蔵)	酵素法		生化 I 11	1~2		1
	1531	髄液一般検査 細胞数・細胞分類 1C010	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	鏡検法		尿便 77	1~2	細胞分類では単核球 (M)、多核球 (N) を%にて報告します	1
	1533	蛋白定量(髄液) 1C010	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	ピロガールレッ ド法	10~40 mg/dL	生化 I 11	1~2		1
	1532	糖定量(髄液) 1C015	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	ヘキシナー ゼUV法	50~75 mg/dL	生化 I 11	1~2		1
	1534	Cl(クロール)(髄液) 3H020	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	イオン選択電 極法	120~125 mEq/L	生化 I 11	1~2		1

* 1 胸水・腹水採取料に含まれます。なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、排泄物、滲出物又は細菌顕微鏡検査にて、細胞診検査を行った場合には細胞診検査にて算定する。

* 2 関節液採取料に含まれます。

関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につき1回限り算定する。なお、当該検査と排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

() は
保存温度

微生物学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
一般細菌検査	1420 6A010	一般細菌塗抹	65P参照	尿・喀痰・皮膚 など/その他 65P参照	グラム染色法	(-)	微生物 67	2～3		8
	1421 6B010	培養同定(口腔、気道)	65P参照	喀痰・咽頭 炎/その他 65P参照	各種培地を 使用		微生物 180	4～6		8
	1422 6B010	培養同定(消化管)	65P参照	糞便・胆汁・胃 液/その他 65P参照	各種培地を 使用		微生物 200	4～6		8
	1423 6B010	培養同定(泌尿器生殖器)	65P参照	尿・分泌物/ その他 65P参照	各種培地を 使用		微生物 190	4～6	淋菌、トリコモナスが目的の場合は 常温保存	8
	1424 6B010	培養同定(血液、穿刺液)	65P参照	血液 65P参照	各種培地を 使用		微生物 240	4～6	血液培養の場合、自動的に嫌気培養 を実施します 血液培養、髄液は室温保存 * 1	8
	1425 6B010	培養同定(その他)	65P参照	その他の材料 65P参照	各種培地を 使用		微生物 180	4～6		8
	1426 6B010	簡易培養	65P参照	尿/その他 65P参照	平板法、ダイ アスライド		微生物 60	4～16	生殖分泌はカンジダ、 便はサルモネラ・赤痢、 皮膚はカンジダ・白癬菌のみ検査可 能です	8
	1428 6B010	嫌気性培養	65P参照	膿・血液・穿刺 液/その他 65P参照	HK半流動培 地等		微生物 137	4～11		8
	1736 6B010	定量培養	65P参照	尿 65P参照	平板法		微生物 未保点	4～5		8
	1949 6C010	細菌感受性1菌種	65P参照	培養同定に 同じ 65P参照	微量液体希 釈法		微生物 185	4～5		8
	1950 6C010	細菌感受性2菌種	65P参照	培養同定に 同じ 65P参照	微量液体希 釈法		微生物 240	4～5		8
	1951 6C010	細菌感受性3菌種以上	65P参照	培養同定に 同じ 65P参照	微量液体希 釈法		微生物 310	4～5	* 2	8
	1113 6B830	大腸菌血清型別	65P参照	便 65P参照	血清抗体法		免疫 175	4～6	* 3	8
	6C050	酵母様真菌薬剤感受性試験	65P参照	培養同定に 同じ 65P参照	微量液体希 釈法		微生物 165	7～9	対象薬剤は下記参照 * 4	8

* 1 血液を2か所以上から採取した場合に限り、血液または穿刺液を2回算定できる。この場合、嫌気性培養加算は2回算定できる。

* 2 **大腸菌血清型別** 細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、大腸菌ペロトキシン定性により毒素を確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認され、並びに血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合、細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。

* 3 **大腸菌ペロトキシン定性** 細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。大腸菌ペロトキシン定性のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、細菌培養同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

* 4 **酵母様真菌薬剤感受性試験** 深在性真菌症（カンジダ、クリプトコックスに限る）であり、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り算定する。

酵母様真菌薬剤感受性			
略称	薬剤名	略称	薬剤名
MCFG	ミカファンギン	ITCZ	イトラコナゾール
AMPH-B	アムホテリシンB	VR CZ	ポリコナゾール
5-FC	フルシトシン	MCZ	硝酸ミコナゾール
FLCZ	フルコナゾール	CPFG	カスポファンギン

微生物学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
抗 酸 菌 検 査	1468 6A205	抗酸菌塗抹 (蛍光法) 6A2050000061718	65P参照	喀痰・尿、 穿刺液など 65P参照	蛍光法		微生物 65	2〜3	集菌法で実施	8
	1203 6B305	抗酸菌培養 抗酸菌分離培養(MGIT法) 6B3050000061747	65P参照	喀痰、気管 支洗浄など 65P参照	蛍光センサー 法		微生物 315	3〜42	酵素感受性:2週間 (中間報告) 蛍光センサー法:6週間 (最終報 告) * 1	8
	1419 6C105	抗酸菌感受性4薬剤以上 6C1050000061762	65P参照	分離した菌 株 65P参照	液体培地希 釈法		微生物 415	1ヶ月 〜	* 2	8
	2255 6B325	結核菌群抗原 結核菌群抗原定性 6B3250000080190	65P参照	分離した菌 株 65P参照	ICA法		微生物 291	2〜3		8
	1400 6B315	抗酸菌同定 6B3150000061299	65P参照	分離した菌 株 65P参照	質量分析		微生物 361	4〜43	* 3	8
	1408 6B620	結核菌群核酸同定PCR法 結核菌群核酸検出 6B6200000061851	65P参照	体液、組織、 気管支洗浄な ど 65P参照	リアルタイム PCR法		微生物 410	3〜5	* 4	8
	2406	結核菌群核酸同定LAMP法 結核菌群核酸検出	65P参照	体液、組織、 気管支洗浄な ど 65P参照	LAMP法		微生物 410	2〜3	* 4	8
	1465 6B621	MAC核酸検出 アビウム・イントラセラーPCR 6B6210000061862	65P参照	体液・組織・ 気管支洗浄液 など 65P参照	リアルタイム PCR法		微生物 421	3〜5	* 5	8
	2366 5E301	QFTゴールドプラス 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 5E3010000019023	33 QFT容器	全血添加物 入 6(冷蔵)	EIA法		微生物 593	3〜5	* 6	8
	2437 5E301	T-SPOT. TB 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 5E3010000019031	59 T-SPOT. TB	全血添加物入 6(室温)	ELISPOT法		微生物 593	3〜5	受付: 月〜金曜日 (休業日前日受付不可) * 6	6

- *1 抗酸菌分離培養は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時にまたは一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
抗酸菌分離培養（液状培地法）は、液状培地を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサーまたは、酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。
抗酸菌分離培養は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合において算定できる。
- *2 抗酸菌薬剤感受性試験は、直接法、間接法等の方法および培地数にかかわらず、感受性試験を行った薬剤が4種類以上のの場合に限り算定する。
混合薬剤検査においても、使われた薬剤が4種類以上のの場合に限り算定する。
- *3 抗酸菌同定は、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。
- *4 結核菌群核酸検出は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
- *5 ア、マイコバクテリウム・アビウムおよびイントラセラー（MAC）核酸検出は、他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる
イ、抗酸菌同定と併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。
- *6 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察または画像診断により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。



酵母様真菌薬剤感受性			
略称	薬剤名	略称	薬剤名
MCFG	ミカファンギン	ITCZ	イトラコナゾール
AMPH-B	アムホテリシンB	VRCZ	ポリコナゾール
5-FC	フルシトシン	MCZ	硝酸ミコナゾール
FLCZ	フルコナゾール	CPFG	カスポファンギン

抗酸菌感受性薬剤（10剤）			
略称	薬剤名	略称	薬剤名
SM	ストレプトマイシン	TH	エチオナミド
EB	エタンブトール	PAS	パラアミノサリチル酸
KM	カナマイシン	INH	イソニアジド
REP	リファンピシン	CS	サイクロセリン
LVFX	レボフロキサシン	EVM	エンビオマイシン

非結核性抗酸菌薬剤（MIC）* ご依頼時は連絡ください

略称	薬剤名	略称	薬剤名
SM	ストレプトマイシン	TH	エチオナミド
EB	エタンブトール	RBT	リファブチン
KM	カナマイシン	CAM	クラリスロマイシン
REP	リファンピシン	AMK	アミカシン
LVFX	レボフロキサシン		

抗酸菌感受性薬剤（10剤）			
略称	薬剤名	略称	薬剤名
SM	ストレプトマイシン	TH	エチオナミド
EB	エタンブトール	PAS	パラアミノサリチル酸
KM	カナマイシン	INH	イソニアジド
REP	リファンピシン	CS	サイクロセリン
LVFX	レボフロキサシン	EVM	エンビオマイシン

結核菌感受性薬剤	
PZA	ピラジナミド

QFTおよびT-SPOTの判定基準		
判 定	データの解釈	
	QFT	T-SPOT
陰 性	結核感染していない	
判定保留	初回：再度採血して再検査 再検：感染リスクの度合を考慮し、総合的に判断	
陽 性	結核感染を疑う	
判定不可	①免疫不全などが考えられるため、判定できません	
判定不能	②陰性コントロールに非特異的反応が認められるため判定できせん	

微生物学検査のご依頼について

- ①材料採取部位ならびに材料名を必ずご明記ください。
- ②薬剤投与中の材料採取の場合は、使用薬剤名をご明記ください。
- ③菌株接種培地にて、培養・同定のご依頼の場合は、培地を室温にて保存してください。
- ④必要な場合は目的菌をご依頼ください。特に性行為感染症における淋菌、腸管感染症におけるカンピロバクター、腸管出血性大腸菌を疑う場合は必ずご依頼ください。

主要材料の接種保存方法

①口腔・気道・呼吸器系材料

●喀痰

口腔内在菌による汚染を防ぐため、滅菌生理食塩水で2～3回が洗いしてから喀出痰を接種します。できるだけ唾液・鼻粘液の混入は避けるようにしてください。

●咽頭液

滅菌生理食塩水でうがった後、滅菌綿棒（シードスワブ2号）で病変部をよく擦って粘液を採取してください。

②消化器系材料

●糞便

急性期の排出便を採取します。糞便の量は1 g 程度とし、輸送培地（シードスワブ2号）の深部に入れてください。便の状態を含め臨床所見は病原菌検出に大きな手がかりとなりますので、必ずご記入願います。

●胆汁

胆管内胆汁（A胆汁）、胆嚢内胆汁（B胆汁）、肝内胆汁（C胆汁）のうち、検査には通常、胆嚢内胆汁（B胆汁）を培養します。滅菌スピッツに2～3mL採取してください。

③泌尿器・生殖器系材料

●尿

患者自身が採尿する場合、適切な指示をしてください。男性の場合は、陰茎先端部を滅菌水で拭いた後に滅菌尿コップ等に取り、直ちに滅菌スピッツに入れてください。女性の場合は、膣などの常在菌汚染があるため、充分洗浄してからの採尿となります。消毒綿で消毒後、滅菌水を浸したガーゼで数回洗浄します。ガーゼは1回毎に取り替えるように指示してください。尿は滅菌尿コップ等に取り、直ちに滅菌スピッツに入れてください。いずれの場合も早朝尿が望ましく、前半尿を捨て、中間尿を取ってください。

●生殖器分泌物

男性は、陰茎をしごき、分泌物を採取してください。
女性は、外陰部を消毒した後、陰鏡を用いて滅菌綿棒で後陰内蓋部より採取してください。淋菌の疑いがある場合、検出率向上のため必ず目的菌に指定してください。**淋菌を疑われる場合は、室温保存**してください。

④血液・穿刺液

●血液

採血に当たり、穿刺部位を十分に消毒してください。消毒方法は、70%アルコールで穿刺部位を中心として円を外側に向かい描くように拭いていきます。その後、少し擦るようにします。乾燥後、ヨードチンキで同様の方法で消毒します。1分後に注射器で採血します。血液培養用ボトルは、あらかじめキャップを取り、ゴム上部を70%アルコールで消毒します。培養用ボトルへの血液採取量は3～10mLです。

接種後の培養用ボトルは、常温保存です。ふ卵器にはいれないでください。

●髄液

採取に当たっての皮膚の消毒は、血液培養の場合に準じて行ってください。

⑤そのほかの部位

●膿瘍・創傷

皮下組織や粘膜下の閉鎖性の膿瘍は、穿刺部位を消毒後注射器で採取し、滅菌スピッツに入れてください。開放性病巣のものは、化膿巣の周囲を清掃後、滅菌綿棒で膿性部を採取し、指定容器（シードスワブ2号）に入れてください。**ガーゼでの提出は検出率の低下をまねくおそれがあります**ので、ご遠慮ください。

細菌検査の材料とよく使われる容器

容器 NO	容器名	材料										保存	
		尿	尿道分泌物	咽頭粘膜	腔分泌物	喀痰	膿（開放）	膿（非開放）	胸水・髄液	血液	耳漏		便
5	尿スピッツ	●							●				注1
27	糞便一般											●	冷
54	喀痰容器					●							冷
54	シードスワブ2号		●	●	●		●	●			●	●	冷
55	血液培養									●			室

注1：目的菌により保存方法は異なります

病理学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
病理・組織検査	1346	病理組織1臓器	40 病理組織検査用	ホルマリン固定組織	HE染色、他		病理学 860	3～5		1
	1348	病理組織2臓器	40 病理組織検査用	ホルマリン固定組織	HE染色、他		病理学 1720	3～5		1
	1350	病理組織3臓器以上	40 病理組織検査用	ホルマリン固定組織	HE染色、他		病理学 2580	3～5		1
		ブロック作成		ホルマリン固定組織	切り出し・包埋			3～5		1
		未染標本作成(ホルマリン固定)		ホルマリン固定組織	切り出し、包埋、薄切、染色			3～5		1
		未染標本作成(パラフィンブロック)		パラフィンブロック	薄切			2～3		1
		染色標本作成(ホルマリン固定)		ホルマリン固定組織	切り出し、包埋、薄切、染色			3～5		1
		染色標本作成(パラフィンブロック)		パラフィンブロック	薄切			2～3		1
		染色標本作成(未染標本スライド)		未染標本スライド	染色			1～2		1

検査実施料の算定例（令和6年6月）

臓器数	実施料	算定例	肉眼的所見(大腸)
1臓器	860点	胃生検、十二指腸生検、食道生検、肺生検、肝生検、腎生検、胆のう、虫垂、乳腺腫瘍、前立腺、子宮頸部生検、子宮内容物、気管支＋肺、上行結腸＋横行結腸＋下行結腸、子宮体部＋子宮頸部、胃＋十二指腸、小腸、直腸	
2臓器	1720点	食道生検＋胃生検、胆のう生検＋虫垂、卵巣＋輸卵管、腎＋尿管、子宮筋腫(子宮＋卵巣)、睪丸＋副睪丸、胃癌(胃＋所属リンパ節)、乳癌(乳腺＋所属リンパ節)	
3臓器以上	2580点	回盲部腫瘍(大腸＋小腸＋虫垂＋所属リンパ節)	

- ※ リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として算定します。
但し、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数えるものとします。
- ※ 大腸生検については右図の肉眼的所見欄の大腸図の太線による臓器算定区分があり、3臓器を限度に臓器加算できます。
- ※ 病理組織学的検査にあたって、免疫抗体法を用いた検査を行った場合は、方法(蛍光抗体法、酵素抗体法)、試薬の種類にかかわらず所定点数に400点を加算することができます。
但し、1臓器につき1回のみの算定となります。
- ※ 確定診断の為に4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、免疫抗体法を実施した場合には、所定点数に1200点を加算することができます。
原発不明癌・原発性脳腫瘍・悪性リンパ腫・悪性中皮腫・肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)・消化管間質腫瘍(GIST)・慢性腎炎・内分泌腫瘍・軟部腫瘍・皮膚の血管炎・水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)・悪性黒色腫・筋ジストロフィーまたは筋炎が疑われる症例に限る。

() は
保存温度

病理学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
病理・組織検査	1627 4H010	エストロゲン・レセプター ER 4H0100000070666		パラフィンブロック・未染 標本スライド	免疫組織化学(IHC法)		病理 720	3~5 * 1		1
	1389 4H015	プロゲステロン・レセプター PgR 4H0150000070666		パラフィンブロック・未染 標本スライド	免疫組織化学(IHC法)		病理 690	3~5 * 1		1
	2404	エストロゲンレセプター/プロゲ ステロンレセプター ER/PgR		パラフィンブロック・未染 標本スライド	免疫組織化学(IHC法)		病理 900	3~5 * 1		1
	2405 5D590	乳癌HER2/neu IHC法 5D5900000070666		パラフィンブロック・未染 標本スライド	免疫組織化学(IHC法)		病理 690	3~5 * 2		1
	2219 5D590	胃癌HER2 IHC法 5D5900000099666		パラフィンブロック・未染 標本スライド	免疫組織化学(IHC法)		病理 690	3~5 * 2		1
	2548 5D597	肺癌PD-L1タンパク/22C3 IHC法 5D5970000070666		パラフィンブロック・未染 標本スライド	免疫組織化学(IHC法)		病理 2700	3~5 * 3		1

注) 弊社にて診断を行っている場合は、依頼書のみ提出ください(材料の提出は不要)

切り出しや再固定、脱脂、脱灰等を必要とする場合、さらに所要日数を要することがありますので、ご了承ください

* 1 ER免疫染色とPgR免疫染色 同一月に実施した場合、主たる項目の所定点数に180点を加算する。


* 2 HER2タンパク 半定量検査又はEIA法(酵素免疫測定法)による病理標本作製を行った場合に限り算定する。なお、HER2遺伝子標本作製を同一の目的で実施した場合は3050点を算定する。

* 3 PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法) 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤又は抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

●病理検査の流れ

●病理検査報告日数

月	火		水		木		金		土	月	火		水		木		金		月
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM
提出	受付	切出し	薄切	診断	→	→	→	結果出力	結果報告										
	提出	受付	切出し	薄切	診断	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		提出	受付	切出し	薄切	診断	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
			提出	受付	切出し	薄切	診断	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
				提出	受付	切出し	薄切	診断	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
					提出	受付	切出し	薄切	診断	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

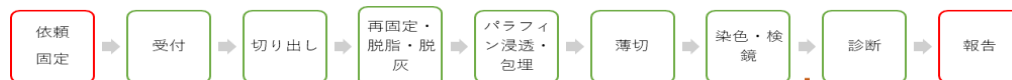

特殊染色*・免疫染色



容器NO40
ホルマリン容器

病理学検査

()は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
細胞診	1620 7A020	細胞診婦人科材料 7A0201652076650	42 スライド	その他の材料 少量検査不能 (室温)	パパニコロウ 染色	陰性	病理学 150	4〜9		7
	1625	細胞診その他の材料	下記参照	その他の材料	パパニコロウ 染色	陰性	病理学 190	4〜9	穿刺液の場合ギムザ染色も実施	7
	2466 7A020	細胞診婦人科 液状化検体 7A0208910085433	51 細胞診婦人科・HPV	液状化検体 少量検査不能 (室温)	LBC	陰性	病理学 186	4〜9	同一検体で婦人科液状化検体細胞診との依頼可	7

その他の材料と容器	
喀痰	喀痰容器
蓄痰細胞診 (サコマ)	サコノマ容器
尿。胸水・腹水、 気管支洗浄液	尿スピッツ



判定基準

病理	細胞診
Group分類	クラス判定
Group X 生検組織診断ができない不適材料	Class I 異型または異常細胞を認めない
Group 1 正常組織および非腫瘍性病変	Class II 異型または異常細胞を認めるが悪性の疑いのないもの
Group 2 腫瘍性（腺腫または癌）か非腫瘍性か判断困難な病変	Class III 悪性の疑いのある異常細胞を認めるが悪性といいきれない
Group 3 腺腫	Class IV 悪性細胞と判断しうるが、比較的悪性の特徴に乏しくかつ少数である
Group 4 腫瘍と判定される病変のうち、癌が疑われる病変	Class V 明らかな悪性細胞を多数認める
Group 5 癌	

※癌取り扱い規約などに順次、ご報告します。

ベセスダシステム判定

細胞診断結果	略語	推定される病変	総括区分	日母分類	運用例
標本不適正			判定不能		再検査
上皮内病変および悪性を否定する	NILM	非腫瘍性所見 炎症	陰性	I、II	異常なし：定期健診
Mild dysplasiaを否定できない	ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	疑陽性	II-IIIa	要精密検査 ①HPV検査による判定が望ましい HPV⊖：1年後の細胞診HPV併用検査 HPV⊕：コルポ、生検 ②HPV検査非施行 6ヶ月以内細胞診検査
HSILを除外できない	ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	疑陽性	III-IIIb	要精密検査：コルポ、生検
Mild dysplasia	LSIL	軽度異形成	疑陽性	IIIa	要精密検査：コルポ、生検
Moderate dysplasia	HSIL	中等度異形成	疑陽性	IIIb-IV	要精密検査：コルポ、生検
Severe dysplasia		高度異形成			
CIS		上皮内癌	陽性		
Squamous cell carcinoma	SCC	扁平上皮癌	陽性	V	要精密検査：コルポ、生検
Atypical glandular cells	AGC	腺異型または腺癌疑い	疑陽性	III	要精密検査：コルポ、生検 頸管および内膜細胞診または組織診
Adenocarcinoma in situ	AIS	上皮内腺癌	陽性	IV	要精密検査：コルポ、生検 頸管および内膜細胞診または組織診
Adenocarcinoma	Adeno	腺癌	陽性	V	要精密検査：コルポ、生検 頸管および内膜細胞診または組織診
Other malignant そのほか悪性腫瘍	Other	その他の悪性腫瘍	陽性	V	要精密検査：病変検索

当日送り検査一覧

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
当日 送 り 検 査 一 覧	1806 5F194	サイトメガロウイルス抗原C10,C11 CMV抗原C10,C11 5F1941420019171	6 EDTA2Na管	全血添加物入 3(冷蔵)	間接酵素抗体法	判定 (一)	免疫 366	4~9	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *4	3
	1991 5F194	サイトメガロウイルス抗原C7-HRP CMV抗原C7-HRP 5F1941420019171	6 EDTA2Na管	全血添加物入 3(冷蔵)	直接酵素抗体法	判定 (一)	免疫 356	4~9	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *4	3
	1394 5I014	DLST1薬剤 薬剤リンパ球刺激試験 5I0141301019814	12 ヘパリン管(黄)	ヘパリン加血(黄) 10(室温)	3H-サイミジン取込み能	S. I. + 1.8 ±1.6 ~1.7	免疫 345	8~10	月~金・採血日午前中に提出 *1 *2	3
	1202 5K020	HLAタイピング(A, B) 血清対応型タイピング 5K0200000019907	13 EDTA2K	EDTA加血液 5(冷蔵)	PCR-rSSO法 PCR-SSP法	49ページ 参照	未保点 未保点	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可	3
	1313 0	HLAタイピング(DR) 血清対応型タイピング 0	13 EDTA2K	EDTA加血液 5(冷蔵)	PCR-rSSO法 PCR-SSP法	49ページ 参照	未保点 未保点	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可	3
	1470 5G525	血小板表面IgG PAIgG 5G5250000019021	23 血小板表面IgG用	ACD加血液 8.5(室温)	EIA法	27.6未満 ng/10 ⁷ PLT	免疫 190	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *1	3
	2537 5I020	T細胞・B細胞百分率 5I0200000019662	12 ヘパリン管(黄)	ヘパリン加血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	T細胞 (CD3) 54.3 ~81.9 B細胞 %	免疫 193	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	2437 5E301	T-SPOT. TB 結核菌特異的インターフェロ-γ産生能 5E3010000019031	59 T-SPOT. TB	全血添加物入 6(室温)	ELISPOT法	—	微生物 593	3~5	受付: 月~金曜日 (休業日前日受付不可) *6	6
	2202 0	アカントアメーバ アカンソアメーバ 0	52 アカントアメーバ専用	アカントアメーバ専用 (室温)	培養		0	8~15	下記参照	3
		Singl-color解析による 細胞表面マーカー検査 0	12 ヘパリン管(黄)	ヘパリン加血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ参 照 0	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3
		Two-color解析による 細胞表面マーカー検査 0	12 ヘパリン管(黄)	ヘパリン加血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ参 照 0	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(分離培養) PHA 5I0100000019814	12 ヘパリン管(黄)	ヘパリン加血(黄) 5(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S. I. 147.5 ~1251.3 0	免疫 345	7~9	月~金・採血日午前中に提出 *1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(分離培養) Con-A 5I0100000019814	12 ヘパリン管(黄)	ヘパリン加血(黄) 5(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S. I. 38.1 ~385.5 0	免疫 345	7~9	月~金・採血日午前中に提出 *1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(微量全血培養) PHA 5I0100000019814	12 ヘパリン管(黄)	ヘパリン加血(黄) 1(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S. I. 38.6~ 898.5 0	免疫 345	8~10	月~金・採血日午前中に提出 *1	3

緊急検査受託項目


2026年4月現在

登録衛生検査所 (株) 臨床宮崎
宮崎市田吉6269番地2
TEL 0985-52-6688
FAX 0985-52-8093


部 門	検 査 項 目		
生 化 学	総蛋白	アルブミン	総ビリルビン
	直接ビリルビン	AST (GOT)	ALT (GPT)
	LD	ALP	γ-GTP
	LAP	コリンエステラーゼ	CK
	アミラーゼ	尿酸	尿素窒素
	クレアチニン	Na・Cl	K
	カルシウム	無機リン	マグネシウム
	総コレステロール	HDLコレステロール	LDLコレステロール
	中性脂肪	血清鉄	UIC
	TIBC	フェリチン	KL-6
	血糖	血中アンモニア	CRP定性
	CRP定量	ASO	
血 液 学	末梢血液一般	血液像 (自動機械法)	血液像 (鏡検法)
	網状赤血球数	HbA1c	
	ABO式血液型	Rh式血液型	不規則性抗体スクリーニング
凝固検査	PT	APTT	フィブリノーゲン
	Dダイマー	FDP	
感染症	RPR定性・定量	TPHA定性・定量	
	HBs抗原	HBs抗体	HCV抗体
	HIV抗原抗体	HTLV1抗体	
リウマチ関連	RF	抗CCP抗体	MMP-3
心疾患関連	BNP	NT-proBNP	心筋トロポニンT定性
甲状腺関連	TSH	FT3	FT4
	TRAb	抗Tg抗体	抗TPO抗体
	サイログロブリン		
婦人科ホルモン	HCG (血液、尿)	FSH	E2
	PRL	プロゲステロン	LH
腫瘍マーカー	PSA	CEA	CA19-9
	AFP		
薬 物	ジゴキシン	フェノバルビタール	フェニトイン
	カルバマゼピン	バルプロ酸Na	
尿・糞便	尿一般定性	尿蛋白定量	尿糖定量
	尿沈査	尿アミラーゼ	尿クレアチニン
	尿アルブミン	便へモ1・2日法	ノロウイルス抗原
その他	尿素呼気試験	ヘリコバクターピロリ抗体	血液ガス分析
	コロナウイルスPCR	精液検査	



緊急報告を行う検査項目・報告値

項目名	緊急報告値（単位）		備考
総蛋白	2.0以下、10.0以上	(g/dL)	
アルブミン	1.0以下、7.0以上	(g/dL)	
総ビリルビン	10.0以上	(mg/dL)	
AST (GOT)	500以上	(IU/L)	
ALT (GPT)	500以上	(IU/L)	
LD	500以上	(IU/L)	
ALP	350以上	(IU/L)	小児は除く
γ-GTP	1000以上	(IU/L)	
コリンエステラーゼ (CHE)	800以上	(IU/L)	
CK	1000以上	(IU/L)	
アミラーゼ(AMY)	500以上	(IU/L)	
尿素窒素(BUN)	50.0以上	(mg/dL)	透析患者は除く
クレアチニン(CRE)	5.0以上	(mg/dL)	透析患者は除く
ナトリウム (Na)	120以下、160以上	(mEq/L)	
クロール (CL)	80以下、120以上	(mEq/L)	
カリウム (K)	2.5以下、6.5以上	(mEq/L)	
無機リン	6.0以上	(mg/dL)	透析患者は除く
マグネシウム	1.5以下、5.0以上	(mg/dL)	
CRP定量	20.0以上	(mg/dL)	
血糖	50以下、300以上	(mg/dL)	
アンモニア	200以上	(μg/dL)	
白血球	1000以下、20000以上	(/μL)	
赤血球	200以下、650以上	($\times 10^4 \mu\text{L}$)	透析患者は除く
ヘモグロビン	5.0以下	(g/dL)	
ヘマトクリット	15.0以下	(%)	
血小板	3.0以下、70.0以上	($\times 10^4 \mu\text{L}$)	
血液像	異常細胞出現		
ABO式血液型	おもて、うら不一致		
不規則性抗体	陽性		
PT-INR	3.0以上		
APTT	40.0以上	(秒)	
フィブリノーゲン	450以上	(mg/dL)	
NT-proBNP	35000以上	(pg/mL)	
BNP	2900以上	(pg/mL)	
心筋トロポニンT定性	(＋)		
ジゴキシン	2.0以上	(ng/mL)	
フェノバルビタール	40.0以上	(μg/mL)	
フェニトイン	20.0以上	(μg/mL)	
カルバマゼピン	15.0以上	(μg/mL)	
バルプロ酸Na	150.0以上	(μg/mL)	
テオフィリン	20.0以上	(μg/mL)	

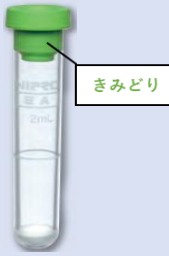1	生化学容器	 容量：8.5mL・3.5mL 内容：血清分離剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 生化学項目	2	末血容器	 容量：2.0mL 内容：EDTA-2K 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 末梢血一般 血液型 HbA1c	3	血糖容器	 容量：2.0mL 内容：フッ化Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 血糖検査 HbA1c
4	凝固容器	 容量：1.9mL 内容：3.2%クエン酸Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 凝固検査項目	5	滅菌ポリスピッツ	 容量：1.0mL 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 尿検査、尿細胞診 尿細菌	6	EDTA-2Na容器	 容量：2mL、5mL 7mL 内容：EDTA2Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 BNP、レニン、ACTH アルドステロン、アミノ酸分析
7	血沈専用容器	 容量：1.6mL 内容：3.2%クエン酸Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 血沈	8	ヘパリン容器	 容量：5.0mL、10.0mL 内容：ヘパリンNa 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 薬物（一部） 脂肪酸4分画 血中鉛	9	尿中FDP	 容量：1.0mL 内容：トロンビン酵素 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 尿中FDP
10	乳酸・ピルビン酸容器	 容量：1.0mL 内容：徐蛋白液1.0mL 保存方法：冷蔵 有効期間：容器表示 主な検査項目 乳酸、ピルビン酸	11	EDTA-アプロニチン	 容量：2.0mL 内容：EDTA2Na アプロニチン 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 薬物（一部） 脂肪酸4分画	12	細胞性免疫専用容器 細胞表面マーカー	 容量：10.0mL 内容：ヘパリンNa 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 DLST・細胞表面マーカー 細胞性免疫（血液） 染色体検査（血液）
13	遺伝子検査（血液）	 容量：6.0mL 内容：EDTA2K （スプレーコート） 有効期間：容器表示 主な検査項目 遺伝子診断検査 （血液） * 染色体検査不可	16	遺伝子検査（骨髄）	 容量：15.0mL 内容： 保存方法： 有効期間：容器表示 主な検査項目 遺伝子診断検査	18	ウイルス遺伝子（血清）	 容量：5.0mL 内容：凝固促進剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 HCV-DNA HBV-DNA

容器一覧

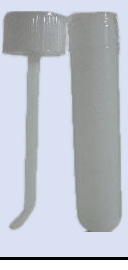20 エンドトキシン・β-Dグルカン  容量：2.0mL 内容：ヘパリンNa 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 エンドトキシン（血液） （1→3）-β-Dグルカン	21 HIV  容量：5.0mL 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 HIV確認検査	23 血小板表面IgG用  容量：8.5mL 内容：ACD液 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 PAIgG
24 エンドトキシン・透析  容量：4.0m 内容：添加剤 保存方法：冷蔵 有効期間：容器表示 主な検査項目 エンドトキシン透析液	25 尿中ミオグロビン  容量：4.0～8.0mL 内容：保存剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 尿中ミオグロビン	26 NMP22専用容器  容量：5.0mL 内容：安定化剤 保存方法：室温・遮光 有効期間：容器表示 主な検査項目 NMP22
27 糞便一般用  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 糞便検査 寄生虫 CDトキシン	28 便中ヘモグロビン  容量：適量 内容： 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 便中ヘモグロビン	31 呼吸採取パック  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 尿素呼吸試験
33 QFT容器  容量：6.0mL 内容：ヘパリンリチウム 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 QFTゴールドプラス	34 STD核酸同定容器（子宮頸管・咽頭）  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 淋菌PCR クラミジアPCR	34 STD核酸同定容器（尿・うがい）  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 淋菌PCR クラミジアPCR
35 プレイン管  容量：6.0mL 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 薬物（一部） 間接クームス	36 遺伝子一般（血清）  容量：3.0mL 内容：凝固促進剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 HCVRNAジェノタイプ	40 病理組織検査容器  容量：ホルマリン お客様にて分注 内容： 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 病理組織検査

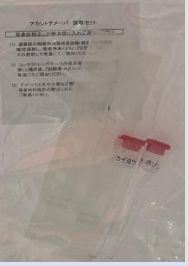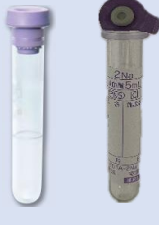47 便中ピロリ専用容器  容量: 内容: 有効期間: 容器表示 主な検査項目 便中ピロリ検査	48 アルミニウム専用容器  容量: 3.0mL 内容: ヘパリン中和剤 血清分離剤 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 アルミニウム	50 VZV・HSV採取  容量: 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 VZV特異抗原 HSV特異抗原
51 婦人科細胞診・LBC  容量: 内容: 有効期間: 容器表示 主な検査項目 HPV 婦人科細胞診	52 アカントアメーバー用  容量: 内容: 保存方法: 室温 凍結不可 有効期間: 主な検査項目 アカントアメーバー	53 マイコプラズマ核酸同定  容量: 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 主な検査項目 マイコプラズマ 核酸同定 (LAMP)
54 細菌検査用  容量: 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 細菌検査	55 細菌検査用 (血液培養)  容量: 3~10mL 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 細菌検査・血液培養	56 輸血関連  容量: 7.0mL 内容: EDTA2Na 保存方法: 有効期間: 容器表示 主な検査項目 不規則抗体スクリーニング クロスマッチ
59 T-SPOT・TB  容量: 10.0mL 内容: ヘパリンNa 保存方法: 室温 有効期間: 主な検査項目 TSPOT	66 不規則抗体同定  容量: ①生化学8.5mL ②EDTA7.0mL 内容: ①分離剤 ②EDTA2Na 保存方法: 室温 有効期間: 主な検査項目 不規則抗体同定	68 遮光EDTA  容量: 4.0mL 内容: EDTA 2 Na 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 ビタミンB1 ビタミンB2
69 全血凍結検体用  容量: 2.0mL 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 シクロスポリン タクロリムス	73 アンモニア専用容器  容量: 2.0mL 内容: EDTA 2 K 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 アンモニア	74 トロポニンT定性  容量: 2.0mL 内容: EDTA 有効期間: 容器表示 主な検査項目 トロポニンT定性 末梢血、BNP

容器一覧

75	百日咳菌核酸同定		結核菌（LAMP） レジオネラ菌（LAMP）
	容量：5.0mL		容量：
	内容：		内容：
	保存液		保存方法：室温
	保存方法：室温		有効期間：
	有効期間：容器表示		主な検査項目
	主な検査項目		結核菌（LAMP）
	百日咳菌（LAMP）		レジオネラ菌（LAMP）

ご利用いただきありがとうございます



登録衛生検査所

衛生検査所名称	業務内容	自治体登録番号
(株)臨床宮崎	生・清・血・微・寄・病	宮崎市第 2 号

〔注〕 生：生化学的検査 清：血清学的検査 血：血液学的検査 微：微生物学的検査 寄：寄生虫学的検査
病：病理学的検査

■ 検査に関するお問い合わせは・・・

臨床宮崎インフォメーション TEL 0985 (52) 6688
FAX 0985 (52) 8093